

Stuff you
should know

Brochure
d'informations

Get connected

Connecter

votre anneau


1





ouraring.com/app




2

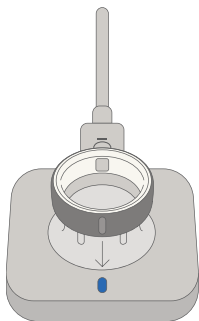

3

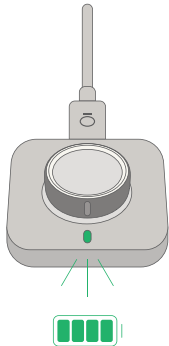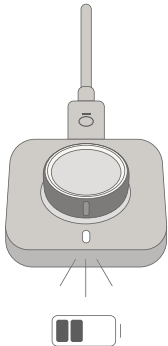

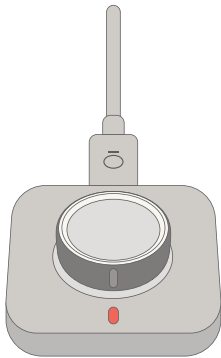

At a glance

Aperçu rapide




24/7



100m



Sauna

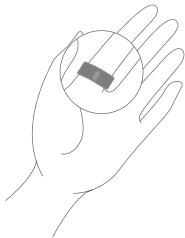

With all-day, everyday wear in mind, Oura Ring 5 is ready to go wherever you do.

Conçu pour être porté toute la journée, au quotidien, Oura Ring 5 est prêt à vous accompagner partout.

Wear your Oura Ring 5 with the dimple facing the palm of your hand.

Portez votre Oura Ring 5 en plaçant l'alvéole côté paume de la main.

Still need help?

Toujours besoin d'aide?

Oura Ring Guide & FAQ

Guide de l'anneau
Oura Ring et FAQ



support.ouraring.com

Privacy Policy

Politique de
confidentialité



ouraring.com/privacy-policy

Warranty Disclaimer

Exclusion de garantie



ouraring.com/terms-and-conditions

Thank you for choosing Oura Ring 5!

We want to do our best to support you on your health journey with Oura Ring. Here you'll find information about Oura Ring 5 and Oura Ring 5 Charger. This booklet lists the technical details and safety information of Oura Ring. Please read through carefully to use Oura Ring safely and get the best experience with OURA.

General usage

⚠️ Oura Ring 5 is designed for 24/7 usage, and can be worn during showers, saunas, baths, swimming, and snorkeling. **Oura Ring 5 is waterproof** up to 100 m / 328 ft.

⚠️ Clean Oura Ring regularly and keep it dry, to ensure good functionality and reduce potential skin irritation. You can clean Oura Ring by wiping down with a damp cloth and drying Oura Ring fully before using again.

⚠️ Use the provided size-specific Oura Ring 5 charger and cable for charging.

⚠️ **Oura Ring charger is not water resistant** and is intended for indoor use only. Do not use or store the charger in humid environments like bathrooms.

⚠️ Oura Ring may get scratched and can itself scratch softer materials (metal, jewelry or other objects) while using the ring in close contact.

Safety

Oura Ring is not a medical device, and is not intended to mitigate, prevent, treat, cure or diagnose any disease or condition. Always consult a physician regarding medical conditions. Always be sensitive to your body's responses and if you make any changes to your behavior based on data from your Oura Ring, you agree that you do so at your own risk.

⚠️ **If you feel unexpected, repeated, or long-term pain, fatigue, or discomfort due to having made changes to your sleep or activity, consult a physician before continuing with such changes.**

⚠️ **Oura Ring surface materials are safe for skin contact (ISO 10993 standard). If you experience irritation on your skin due to Oura Ring, remove the ring.** If symptoms persist after not using Oura Ring, please contact a physician.

⚠️ Please be careful that Oura Ring does not get caught on fixed structures or heavy objects.

⚠️ In cases of emergency or discomfort, or if you can't remove Oura Ring yourself, seek immediate medical attention.

⚠️ **Keep Oura Ring away from children.** This product is not intended for individuals under the age of 18.

⚠️ **Do not expose Oura Ring or the charger to heat, such as in a vehicle or directly in the sun. Do not charge Oura Ring in such an environment.**

⚠️ **Do not attempt to open, cut or puncture Oura Ring.**

⚠️ **Avoid handling batteries, working on devices with machinery that contain batteries, or situations where there is a risk of electric shock.**

Product Information

→ **Operating temperature range:** -10 – 54 °C / 14 – 129 °F

→ Red and green light-emitting diodes (LED) in the product are in the visible color range. They are safe for the wearer and other people nearby.

→ **Memory capacity:** Recommended to sync Oura Ring data daily with Oura App to ensure full access to features and insights. See more details in the Help Center on ring storage capacity.

→ **Battery:** Rechargeable Li-ion battery

→ **Charging:** at room temperature. Optimal charging temperature: min 18 °C / 65 °F - max 32 °C / 89 °F. Normal operation distance for Charger model OA14 is more than 20 cm (8 in) from the human body.

→ **Power cord type:** USB-C to USB-C. Use external 5Vdc power supply that complies with IEC 62368-1 standard. The power available to the equipment should not exceed 15W after three seconds, to prevent battery degradation.

Oura charger complies with EN/IEC 62368-1 international safety standard for ICT and AV equipment.

→ **Connectivity:** Bluetooth Low Energy

→ **Oura Ring firmware updatability:** Automatic firmware updates via Oura App

→ **Oura App availability:** App Store, Google Play

→ **Oura App compatibility:** See ouraring.com/compatibility

→ **Security:** Encrypted Bluetooth communication used between Oura Ring and Oura App

→ **Dispose of Oura Ring:** (and internal battery) in accordance with applicable local laws and regulations. Special handling may be required. The charger is an electronic device and local legislation for electronics recycling should be followed.

→ **Factory reset instructions:** at support.ouraring.com to perform a factory reset before ring disposal.

Warranty Disclaimer: ouraring.com/terms-and-conditions

Support and FAQs

If you have questions about using your Oura Ring, Oura App, or our online services, please do not hesitate to contact us.

You'll find Frequently Asked Questions (FAQs) at support.ouraring.com.

You can contact Support at support.ouraring.com or on your Oura App: Home > Help.

You can access OURA privacy policies at ouraring.com/privacy-policy.

Français

Merci d'avoir choisi l'anneau Oura Ring 5 !

Nous souhaitons avant tout vous accompagner dans votre parcours de santé avec l'anneau Oura Ring. Vous trouverez ci-dessous des informations sur l'anneau Oura Ring 5 ainsi que sur le chargeur Oura Ring 5. Cette brochure présente les informations techniques et de sécurité de l'Oura Ring. Veuillez les lire attentivement pour l'utiliser en toute sécurité et profiter au mieux de votre expérience avec OURA.

Utilisation générale

△ L'anneau Oura Ring 5 est conçu pour être utilisé 24 h/24, 7 j/7 et peut se porter pendant la douche, le sauna, le bain, la natation et la plongée avec masque et tuba. **L'anneau Oura Ring 5 est étanche** jusqu'à 100 m de profondeur.

△ Nettoyez régulièrement votre anneau Oura Ring et gardez-le au sec pour assurer son bon fonctionnement et limiter la survenue d'éventuelles irritations cutanées. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le complètement avant toute utilisation.

△ Pour charger l'anneau Oura Ring 5, utilisez le chargeur et le câble adaptés qui vous ont été fournis.

△ **Le chargeur Oura Ring n'est pas étanche** et est destiné uniquement à un usage en intérieur. N'utilisez pas ou ne stockez pas le chargeur dans un environnement humide comme une salle de bain.

△ L'anneau Oura Ring peut se rayer et rayer des matériaux plus tendres (métal, bijoux ou autres objets) en cas de contact.

Sécurité

L'anneau Oura Ring n'est pas un dispositif médical et n'est pas conçu pour atténuer, prévenir, traiter, guérir ou diagnostiquer une quelconque maladie ou affection. Consultez toujours un médecin en cas de problème médical. Soyez toujours à l'écoute de votre corps et si vous modifiez vos habitudes en fonction des données de votre Oura Ring, vous le faites à vos risques et périls.

△ **Si vous ressentez une douleur, de la fatigue ou un inconfort inattendus, répétés ou durables en raison de changements apportés à votre sommeil ou à votre activité, consultez un médecin avant de poursuivre.**

△ **Les matériaux de surface de l'anneau Oura Ring sont sans danger pour la peau (norme ISO 10993). Si vous développez une irritation cutanée suite au port de l'anneau Oura Ring, retirez-le.** Si les symptômes persistent après avoir retiré l'anneau Oura Ring, consultez un médecin.

△ Veillez à ce que l'anneau Oura Ring ne s'accroche pas sur des structures fixes ou à des objets lourds.

△ En cas d'urgence ou d'inconfort, ou si vous n'arrivez pas enlever l'anneau Oura Ring vous-même, consultez immédiatement un médecin.

△ **Gardez l'anneau Oura Ring hors de la portée des enfants.** Ce produit est destiné aux personnes de plus de 18 ans.

△ **N'exposez pas l'anneau Oura Ring ou le chargeur à la chaleur, comme dans un véhicule ou en plein soleil. Ne chargez pas l'anneau Oura Ring dans de telles conditions.**

△ **N'essayez pas d'ouvrir, de découper ou de percer l'anneau Oura Ring.**

△ **Évitez de manipuler des piles, de travailler sur des appareils qui contiennent des piles ou de vous trouver dans une situation impliquant un risque de choc électrique.**

Informations sur le produit

→ **Plage de température de fonctionnement:** -10 à 54 °C.

→ Les diodes électroluminescentes (LED) rouges et vertes du produit se trouvent dans le spectre des couleurs visibles. Elles sont sans danger pour le porteur et les personnes à proximité.

→ **Capacité de mémoire:** Il est recommandé de synchroniser quotidiennement les données de votre anneau Oura Ring avec l'application Oura pour garantir un accès complet aux fonctionnalités et aux informations. Pour plus de détails sur la capacité de stockage des anneaux, consultez le Centre d'aide.

→ **Batterie:** batterie rechargeable Li-ion

→ **Charge:** à température ambiante. Température de charge optimale : min 18 °C - max 32 °C. Pour assurer le fonctionnement normal du chargeur OA14, respectez une distance d'au moins 20 cm par rapport à votre corps.

Cordon d'alimentation: USB-C vers USB-C. Utilisez une alimentation externe 5V CC conforme à la norme CEI 62368-1. La puissance disponible pour l'équipement ne doit pas dépasser 15 W pendant plus de trois secondes pour éviter d'endommager la batterie.

Le chargeur Oura est conforme à la norme de sécurité internationale EN/CEI 62368-1 pour les équipements TIC et AV.

→ **Connectivité:** Bluetooth faible consommation

→ **Mise à jour du micrologiciel de l'anneau Oura Ring:** mises à jour automatiques du micrologiciel via l'application Oura

→ **Téléchargement de l'application Oura:** App Store, Google Play

→ **Compatibilité de l'application Oura:** voir [ouraring.com/compatibility](#)

→ **Sécurité:** communication Bluetooth cryptée utilisée entre l'anneau Oura Ring et l'application Oura.

→ **La mise au rebut de l'anneau Oura Ring:** (et de sa batterie interne) doit se faire conformément aux lois et réglementations locales applicables. Un traitement spécial peut être nécessaire. Le chargeur est un appareil électronique et la législation locale concernant le recyclage des appareils électroniques doit être suivie.

→ **Instructions de rétablissement de la configuration d'usine:** sur la page d'assistance [ouraring.com/hc/fr](#) pour rétablir la configuration d'usine de l'anneau avant sa mise au rebut.

Exclusion de garantie : [ouraring.com/terms-and-conditions](#)

Assistance et FAQ

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre anneau Ora Ring, de l'application Ora ou des services en ligne, n'hésitez pas à nous contacter.

Vous trouverez une réponse à vos questions (FAQ) à l'adresse suivante : support.ouraring.com/hc/fr

Vous pouvez contacter l'assistance sur la page support.ouraring.com/hc/fr ou via votre application Ora : Accueil > Aide.

Vous pouvez accéder à la politique de confidentialité de OURA sur ouraring.com/privacy-policy.

Deutsch

Danke, dass du dich für den Ora Ring 5 entschieden hast!

Wir möchten dich mit deinem Ora Ring in puncto Gesundheit bestmöglich unterstützen. Hier findest du Informationen zum Ora Ring 5 und dem Ladegerät von Ora Ring 5. Des Weiteren sind hier die technischen Daten und Sicherheitsinformationen zum Ora Ring aufgeführt. Bitte lies sie dir sorgfältig durch, damit du den Ora Ring sicher anwenden und deine Erfahrung mit OURA genießen kannst.

Allgemeine Anwendung

⚠ Ora Ring 5 kann rund um die Uhr getragen werden und muss auch beim Duschen, in der Sauna, beim Baden, Schwimmen oder Schnorcheln nicht abgelegt werden. **Ora Ring 5 ist bis 100 m wasserdicht.**

⚠ Reinige den Ora Ring regelmäßig und halte ihn trocken, damit er seine volle Funktionsfähigkeit behält und das Risiko für Hautreizungen minimiert wird. Wische den Ora Ring zum Reinigen mit einem feuchten Tuch ab und trockne ihn vor dem weiteren Tragen vollständig ab.

⚠ Verwende das mitgelieferte größenspezifische Ladegerät und Kabel zum Aufladen deines Ora Ring 5.

⚠ **Das Ladegerät von Ora Ring ist nicht wasserdicht** und nur für den Innenbereich geeignet. Verwende oder lagere das Ladegerät nicht in feuchten Umgebungen wie z. B. einem Badezimmer.

⚠ Der Ora Ring kann zerkratzt werden und kann bei engem Kontakt seinerseits weichere Materialien (wie z. B. Metalle, Schmuck oder andere Gegenstände) zerkratzen.

Sicherheit

Der Ora Ring ist kein medizinisches Gerät und nicht für die Linderung, Vorbeugung, Behandlung, Heilung oder Diagnostizierung von Krankheiten oder Beschwerden vorgesehen. Suche bei Erkrankungen stets einen Arzt auf. Achte stets auf die Reaktionen deines Körpers und wenn du dein Verhalten aufgrund der Daten, die dir dein Ora Ring liefert, änderst, stimmst du zu, dass du dies auf eigenes Risiko tust.

⚠ Wenn du unerwartete, wiederholt auftretende oder lang anhaltende Schmerzen, Müdigkeit oder Beschwerden verspürst, weil du Änderungen an deinen Schlafgewohnheiten oder Aktivitäten vorgenommen hast, konsultiere einen Arzt oder eine Ärztin, bevor du diese Änderungen beibehältst.

⚠ Die Oberflächenmaterialien des Ora Rings sind sicher für den Hautkontakt (ISO-Norm 10993). Solltest du aufgrund des Ora Rings eine Hautreizung feststellen, nimm den Ring ab. Sollten die Symptome anhalten, obwohl du den Ora Ring nicht trägst, konsultiere einen Arzt oder eine Ärztin.

⚠ Bitte achte darauf, dass der Ora Ring nicht an feststehenden Konstruktionen oder schweren Gegenständen hängen bleibt.

⚠ Suche im Notfall oder bei Beschwerden, oder wenn du den Ora Ring nicht selbst abziehen kannst, unverzüglich einen Arzt oder eine Ärztin auf.

⚠ Halte den Ora Ring von Kindern fern. Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt.

⚠ Schütze den Ora Ring und das Ladegerät vor Hitze und lasse beides nicht in einem Auto oder in der Sonne liegen. Lade den Ora Ring nicht in einer solchen Umgebung auf.

⚠ Versuche nicht, den Ora Ring zu öffnen, zu zerschneiden oder zu durchstechen.

⚠ Vermeide den Umgang mit Batterien/Akkus sowie die Arbeit an Geräten und mit Maschinen, die Batterien/Akkus enthalten, oder Situationen, in denen das Risiko eines Elektroschocks besteht.

Produktinformation

→ **Betriebstemperaturbereich:** -10 – 54 °C

→ Die im Produkt verwendeten roten und grünen Leuchtdioden (LED) liegen im sichtbaren Farbbereich. Sie sind sicher für den Benutzer und Personen in der Umgebung.

→ **Speicherkapazität:** Es wird empfohlen, die Ora Ring-Daten täglich mit der Ora App zu synchronisieren, um den vollen Zugriff auf Funktionen und Erkenntnisse zu gewährleisten. Weitere Details zur Speicherkapazität von Ringen findest du im Ora-Hilfe-Center.

→ **Akku:** Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku

→ **Aufladung:** bei Raumtemperatur. Optimale Ladetemperatur: min. 18 °C – max. 32 °C. Die Vorgabe für die normale Betriebsdistanz vom menschlichen Körper beträgt für das Aufladegerät OA14 mehr als 20 cm.

Netzkabel Typ: USB-C zu USB-C. Das Gerät ist für die Versorgung durch eine externe 5-V-Gleichstromquelle vorgesehen, die der Norm IEC 62368-1 entspricht. Die dem Gerät zur Verfügung stehende Leistung darf nach 3 Sekunden 15 W nicht überschreiten, um Leistungsseinbußen des Akkus vorzubeugen.

Das Ora-Ladegerät entspricht der internationalen Sicherheitsnorm EN/IEC 62368-1 für IKT- und AV-Geräte.

→ **Konnektivität:** Bluetooth Low Energy

→ **Aktualisierbarkeit der Ring-Firmware:** Automatische Firmware-Aktualisierungen über die Oura-App

→ **Verfügbarkeit der Oura-App:** App Store, Google Play

→ **Kompatibilität mit der Oura-App:** Siehe ouraring.com/compatibility

→ **Sicherheit:** Zwischen dem Oura Ring und der Oura App wird verschlüsselte Bluetooth-Kommunikation verwendet.

→ **Entsorgung des Oura Rings:** (und des internen Akkus) in Einklang mit den vor Ort geltenden Gesetzen und Bestimmungen. Gegebenenfalls ist eine besondere Handhabung erforderlich. Das Ladegerät ist ein elektronisches Gerät und die lokale Gesetzgebung für das Recycling von Elektronik sollte befolgt werden.

→ **Auf support.ouraring.com/hc/de findest du Anweisungen, wie der Ring vor der Entsorgung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.**

Haftungsausschluss ouraring.com/terms-and-conditions

Support und häufig gestellte Fragen

Solltest du Fragen zur Verwendung deines Oura Rings, der Oura App oder zu unseren Online-Diensten haben, setze dich gern mit uns in Verbindung.

Die Häufig gestellten Fragen (FAQ) findest du unter support.ouraring.com.

Du kannst den Support über support.ouraring.com/hc/de kontaktieren oder in deine Oura-App gehen: Startseite > Hilfe.

Die Datenschutzrichtlinie von OURA findest du unter ouraring.com/privacy-policy.

Suomi

Kiitos, että valitsit Oura Ring 5 -sormuksen!

Haluamme tukea sinua parhaamme mukaan matkallasi kohti parempaa terveyttä Oura Ringin avulla. Tässä lehteisessä on tietoa Oura Ring 5 -sormuksesta ja Oura Ring 5 -laturista. Lisäksi se sisältää Oura Ringin tekniset tiedot ja turvallisuustiedot. Lue lehtinen huolellisesti varmistaksesi Oura Ringin turvallisen käytön ja saadaksesi kaiken irti OURA-kokemuksestasi.

Käyttö

△ Oura Ring 5 on suunniteltu ympärivuorokautiseen (24/7) käyttöön, ja sitä voi käyttää suihkussa, saunassa, kylvyssä, uudessa ja snorklatessa. **Oura Ring 5 on vedenpitävä** 100 metriin / 328 jalkaan asti.

△ Puhdistu Oura Ring säännöllisesti ja pidä se kuivana toimivuuden varmistamiseksi ja mahdollisen ihoärsytyksen välttämiseksi. Voit puhdistaa Oura Ringin pyyhkimällä sen kostealla liinalla. Kuivaa Oura Ring huolellisesti ennen käytön jatkamista.

△ Lataa sormus käyttämällä pakkaukseen sisältyvää sopivankokoista Oura Ring 5 -laturia ja latausjohtoa.

△ **Oura Ringin laturi ei ole vedenkestävä**, ja se on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä tai säilytä laturia kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa.

△ Oura Ring voi vaurioitua ja naarmuttaa pehmeitä materiaaleja (metallia, koruja ja muita esineitä).

Turvallisuus

Oura Ring ei ole lääkinällinen laite, eikä sitä ole tarkoitettu terveydentilan tai sairauksien diagnosoimiseen, hoitamiseen, parantamiseen, tarkkailemiseen tai ehkäisemiseen. Ole aina yhteydessä lääkäriin, jos sinulla on kysyttävää terveydentilastasi. Kuuntele aina kehoasi. Jos muutat käyttäytymistäsi Oura Ringin tuottaman data perusteella, kannat siitä vastuun itse.

△ **Jos koet odottamatonta, toistuvaa tai pitkäkestoista kipua, uupumusta tai epämukavuutta tehtyäsi muutoksia nukkumiseesi tai liikkumiseesi, keskustele lääkäriin kanssa ennen kuin jatkat muuttuneiden elämäntapojen noudattamista.**

△ **Oura Ringin pintamateriaalit ovat turvallisia ihokontaktissa (ISO 10993 -standardi).** Jos Oura Ring aiheuttaa ihoärsytystä, poista sormus. Jos oireet jatkuvat Oura Ringin käytön lopettamisen jälkeen, hakeudu lääkäriin.

△ Noudata varovaisuutta, jotta Oura Ring ei tartu kiinni rakenteisiin tai raskaisiin esineisiin.

△ Jos kyseessä on hätätilanne tai jos Oura Ring aiheuttaa kipua etkä pysty irrottamaan sormusta itse, hakeudu välittömästi lääkäriin.

△ **Säilytä Oura Ring lasten ulottumattomissa.** Tuotetta ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille.

△ **Älä altista Oura Ringiä tai laturia kuumuudelle esimerkiksi jättämällä sitä kuumaan autoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Älä lataa Oura Ringiä kuumassa ympäristössä.**

△ **Älä yritä avata tai leikata Oura Ringiä aläkäte siihen reikää.**

△ **Vältä paristojen käsittelyä, työskentelyä paristoja sisältävien laitteiden parissa sekä tilanteita, joissa on sähköiskun vaara.**

Tekniset tiedot

→ **Käyttölämpötila:** -10 °C...+54 °C / 14 -129 °F

→ Tuotteen punaisten ja vihreiden loisteiodien (LED) säteily on näkyvän valon alueella. Ne ovat turvallisia käyttäjälle ja lähellä oleville henkilöille.

→ **Muistikapasiteetti:** Suosittelemme synkronoimaan Oura Ringin tiedot päivittäin Oura-sovelluksen kanssa, jotta kaikki ominaisuudet ja tiedot ovat käytettävissä. Lisätietoja sormuksen tallennuskapasiteetista on Oura Tuessa.

→ **Akku:** ladattava litiumioniakku

→ **Latus:** huonelämpötilassa. Optimaalinen latauslämpötila: 18–32 °C / 65–89 °F. Laturimallin OA1 normaali käyttöikä on 500 ihmisskehosta on enemmän kuin 20 cm (8 tuumaa).

Virtajohdon tyyppi: USB-C–USB-C. Käytä 5 V:n tasavirtalähdettä, joka on IEC 62368-1 -standardin mukainen. Laitteen käytettävissä oleva teho ei saa ylittää 15 wattia 3 sekunnin jälkeen akun heikkenemisen ehkäisemiseksi.

Oura-laturi noudattaa kansainvälistä ICT- ja AV-laitteiden turvallisuutta koskevaa EN/IEC 62368-1 -standardia.

→ **Tiedonsiirtoyhteys:** Bluetooth Low Energy

→ **Oura Ring -laitteohjelmiston päivittäminen:** automaattiset päivitykset Oura-sovelluksen kautta

→ **Oura-sovelluksen saattavuus:** App Store, Google Play

→ **Oura-sovelluksen yhteensopivuus:** katso ouraring.com/compatibility

→ **Tietoturva:** salattu Bluetooth-tiedonsiirtoyhteys Oura Ringin ja Oura-sovelluksen välillä.

→ **Hävitä Oura Ring:** (akkuineen) paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Erityiskäsittelyä saatetaan edellyttää. Laturi on elektroniikkalaitteita, ja paikallista elektroniikkalaitteiden kierrätystä koskevaa lainsäädäntöä on noudatettava.

→ **Katso ohjeet tehdasasetusten palauttamiseen:** osoitteesta support.ouraring.com/hc/ft ennen sormuksen hävittämistä.

Takuun vastuuvapausilmoitus:

ouraring.com/terms-and-conditions

Tuki ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Jos sinulla on kysyttävää Oura Ringin, Oura Appin tai verkkopalveluidemme käytöstä, ota meihin yhteyttä.

Voit lukea vastauksia yleisimpiin kysymyksiin osoitteesta support.ouraring.com.

Voit ottaa yhteyttä Oura-tukeen osoitteessa support.ouraring.com/hc/ft

tai Oura Appin kautta: **Koti** > Tuki.

OURAN tietosuojaselosteet ovat luettavissa osoitteessa ouraring.com/privacy-policy.

Español

¡Gracias por elegir el Oura Ring 5!

Queremos hacer todo lo posible por ayudarte en tu viaje personal hacia una mejor salud con tu Oura Ring. Aquí encontrarás información sobre el Oura Ring 5 y el cargador del Oura Ring 5. Esta guía incluye datos técnicos e información de seguridad de tu Oura Ring. Léela detenidamente para usar el Oura Ring de una forma segura y disfrutar al máximo de la experiencia OURA.

Uso general

△ El Oura Ring 5 está diseñado para un uso continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes utilizarlo mientras te duchas o te bañas, en la sauna, e incluso al nadar o practicar

esnróquel. **El Oura Ring 5 es resistente al agua** hasta los 100 m de profundidad.

△ Limpia el Oura Ring regularmente y manténlo seco para garantizar un funcionamiento correcto y reducir una posible irritación de la piel. Puedes limpiar el Oura Ring con un paño húmedo y secarlo completamente antes de volver a usarlo.

△ Usa el cargador y el cable proporcionados específicamente para la talle de tu Oura Ring 5.

△ **El cargador del Oura Ring no es resistente al agua** y solo está indicado para su uso en interiores. No uses ni almacenes el cargador en un entorno húmedo como un cuarto de baño.

△ El Oura Ring puede rallarse o rallar otros materiales más suaves (metales, joyas u otros objetos) al usarlo en contacto con dichos materiales.

Seguridad

El Oura Ring no es un dispositivo médico y no está pensado para mitigar, prevenir, tratar, curar ni diagnosticar dolencias ni enfermedades de ningún tipo. Consulta siempre a un médico ante cualquier duda que puedas tener sobre tu estado de salud. Presta atención siempre a cómo reacciona tu cuerpo y, en caso de realizar cambios en tu conducta en base a los datos de tu Oura Ring, aceptas hacerlo por tu cuenta y riesgo.

△ Si sientes dolor, fatiga o malestar de un modo inesperado, repetido o prolongado como consecuencia de haber cambiado tus hábitos de sueño o tus actividades, te recomendamos que consultes a un médico antes de continuar con dichos cambios.

△ Los materiales de la superficie del Oura Ring son seguros para su uso en contacto con la piel (norma ISO 10993). Si sientes irritaciones en la piel causadas por el Oura Ring, quítate el anillo. Consulta con un médico si los síntomas persisten tras quitarte el Oura Ring.

△ Ten cuidado de que el Oura Ring no se quede atrapado en estructuras fijas o bajo objetos pesados.

△ En caso de emergencia o malestar, o si no puedes quitarte el Oura Ring tú mismo, acude al médico de inmediato.

△ **Mantén el Oura Ring fuera del alcance de los niños.** Este producto no está destinado a personas menores de 18 años.

△ **No expongas el Oura Ring ni el cargador a fuentes de calor, por ejemplo, en el interior del coche o bajo el sol. No cargues el Oura Ring en estos entornos.**

△ **No intentes abrir, cortar ni perforar el Oura Ring.**

△ Evita la manipulación de baterías, los trabajos con dispositivos o máquinas que contengan baterías, o situaciones en las que haya peligro de descarga eléctrica.

Información del producto

→ **Rango de temperaturas de funcionamiento:** de -10 a 54 °C

→ Los LED rojo y verde utilizados en el anillo se encuentran dentro de la gama de colores visibles. Son seguros tanto para el usuario como para las personas que lo rodean.

→ **Capacidad de memoria:** Se recomienda sincronizar los datos del Oura Ring con la aplicación Oura a diario para garantizar el acceso a todas las funciones y análisis. Puedes encontrar más información sobre la capacidad de almacenamiento del anillo en el Centro de Ayuda.

→ **Batería:** recargable de polímero de litio

→ **Recarga:** a temperatura ambiente. Temperatura de recarga óptima: de 18 a 32 °C. La distancia de funcionamiento normal para el modelo de cargador OA14 es de más de 20 cm del cuerpo humano.

Cable de alimentación: USB-C a USB-C. Usa una fuente de energía externa de 5 Vcc que cumpla con la norma IEC 62368-1. La potencia disponible para el equipo nunca superará los 15 W después de tres segundos (para así evitar la degradación de la batería).

El cargador Oura cumple con la norma internacional de seguridad EN/IEC 62368-1 para equipos TIC y AV.

→ **Conectividad:** Bluetooth de baja energía

→ **Actualizaciones del firmware del Oura Ring:** automáticas a través de la aplicación Oura

→ **Disponibilidad de la aplicación Oura:** App Store y Google Play

→ **Compatibilidad de la aplicación Oura:**

consulta ouraring.com/compatibility

→ **Seguridad:** conexión Bluetooth cifrada entre el Oura Ring y la aplicación Oura

→ **Para desechar el Oura Ring:** (y su batería interna), respeta la legislación local en vigor. Puede que sea necesaria una manipulación especial. El cargador es un dispositivo electrónico y debe seguirse la legislación local sobre reciclaje de productos electrónicos.

→ **Instrucciones para restablecimiento de fábrica:** consulta support.ouraring.com/hc/es para realizar un restablecimiento de fábrica antes de desechar el anillo.

Exención de responsabilidad de la garantía:

ouraring.com/terms-and-conditions

Ayuda y preguntas más frecuentes

Si tienes alguna pregunta sobre el uso del Oura Ring, la aplicación Oura o cualquiera de nuestros servicios online, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Encontrarás las preguntas más frecuentes (FAQ) en support.ouraring.com.

Puedes ponerte en contacto con el Servicio de atención al cliente a través de support.ouraring.com/hc/es o través de la aplicación Oura:Inicio> Ayuda

Puedes consultar las políticas de privacidad de OURA en ouraring.com/privacy-policy.

Português

Obrigado por escolher o Oura Ring 5!

Queremos prestar-lhe o nosso melhor apoio na sua jornada de saúde com o Oura Ring. Aqui encontrará informações sobre o Oura Ring 5 e o carregador Oura Ring 5. Este folheto apresenta os pormenores técnicos e as informações de segurança do Oura Ring. Leia atentamente para utilizar o Oura Ring em segurança e obter a melhor experiência com a OURA.

Utilização geral

⚠ O Oura Ring 5 foi concebido para ser utilizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pode ser usado durante os duchas, saunas, banhos, natação e mergulho. **O Oura Ring 5 é a prova de água até 100 m/328 pés.**

⚠ Limpe o Oura Ring regularmente e mantenha-o seco, para garantir uma boa funcionalidade e reduzir potenciais irritações cutâneas. Pode limpar o Oura Ring passando um pano húmido e secando-o completamente antes de o voltar a utilizar.

⚠ Utilize o carregador e o cabo Oura Ring 5 de tamanho específico fornecidos para o carregamento.

⚠ O carregador Oura Ring não é resistente à água e destina-se apenas a utilização em espaços interiores. Não utilize ou guarde o carregador em ambientes húmidos, como casas de banho.

⚠ O Oura Ring pode ficar riscado e pode ele próprio riscar materiais mais macios (metal, joias ou outros objetos) ao utilizar o anel em contacto próximo.

Segurança

O Oura Ring não é um dispositivo médico e não se destina a mitigar, prevenir, tratar, curar ou diagnosticar qualquer doença ou condição. Consultar sempre um médico relativamente a problemas de saúde. Seja sempre sensível às reações do seu corpo e se fizer quaisquer alterações ao seu comportamento com base nos dados do seu Oura Ring, concorda que o faz por sua conta e risco.

⚠ **Se sentir dores, fadiga ou desconforto inesperados, repetidos ou de longa duração devido a alterações no seu sono ou atividade, consulte um médico antes de prosseguir com essas alterações.**

⚠ **Os materiais da superfície do Oura Ring são seguros para o contacto com a pele (norma ISO 10993). Se sentir irritação na sua pele devido ao Oura Ring, retire o anel. Se os sintomas persistirem depois de não utilizar o Oura Ring, contacte um médico.**

⚠ Tenha cuidado para que o Oura Ring não fique preso em estruturas fixas ou objetos pesados.

⚠ Em caso de emergência ou desconforto, ou se não conseguir remover o Oura Ring sozinho, procure assistência médica imediata.

⚠ **Mantenha o Oura Ring fora do alcance das crianças.** Este produto não se destina a pessoas com menos de 18 anos.

⚠ Não exponha o Oura Ring ou o carregador ao calor, por exemplo, num veículo ou diretamente ao sol. Não carregue o Oura Ring neste tipo de ambientes.

⚠ Não tente abrir, cortar ou perfurar o Oura Ring.

⚠ Evite manusear baterias, trabalhar em dispositivos com máquinas que contenham baterias ou situações com risco de choque elétrico.

Informações sobre o produto

→ **Gama de temperaturas de funcionamento:** -10 – 54 °C / 14 – 129 °F

→ Os diodos emissores de luz (LED) vermelhos e verdes no produto encontram-se na gama de cores visíveis. Estes são seguros para o utilizador e para as pessoas que se encontram nas proximidades.

→ **Capacidade de memória:** Recomendamos sincronizar os dados do Oura Ring diariamente com a aplicação Oura, de modo a garantir acesso total às funcionalidades e insights. Consulte mais detalhes no Centro de ajuda sobre a capacidade de armazenamento do anel.

→ **Bateria:** Bateria de íões de lítio recarregável

→ **Carregamento:** à temperatura ambiente. Temperatura ideal de carregamento: min. 18 °C / 65 °F – máx. 32 °C / 89 °F. A distância normal de funcionamento do carregador modelo ÓA14 é superior a 20 cm (8 pol.) a partir do corpo humano.

Cabo de alimentação do tipo: USB-C para USB-C. Utilize uma fonte de alimentação externa de 5Vdc que cumpra a norma IEC 62368-1. A potência disponível para o equipamento não deve exceder 15W após três segundos, para evitar a degradação da bateria.

O carregador Oura está em conformidade com a norma internacional de segurança EN/IEC 62368-1 para equipamento ICT e AV.

→ **Conectividade:** Bluetooth Low Energy

→ **Capacidade de atualização do firmware do Oura Ring:** Atualizações automáticas do firmware através da aplicação Oura

→ **Disponibilidade da aplicação Oura:** App Store, Google Play

→ **Compatibilidade da aplicação Oura:** Ver ouraring.com/compatibility

→ **Segurança:** Comunicação Bluetooth encriptada utilizada entre o Oura Ring e a aplicação Oura

→ **Eliminar o Oura Ring:** (e a bateria interna) de acordo com as leis e regulamentos locais aplicáveis. Poderá ser necessário um tratamento especial. O carregador é um dispositivo eletrónico e a legislação local relativa à reciclagem de produtos eletrónicos deve ser respeitada.

→ **Instruções de reposição de fábrica:** em support.ouraring.com para efetuar uma reposição de fábrica antes da eliminação do anel.

Isenções de garantia: ouraring.com/terms-and-conditions

Suporte e Perguntas Frequentes

Se tiver dúvidas sobre a utilização do seu Oura Ring, da aplicação Oura ou dos nossos serviços online, não hesite em contactar-nos. Poderá consultar as Perguntas Frequentes (FAQs) em support.ouraring.com.

Pode contactar o Suporte em support.ouraring.com ou na sua aplicação Oura: Página Home > Help.

Pode aceder às políticas de privacidade da OURA em ouraring.com/privacy-policy.

Italiano

Gratie per aver scelto Oura Ring 5!

Desideriamo fare del nostro meglio per supportarti nel tuo viaggio verso il benessere con Oura Ring. Di seguito troverai le informazioni su Oura Ring 5 e il relativo caricabatterie. Questo manuale elenca i dettagli tecnici e le informazioni sulla sicurezza di Oura Ring. Leggilo con attenzione in modo da utilizzare Oura Ring in tutta sicurezza e ottenere la migliore esperienza con OURA.

Uso generale

⚠ Oura Ring 5 è stato progettato per essere utilizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e può essere indossato durante la doccia, la sauna, il nuoto e lo snorkeling. **Oura Ring 5 è resistente all'acqua** fino a 100 m di profondità.

⚠ Pulisci regolarmente Oura Ring e tienilo asciutto per garantirne il buon funzionamento e ridurre potenziali irritazioni della pelle. Puoi pulire Oura Ring utilizzando un panno inumidito e asciugando completamente l'anello prima dell'uso.

⚠ Per la ricarica, usa il caricabatterie e il cavo specifici di Oura Ring 5 in dotazione.

⚠ Il caricabatterie di Oura Ring non è resistente all'acqua ed è destinato esclusivamente all'uso in ambienti al chiuso. Non usare o riporre il caricabatterie in ambienti umidi come i bagni.

⚠ Oura Ring potrebbe graffiarsi e può graffiare materiali morbidi (metalli, gioielli o altri oggetti) se utilizzato a stretto contatto con essi.

Sicurezza

Oura Ring non è un dispositivo medico e non è destinato a ridurre, prevenire, trattare, curare o diagnosticare patologie o problemi di salute. Rivolgiti sempre a un medico in caso di problemi di salute. Presta sempre attenzione a come reagisce il tuo corpo e sei decidi di regolare le tue abitudini in base ai dati del tuo Oura Ring, sii consapevole di farlo a tuo rischio e pericolo.

⚠ In caso di dolore, affaticamento o fastidio imprevisto, ripetuto nel tempo o che si protrae a seguito a cambiamenti delle tue routine riguardanti sonno o attività, rivolgiti a un medico prima di continuare.

⚠ **I materiali della superficie di Oura Ring sono sicuri per il contatto con la pelle (standard ISO 10993). In caso di irritazioni della pelle provocate da Oura Ring, rimuovi l'anello. Se i sintomi persistono dopo la rimozione di Oura Ring, rivolgiti a un medico.**

⚠ **Assicurati che Oura Ring non rimanga impigliato in strutture fisse o oggetti pesanti.**

⚠ **In caso di emergenza o fastidio, o se non riesci a rimuovere Oura Ring autonomamente, rivolgiti immediatamente a un medico.**

⚠ **Tieni Oura Ring lontano dalla portata dei bambini.** Questo prodotto non è destinato ai minori di 18 anni.

⚠ **Non esporre Oura Ring o il caricabatterie al calore, lasciandolo per esempio in un veicolo o sotto alla luce solare diretta. Non caricare Oura Ring in un ambiente del genere.**

⚠ **Non cercare di aprire, tagliare o forare Oura Ring.**

⚠ **Evita di manipolare batterie, lavorare su dispositivi con macchinari che contengono batterie o situazioni dove sussiste il rischio di folgorazione.**

Informazioni sul prodotto

→ **Intervallo della temperatura di esercizio:** -10-54 °C

→ I diodi a emissione di luce (LED) rossi e verdi nel prodotto rientrano nella gamma di colori visibili. Sono sicuri per chi li indossa e per le altre persone nelle vicinanze.

→ **Capacità di memoria:** Si consiglia di sincronizzare quotidianamente i dati di Oura Ring con Oura App per garantire l'accesso completo alle funzionalità e agli approfondimenti. Per maggiori dettagli sulla capacità di archiviazione dell'anello, consultare il Centro assistenza.

→ **Batteria:** batteria Li-ion ricaricabile

→ **Ricarica:** a temperatura ambiente. Temperatura di ricarica ottimale: min 18 °C - max 32 °C. La distanza operativa normale per il modello di caricabatterie OA14 è superiore a 20 cm (8 pollici) dal corpo umano.

Cavo di alimentazione: da USB-C a USB-C. Utilizza un alimentatore esterno da 5 V CC conforme allo standard IEC 62368-1. L'alimentazione dell'apparecchiatura non deve superare i 15 W dopo tre secondi, per evitare il deterioramento della batteria.

Il caricabatterie Oura è conforme agli standard di sicurezza internazionali EN/IEC 62368-1 per apparecchiature TIC e AV.

→ **Connettività:** Bluetooth Low Energy

→ **Aggiornabilità del firmware di Oura Ring:** aggiornamenti automatici del firmware tramite Oura App

→ **Disponibilità di Oura App:** App Store, Google Play

→ **Compatibilità di Oura App:** vedere ouraring.com/compatibility

→ **Protezione:** comunicazione Bluetooth crittografata utilizzata tra Oura Ring e Oura App

→ **Smaltere Oura Ring:** (e la batteria interna) in conformità con le leggi e i regolamenti locali vigenti. Potrebbe essere necessario un trattamento speciale. Il caricabatterie è un dispositivo elettronico

ed è necessario attenersi alla legislazione locale per il riciclaggio dei componenti elettronici.

→ **Istruzioni per il ripristino alle impostazioni di fabbrica:** all'indirizzo support.ouraring.com/hc/it per eseguire un ripristino di fabbrica prima dello smaltimento dell'anello.

Esclusione della garanzia: ouraring.com/terms-and-conditions

Supporto e domande frequenti

In caso di domande sull'uso di Oura Ring, Oura App e dei nostri servizi online, non esitare a contattarci.

Le domande frequenti (FAQ) sono disponibili all'indirizzo support.ouraring.com.

Puoi contattare l'assistenza all'indirizzo support.ouraring.com/hc/it o tramite Oura app: Home > Assistenza.

È possibile accedere alle Informative sulla privacy di OURA all'indirizzo ouraring.com/privacy-policy.

Svenska

Tack för att du har valt Oura Ring 5!

Vi kommer att göra vårt bästa för att stötta dig på din hälsosresa med Oura Ring. Här hittar du information om Oura Ring 5 och Oura Ring 5-laddaren. Den här broschyren innehåller tekniska uppgifter och säkerhetsinformation om Oura Ring. Läs den noggrant så att du kan använda din Oura Ring på ett säkert sätt och få bästa möjliga upplevelse med OURA.

Användning

⚠ **Oura Ring 5 är utformad för att användas 24/7, med andra ord dygnet runt, och du kan bära den när du duschar, bastar, badar, simmar och snorklar. Oura Ring 5 är ventattent** till upp till 100 meters djup/328 fot.

⚠ **Rengör Oura Ring regelbundet och håll den torr för att säkerställa att den fungerar bra och för att minska risken för hudirritation. Rengör Oura Ring genom att torka av den med en fuktigt trasa och sedan torka den helt torr innan du sätter på dig den igen.**

⚠ **Använd den medföljande storleksspecifika Oura Ring 5-laddaren och -kabeln vid laddning.**

⚠ **Oura Ring-laddaren är inte ventattent** och är endast avsedd att användas inomhus. Förvara inte laddaren i fuktiga miljöer, till exempel badrummet.

⚠ **Oura Ring kan repas och den själv repara fuktiga mjukare material (metall, smycken eller andra föremål) som den kommer i kontakt med.**

Säkerhet

Oura Ring är inte en medicinteknisk produkt och är inte avsedd att lindra, förhindra, behandla, bota eller diagnostisera någon sjukdom eller något medicinskt tillstånd. Rådfråga alltid en läkare

om sjukdomar och hälsotillstånd. Var alltid uppmärksam på din kropps reaktioner och om du ändrar ditt beteende baserat på data från din Oura Ring gör du det helt och hållet på egen risk.

⚠ **Om du upplever oväntade, upprejade eller långvariga smärtor, trötthetskänslor eller problem på grund av förändringar i din sömn eller dina aktiviteter rekommenderar vi att du uppsöker läkare innan du fortsätter med förändringarna i fråga.**

⚠ **Ytmaterialen i Oura Ring är säkra avseende hudkontakt (standard ISO 10993). Om du upplever hudirritation på grund av Oura Ring ska du ta av ringen.** Kontakta läkare om symtomen kvarstår även när du har slutat använda Oura Ring.

⚠ Var försiktig så att Oura Ring inte hakar i fasta strukturer eller tunga föremål.

⚠ Uppsök omedelbart sjukvården i händelse av nödfall, om du upplever obehag eller om du inte kan ta av Oura Ring själv.

⚠ **Förvara Oura Ring utom räckhåll för barn..** Produkten är inte avsedd att användas av personer under 18 år.

⚠ **Utsätt inte Oura Ring eller laddaren för värme, till exempel i ett fordon eller i direkt solljus. Ladda inte Oura Ring i sådana miljöer.**

⚠ **Försök inte att öppna, kapa eller punktera Oura Ring.**

⚠ **Undvik att hantera batterier, att arbeta med maskiner som innehåller batterier eller situationer där det finns risk för elstötar.**

Produktinformation

→ **Intervall för drifttemperatur:** -10 – 54 °C (14 – 129 °F)

→ De röda och gröna lysdioder (LED) som används i produkten är inom det synliga färgspektrumet. De är säkra att använda för den som bär ringen och för personer runt omkring.

→ **Minneskapacitet:** Vi rekommenderar att Oura Ring dagligen synkas med Oura-appen för att säkerställa komplett tillgång till funktioner och insikter. Mer information om ringens lagringskapacitet finns i Hjälpcenter.

→ **Batteri:** Uppladdningsbart litiumjonbatteri

→ **Laddning:** Vid rumstemperatur. Optimal laddningstemperatur: minst 18 °C till högst 32 °C (65 - 89 °F). Normalt avstånd vid laddning för laddarmodell OA14 är mer än 20 cm (8 tum) från människokroppen.

Strömkabel: USB-C till USB-C. Använd extern 5 V likströmskälla som uppfyller standarden IEC 62368-1. Strömmen som tillhandahålls utrustningen får inte överskrida 15 W efter tre sekunder, i syfte att förhindra försämring av batteriet.

Oura-laddaren uppfyller den internationella säkerhetsstandarderna SS-EN IEC 62368-1 för IT- och multimedieutrustning.

→ **Anslutning:** Bluetooth Low Energy

→ **Uppdatering av fast programvara för Oura Ring:** Automatisk uppdatering av fast programvara sker via Oura-appen.

→ **Oura-appens tillgänglighet:** Appen hämtas via App Store, Google Play.

→ **Oura-appens kompatibilitet:** Se ouraring.com/compatibility.

→ **Säkerhet:** Bluetooth-kommunikationen mellan Oura Ring och Oura-appen är krypterad.

→ **Kassera Oura Ring:** (och det inbyggda batteriet) i enlighet med tillämpliga lokala lagar och regler. Särskild hantering kan krävas. Laddaren är en elektronisk enhet och lokal lagstiftning för återvinning av elektronisk utrustning ska följas.

→ **Anvisningar för fabriksåterställning:** finns på support.ouraring.com/hc/sv. Gör en fabriksåterställning innan du kasserar ringen.

Garantifriskrivning: ouraring.com/terms-and-conditions

Support och vanliga frågor och svar

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om hur du använder din Oura Ring, Oura-appen eller våra onlinjetjänster.

Du hittar avsnittet Vanliga frågor (FAQ) på support.ouraring.com.

Du kan kontakta support på support.ouraring.com/hc/sv eller via Oura-appen: Hem > Hjälp.

OURAs integritetspolicy finns på ouraring.com/privacy-policy.

Nederlands

Bedankt dat je voor de Oura Ring 5 hebt gekozen!

We doen er alles aan om je te ondersteunen op weg naar een gezonder leven met de Oura Ring. Hier vind je informatie over de Oura Ring 5 en de Oura Ring 5-oplader. In dit informatieboekje staan de technische gegevens en veiligheidsinformatie van de Oura Ring. Lees alles zorgvuldig door om de Oura Ring veilig te gebruiken en de beste ervaring met OURA te krijgen.

Algemeen gebruik

⚠ De Oura Ring 5 is gemaakt om dag en nacht te gebruiken en kan worden gedragen tijdens het douchen, zwemmen, snorkelen en in sauna's. **De Oura Ring 5 is waterdicht tot 100 meter.**

⚠ Maak de Oura Ring regelmatig schoon en houd hem droog om een goede werking te garanderen en mogelijke huidirritatie te verminderen. Je kunt de Oura Ring schoonmaken door hem af te nemen met een vochtige doek en hem volledig te drogen voordat je hem weer gebruikt.

⚠ Gebruik de meegeleverde maatspecifieke Oura Ring 5-oplader en kabel voor het opladen.

⚠ **De Oura Ring-oplader is niet waterbestendig** en is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik of bewaar de oplader niet in vochtige omgevingen zoals badkamers.

⚠ De Oura Ring kan krassen oplopen en kan zelf krassen veroorzaken op zachtere materialen (metaal, sieraden of andere voorwerpen) wanneer de ring hiermee in contact komt tijdens het gebruik.

Veiligheid

De Oura Ring is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld om een ziekte of aandoening te verminderen, voorkomen, behandelen, genezen of vast te stellen. Raadpleeg altijd een arts bij medische aandoeningen. Wees altijd alert op reacties van je lichaam.

Wanneer je je gedrag wijzigt op basis van de gegevens van je Oura Ring, ga je ermee akkoord dat je dit op eigen risico doet.

⚠ **Als je onverwachte, herhaaldelijke of langdurige pijn, vermoeidheid of ongemak voelt nadat je je slaap of activiteit hebt aangepast, raadpleeg dan een arts voordat je doorgaat met deze aanpassingen.**

⚠ **De materialen van het oppervlak van de Oura Ring zijn veilig voor huidcontact (ISO 10993-norm). Als je huidirritatie ervaart door de Oura Ring, doe de ring dan af.** Als de symptomen aanhouden terwijl je de Oura Ring niet gebruikt, neem dan contact op met een arts.

⚠ Let erop dat de Oura Ring niet blijft haken aan vaststaande constructies of zware voorwerpen.

⚠ In geval van nood of bij ongemak, of als je de Oura Ring niet zelf kunt afdoen, moet je onmiddellijk medische hulp inschakelen.

⚠ **Houd de Oura Ring buiten bereik van kinderen.** Dit product is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

⚠ **Zorg ervoor dat de Oura Ring of de oplader niet worden blootgesteld aan hitte, zoals in een auto of in direct zonlicht. Laad de Oura Ring niet op in een dergelijke omgeving.**

⚠ **Probeer de Oura Ring niet te openen, snijden of doorboren.**

⚠ **Vermijd het werken met batterijen, het werken aan apparaten met batterijen of situaties waar het risico op elektrische schokken bestaat.**

Productinformatie

→ **Bedrijfs temperatuurbereik:** -10 – 54 °C.

→ De rode en groene ledlampjes in het product bevinden zich in het zichtbare kleurbereik. Ze zijn veilig voor de drager en andere mensen in de buurt.

→ **Geheugencapaciteit:** Het wordt aanbevolen om de gegevens van de Oura Ring dagelijks te synchroniseren met de Oura-app om volledige toegang tot functies en inzichten te garanderen. Ga naar het Helpcentrum voor meer informatie over de opslagcapaciteit van de ring.

→ **Batterij:** Oplaadbare Li-ion-batterij

→ **Opladen:** bij kamertemperatuur. Optimale oplaadtemperatuur: min. 18 °C – max. 32 °C. De normale gebruiksafstand voor opladermodel OA14 is meer dan 20 cm van het menselijk lichaam.

Voedingskabel type: USB-C naar USB-C. Gebruik een externe 5V DC-adapter die voldoet aan de IEC 62368-1-norm. Het beschikbare vermogen voor de apparatuur mag na drie seconden niet meer dan 15W bedragen om leeglopen van de batterij te voorkomen.

De Oura-oplader voldoet aan de internationale veiligheidsnorm EN/IEC 62368-1 voor ICT- en AV-apparatuur.

→ **Verbindingsmogelijkheden:** Bluetooth Low Energy

→ **Updates van firmware van de Oura Ring:** Automatische firmware-updates via de Oura-app

→ **Beschikbaarheid Oura-app:** App Store, Google Play

→ **Compatibiliteit Oura-app:** Zie ouraring.com/compatibility

→ **Beveiliging:** Er wordt versleutelde bluetoothcommunicatie gebruikt tussen de Oura Ring en de Oura-app

→ **Voer de Oura Ring (en interne batterij) af:** volgens de geldende plaatselijke wetten en voorschriften. Mogelijk is speciale verwerking vereist. De oplader is een elektronisch apparaat en de plaatselijke wetgeving voor het recyclen van elektronica moet worden nageleefd.

→ **Volg de instructies:** op support.ouraring.com voor het herstellen van de fabrieksinstellingen voordat je de ring weggoet.

Uitsluiting van garantie: ouraring.com/terms-and-conditions

Support en veelgestelde vragen

Als je vragen hebt over het gebruik van de Oura Ring, de Oura-app of onze online diensten, neem dan gerust contact met ons op.

Je vindt veelgestelde vragen op support.ouraring.com.

Je kunt contact opnemen met support op support.ouraring.com of via de Oura-app: Home > Help. Bekijk het privacybeleid van OURA op ouraring.com/privacy-policy.

DansK

Tak, fordi du har valgt en Oura Ring!

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig i dine bestræbelser på at forbedre din sundhed med din Oura Ring. Her kan du finde oplysninger om Oura Ring 5 og opladeren til Oura Ring 5. Denne brochure indeholder tekniske oplysninger og sikkerhedsoplysninger vedrørende din Oura Ring. Vi beder dig læse den grundigt, så du kan bruge din Oura Ring på en sikker måde og få den bedste oplevelse med OURA.

Generel brug

⚠ Oura Ring 5 er beregnet til, at du kan have den på døgnet rundt – i bruse- og karbad, i sauna, og når du svømmer og snorkler. **Oura Ring 5 er vandtæt** ned til 100 m.

⚠ Rengør Oura Ring med jævne mellemrum, og hold den tør. Det vil sikre, at den fungerer korrekt, og vil reducere risikoen for hudirritation. Du kan rengøre Oura Ring ved at tørre den af med en fugtig klud. Tør din Oura Ring helt, før du bruger den igen.

⚠ Brug den medfølgende størrelses-specifikke Oura Ring 5-oplader og det tilhørende kabel til opladning.

⚠ **Opladeren til Oura Ring er ikke vandtæt** og er kun beregnet til indendørs brug. Opladeren må ikke bruges eller opbevares i fugtige omgivelser som for eksempel på badeværelset.

△ Din Oura Ring kan få ridser og kan ridse blødere materialer (metal, smykker og andre genstande), hvis du har ringen på, mens du er i tæt kontakt med disse materialer.

Sikkerhed

Oura Ring er ikke medicinsk udstyr og er ikke beregnet til at lindre, forebygge, behandle, helbrede eller diagnosticere nogen form for sygdomme eller lidelser. Rådfør dig altid med en læge vedrørende sygdomme og lidelser. Vær altid opmærksom på din kropps reaktioner. Hvis du ændrer din adfærd på baggrund af oplysninger fra din Oura Ring, anerkender du, at du gør det på eget ansvar.

△ Hvis du mærker uventet, gentagen eller langvarig smerte, træthed eller ubehag, fordi du har foretaget ændringer i dine søvn- eller aktivitetsmønstre, skal du søge læge, før du fortsætter med disse ændrede mønstre.

△ Oura Rings overfladematerialer udgør ingen fare ved kontakt med hud (ISO 10993-standarden). Hvis du oplever hudirritation på grund af din Oura Ring, skal du tage ringen af. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter efter du er holdt op med at bruge din Oura Ring.

△ Pas på, at din Oura Ring ikke hænger fast i fastsiddende eller tunge genstande.

△ Søg straks lægehjælp i nødstilfælde eller ved ubehag, eller hvis du ikke selv kan få din Oura Ring af.

△ Oura Ring skal opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt er ikke beregnet til personer under 18 år.

△ Lad ikke din Oura Ring eller opladeren blive udsat for varme, for eksempel i en bil eller i direkte sollys. Oura Ring må ikke oplades i sådanne omgivelser.

△ Forsøg ikke at åbne din Oura Ring, at skære den over eller at prikke hul i den.

△ Undgå at håndtere batterier, at arbejde med udstyr med apparater, der indeholder batterier, og situationer, hvor der er risiko for at få stød.

Produktoplysninger

→ **Driftstemperaturinterval:** -10 til 54 °C.

→ **Lysdioderne** i produktet udsender rødt og grønt lys i det synlige farvespektrum. Lyset er ufarligt for den person, der har ringen på, og for andre personer i nærheden.

→ **Hukommelseskapacitet:** Det anbefales at synkronisere data fra Oura Ring dagligt med Oura-appen for at sikre fuld adgang til funktioner og indsigter. Se flere detaljer om ringens lagringskapacitet i Hjælpecenter.

→ **Batteri:** Genopladeligt litiumionbatteri

→ **Oplad:** ved stuetemperatur. Optimal opladningstemperatur: min. 18 °C, maks. 32 °C. Under opladning bør oplader af model OA14 være mindst 20 cm fra menneskekroppe.

Strømkabeltype: USB C til USB C. Brug en ekstern 5 Vdc-strømforsyning, som overholder IEC 62368-1-standarden. For

at forebygge nedbrydning af batteriet må den effekt, der er tilgængelig for udstyret, ikke overstige 15 W efter tre sekunder. Oura-opladeren overholder EN/IEC 62368-1, den internationale sikkerhedsstandard for IKT- og AV-udstyr.

→ **Dataforbindelse:** Bluetooth Low Energy

→ **Tilgængelighed af firmwareopdateringer til Oura Ring:**

Automatiske firmwareopdateringer via Oura-appen

→ **Tilgængelighed af Oura-appen:** App Store, Google Play Butik

→ **Oura-appens kompatibilitet:** Se ouraring.com/compatibility

→ **Sikkerhed:** Der anvendes krypteret Bluetooth-kommunikation mellem Oura Ring og Oura-appen.

→ **Bortskaffelse af Oura Ring:** (og det interne batteri) skal ske i henhold til gældende love og forskrifter. Der kan gælde særlige regler for bortskaffelse. Opladeren er elektronisk udstyr, og lokal lovgivning vedrørende genanvendelse af elektronik skal overholdes.

→ **Instruktioner vedrørende nulstilling til fabriksindstillinger:** findes på support.ouraring.com, så du kan nulstille ringen til fabriksindstillinger inden bortskaffelse.

Ansvarsfraskrivelse vedr. garanti:
ouraring.com/terms-and-conditions

Support og ofte stillede spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal bruge din Oura Ring, Oura-appen eller vores onlinetjenester, er du meget velkommen til at kontakte os.

Du finder ofte stillede spørgsmål (FAQs) på support.ouraring.com.

Du kan kontakte vores support på support.ouraring.com eller via Oura-appen: Startside > Hjælp.

Du kan se OURAs databeskyttelsespolitikker på ouraring.com/privacy-policy.

Norsk

Takk for at du valgte Oura Ring 5.

Vi ønsker å gi deg best mulig støtte på veien mot bedre helse ved bruk av Oura Ring. Her finner du informasjon om Oura Ring 5 og Oura Ring 5-laderen. Dette heftet inneholder teknisk informasjon og sikkerhetsinformasjon om Oura Ring. Les heftet nøye for å sikre at du bruker Oura Ring på trygg måte og får best mulig opplevelse med OURA.

Generell bruk

△ Oura Ring 5 er laget for å brukes 24/7, og du kan ha den på deg når du dusjer, tar badstu, bader, svømmer og snorkler. **Oura Ring 5 er vannrett opp til 100 meter (328 ft).**

△ Rengjør Oura Ring jevnlig og hold den tørr for å sikre at den fungerer godt og redusere faren for potensiell hudirritasjon. Rengjør Oura Ring ved å tørke av den med en fuktig klut. Tørk den helt før du tar den på igjen.

△ Lad ringen ved bruk av den medfølgende, størrelsesespesifikke Oura Ring 5-laderen og -kabelen.

△ **Oura Ring-laderen er ikke vannbestandig** og er kun beregnet på innendørs bruk. Ikke bruk eller oppbevar laderen i fuktige omgivelser, som på badet.

△ Oura Ring kan bli ripet, og ringen kan lage riper i mykere materialer (metall, smykker eller andre gjenstander) den kommer i kontakt med under bruk.

Sikkerhet

Oura Ring er ikke en medisinsk enhet, og den har ikke som formål å redusere, forebygge, behandle, kurere eller diagnostisere noen sykdommer eller tilstander. Kontakt alltid fastlegen din vedrørende medisinske tilstander. Vær alltid oppmerksom på kroppens reaksjoner, og hvis du gjør endringer i rutinene dine basert på dataene fra Oura Ring, samtykker du til at du gjør dette på eget ansvar og risiko.

△ Hvis du opplever uventet, gjentatt eller langvarig smerte, utmattelse eller ubehag på grunn av endringer du har gjort i søvn- eller aktivitetsrutiner, må du snakke med fastlegen din før du fortsetter med disse endringene.

△ **Oura Ring-overflatemateriale**ne er trygge for kontakt med huden (standard ISO 10993). Hvis du opplever hudirritasjon på grunn av Oura Ring, må du ta av deg ringen. Hvis symptomene vedvarer selv om du ikke har Oura Ring på deg, må du kontakte fastlegen din.

△ Vær forsiktig så Oura Ring ikke hefter seg fast i faste konstruksjoner eller tunge gjenstander.

△ Dersom det oppstår en nødsituasjon, opplever ubehag eller ikke kan ta av deg Oura Ring selv, må du umiddelbart oppsøke legehjelp.

△ **Oppbevar Oura Ring utilgjengelig for barn.** Produktet er ikke beregnet på personer under 18 år.

△ **Ikke oppbevar Oura Ring eller laderen på steder der den utsettes for varme, som i et kjøretøy eller direkte sollys.** Oura Ring må ikke lades under slike forhold.

△ **Ikke prøv å åpne, skjære i eller lage hull i Oura Ring.**

△ Når du har på deg Oura Ring, må du unngå håndtering av batterier, arbeid på enheter med maskineri som inneholder batterier og situasjoner der det er fare for elektrisk støt.

Produktinformasjon

→ **Driftstemperatur:** -10 til 54 °C / 14 til 129 °F

→ Røde og grønne lysdioder (LED-lamper) i produktet er i det synlige fargeområdet. De er trygge for brukeren og andre personer i nærheten.

→ **Minnekapasitet:** Anbefales å synkronisere Oura Ring-data daglig med Oura-appen for å sikre full tilgang til funksjoner og innsikter. Se flere detaljer i Hjelpesenteret om ringens lagringskapasitet.

→ **Batteri:** Oppladbart Li-ion-batteri

→ **Lading:** Ved romtemperatur. Normal ladetemperatur: min. 18 °C / 65 °F til maks. 32 °C / 89 °F. Optimal driftsavstand for ladermodell OA14 er mer enn 20 cm (8 in.) fra menneskekroppen.

Strømkabeltype: USB-C til USB-C. Bruk en ekstern 5 V DC-strømforsyning som er i samsvar med standarden IEC 62368-1. Effekten tilgjengelig for utstyret bør ikke overstige 15W etter tre sekunder, for å forhindre batteridegradering.

Oura-laderen er i samsvar med den internasjonale sikkerhetsstandaren EN/IEC 62368-1 for ICT- og AV-utstyr.

→ **Tilkobling:** Bluetooth lavenergi

→ **Oppdatering av Oura Ring-fastvare:** Automatisk oppdatering via Oura-appen.

→ **Tilgjengelighet for Oura-appen:** App Store, Google Play

→ **Kompatibilitet for Oura-appen:** Se ouraring.com/compatibility

→ **Sikkerhet:** Kryptert Bluetooth-kommunikasjon brukes mellom Oura Ring og Oura-appen

→ **Kassering av Oura Ring:** Ringen (og innvendig batteri) skal kastes i henhold til lokale lover og forskrifter. Spesiell håndtering kan være nødvendig. Laderen er en elektronisk enhet, og lokalt lovverk for gjenvinning av elektronikk skal følges.

→ **Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger:** Les instruksjonene for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger på support.ouraring.com, og tilbakestill ringen til fabrikkinnstillinger før du kasserer den.

Garantifrakravskvise: ouraring.com/terms-and-conditions

Brukerstøtte og vanlige spørsmål

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om hvordan du bruker Oura Ring, Oura-appen eller de internettbaserte tjenestene våre.

Du finner svar på vanlige spørsmål på support.ouraring.com.

Du kan kontakte brukerstøtten på support.ouraring.com eller via Oura-appen: Start > Hjelp.

Du kan lese OURAs retningslinjer for personvern på ouraring.com/privacy-policy.

Čeština

Děkujeme, že jste si vybrali Oura Ring 5!

Chceme udělat vše pro to, abychom vás co nejlépe povzbudili na vaší cestě ke zdraví s Oura Ring. Zde najdete informace o prstenu Oura Ring 5 a nabíječce Oura Ring 5. V této brožůvě naleznete technické údaje a informace o bezpečnosti Oura Ring. Pečlivě si ji proto přečtěte, abyste mohli Oura Ring používat bezpečně a dosáhli optimální spokojenosti se značkou OURA.

Používání

⚠️ Oura Ring 5 je navržen pro nepřetržitě používání a lze ho nosit i během sprchování, saunování, koupání, plavání a šnorchlování.
Oura Ring 5 je vodotěsný do 100 metrů.

⚠️ Prsten Oura Ring pravidelně čistěte a udržujte ho v suchu – zajistíte tak jeho správnou funkci a omezíte případné podráždění pokožky. Oura Ring můžete očistit vlhkým hadříkem a před dalším použitím ho zcela osušit.

⚠️ K nabíjení použijte dodanou nabíječku a kabel, určené pro konkrétní velikost Oura Ring 5.

⚠️ **Nabíječka Oura Ring není vododolná** a je určena pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte ani neskladujte nabíječku ve vlhkém prostředí, například v koupelně.

⚠️ Oura Ring se může poškrábat nebo sám může způsobit škrábance na měkkých materiálech (kov, šperky nebo jiné předměty), je-li s nimi v bezprostředním kontaktu.

Bezpečnost

Oura Ring není zdravotnický prostředek a není určen ke zmírnění, prevenci, léčbě, vyléčení nebo diagnostice jakéhokoli onemocnění nebo zdravotních potíží. Svůj zdravotní stav vždy konzultujte s lékařem. Vždy vnímejte reakce svého těla, a pokud na základě údajů z Oura Ring učiníte jakékoli změny ve svém jednání, souhlasíte s tím, že tak činíte na vlastní nebezpečí.

⚠️ **Pocitíte-li neočekávanou, opakovanou nebo dlouhodobou bolest, únavu či diskomfort v důsledku změn vykonaných ve spánkovém režimu nebo aktivitě, poraďte se nejprve se svým lékařem, než budete v těchto změnách pokračovat.**

⚠️ **Materiály povrchu prstenu Oura Ring jsou bezpečné pro styk s pokožkou (dle normy ISO 10993). Vyskytne-li se na vaší pokožce podráždění způsobené prstenem Oura Ring, prsten sundejte.** Pokud příznaky přetrvávají i po ukončení nošení prstenu Oura Ring, vyhledejte lékaře.

⚠️ Dávejte pozor, abyste Oura Ring nezachytili o pevné konstrukce nebo těžké předměty.

⚠️ V nálehavých případech nebo při nepřijemných pocitech nebo když si Oura Ring nemůžete sundat sami, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠️ **Uchovávejte Oura Ring mimo dosah dětí.** Tento výrobek není určen pro osoby mladší 18 let.

⚠️ **Nevystavujte Oura Ring ani nabíječku působení tepla, například ve vozidle nebo na přímém slunci.** V takovém prostředí Oura Ring nenabíjejte.

⚠️ **Nepokoušejte se Oura Ring otevřít, rozříznout nebo propíchnout.**

⚠️ **Vyhýbejte se zacházení s bateriemi, práci na zařízeních, která obsahují baterie, nebo situacím, kdy hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

Informace o produktu

→ **Rozsah provozních teplot:** -10 až 54 °C

→ Červené a zelené diody (LED) ve výrobku vyzařují světlo ve viditelném barevném rozsahu. Jsou bezpečné pro uživatele i ostatní osoby v jejich blízkosti.

→ **Kapacita paměti:** Pro plný přístup k funkcím a přehledům se doporučuje denně synchronizovat data prstenu Oura Ring s aplikací Oura. Více informací o kapacitě úložiště prstenu najdete v centru nápovědy.

→ **Baterie:** Dobjíjecí Li-ion baterie

→ **Nabíjení:** Při pokojové teplotě. Optimální teplota nabíjení: min. 18 °C – max. 32 °C. Normální provozní vzdálenost nabíječky modelu OA14 je více než 20 cm od lidského těla.

Typ napájecího kabelu: USB-C na USB-C. Používejte zdroj napájení 5V DC, který splňuje požadavky normy IEC 62368-1. Dostupný výkon zařízení nesmí nikdy po třech sekundách překročit 15 W, aby se zabránilo degradaci baterie.

Nabíječka Oura splňuje požadavky mezinárodní bezpečnostní normy EN/IEC 62368-1 pro zařízení audio/video, informační a komunikační technologie.

→ **Konektivita:** Bluetooth Low Energy

→ **Možnost aktualizace firmwaru prstenu Oura Ring:** Automatické aktualizace firmwaru prostřednictvím aplikace Oura

→ **Dostupnost aplikace Oura:** App Store, Google Play

→ **Kompatibilita s aplikací Oura:** Viz ouraring.com/compatibility

→ **Bezpečnost:** Mezi prstenem Oura Ring a aplikací Oura se používá šifrovaná komunikace Bluetooth

→ **Oura Ring zlikvidujte:** (včetně vnitřní baterie) v souladu s platnými místními zákony a předpisy. Může být vyžadováno zvláštní zacházení. Nabíječka je elektronické zařízení a je třeba dodržovat místní právní předpisy upravující recyklaci elektroniky.

→ **Obnovení továrního nastavení:** – před likvidací prstenu si přečtěte příslušné pokyny na webu support.ouraring.com.

Vyloučení odpovědnosti ze záruky:
ouraring.com/terms-and-conditions

Podpora a nejčastější dotazy (FAQ)

V případě dotazů ohledně používání Oura Ring, aplikace Oura nebo našich online služeb se na nás neváhejte obrátit.

Odpovědi na nejčastější dotazy (FAQ) najdete na adrese support.ouraring.com.

Naši podporu můžete kontaktovat na adrese support.ouraring.com nebo v aplikaci Oura: Home (Domovská stránka) > Help (Nápověda).

Zásady ochrany osobních údajů společnosti OURA najdete na adrese ouraring.com/privacy-policy.

Polski

Dziękujemy za wybranie pierścienia Oura Ring 5!

Pragniemy jak najlepiej wspierać Państwa w dani o zdrowie dzięki Oura Ring. Znajdą tu Państwo informacje na temat pierścienia Oura Ring 5 i ładowarki Oura Ring 5. Broszura ta zawiera informacje techniczne i dotyczące bezpieczeństwa Oura Ring. Proszę przeczytać ją uważnie, aby bezpiecznie korzystać z Oura Ring i osiągnąć najlepsze rezultaty dzięki OURA.

Ogólne zasady korzystania

△ Pierścien Oura Ring 5 opracowano z myślą o całodobowym korzystaniu (24/7) i można go nosić pod prysznicem, w saunie, w kąpiele, podczas pływania i nurkowania z rurką. **Oura Ring 5 jest wodoodporny** do głębokości 100 m / 328 stóp.

△ Należy regularnie czyścić Oura Ring i wycierać go do sucha, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i zmniejszyć potencjalne podrażnienie skóry. Oura Ring można czyścić przecierając go zwilżoną ściereczką. Należy całkowicie wysuszyć go przed kolejnym użyciem.

△ Do ładowania należy używać dostarczonej odpowiedniej dla danego rozmiaru ładowarki pierścienia Oura Ring 5 z przewodem.

△ **Ładowarka pierścienia Oura Ring nie jest wodoodporna** i jest przeznaczona do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używać ani nie przechowywać ładowarki w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.

△ Oura Ring może ulec zadrapaniu i sam może zadrapać delikatniejsze materiały (metal, biżuterię albo inne przedmioty) jeśli jest z nimi w bliskim kontakcie.

Bezpieczeństwo

Oura Ring nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do łagodzenia objawów żadnych chorób ani szorzeń, zapobiegania im, leczenia, eliminowania ani diagnozowania ich. Stan zdrowia należy zawsze konsultować z lekarzem. Zawsze należy zwracać uwagę na reakcje organizmu i jeżeli użytkownik zmienia zachowanie na podstawie danych z Oura Ring, robi to na własne ryzyko.

△ **W przypadku odczuwania niespodziewanego, powtarzającego się albo długotrwałego bólu, zmniejszenia albo dyskomfortu ze względu na wprowadzone zmiany związane ze snem albo aktywnością, należy skonsultować się z lekarzem przed dalszym wprowadzaniem zmian.**

△ **Materiały powierzchniowe pierścienia Oura Ring są bezpieczne w kontakcie ze skórą (norma ISO 10993).** W przypadku podrażnienia skóry przez Oura Ring należy go zdjąć. Jeżeli objawy nie ustąpią po zaprzestaniu korzystania z Oura Ring, należy skontaktować się z lekarzem.

△ Należy uważać, aby Oura Ring nie zaczęli się o elementy stałe albo ciężkie przedmioty.

△ W przypadkach nagłych, w przypadku dyskomfortu albo gdy nie można samodzielnie zdjąć pierścienia Oura Ring, należy niezwłocznie skontaktować z opieki medycznej.

△ **Przechowywać Oura Ring poza zasięgiem dzieci.** Produkt ten nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18. roku życia.

△ **Pierścienia Oura Ring ani ładowarki nie należy wystawiać na działanie gorąca, na przykład w pojeździe albo bezpośrednio na słońcu.** Nie ładować pierścienia Oura Ring w takim środowisku.

△ **Nie próbować otwierać, przecinać ani nakłuwac pierścienia Oura Ring.**

△ **Unikać dotykania baterii, pracy z urządzeniami z mechanizmami zawierającymi baterie albo sytuacji, w których występuje ryzyko porażenia prądem.**

Informacje o produkcie

→ **Zakres temperatury operacyjnej:** -10 – 54°C / 14 – 129°F.

→ Czerwone i zielone światło emitowane przez diody LED w produkcie znajduje się w zakresie koloru widzialnego. Jest bezpieczne dla użytkownika i innych osób znajdujących się w pobliżu.

→ **Pojemności pamięci:** Zaleca się codzienne synchronizowanie danych Oura Ring z aplikacją Oura, aby zapewnić pełny dostęp do funkcji i analiz. Więcej szczegółów na temat pojemności pamięci pierścienia znajdziesz w Centrum pomocy.

→ **Akumulator:** litowo-jonowy z możliwością ładowania

→ **Ładowanie:** w temperaturze pokojowej. Optymalna temperatura ładowania: min. 18°C / 65°F – maks. 32°C / 89°F. Normalna odległość operacyjna dla modelu ładowarki OA14 wynosi ponad 20 cm (8 cali) od ludzkiego ciała.

Rodzaj przewodu zasilającego: – z USB-C na USB-C. Należy korzystać z zewnętrznego źródła zasilania 5 V DC zgodnego z normą IEC 62368-1. Moc dostępna dla urządzenia nie powinna przekraczać 15 W po trzech sekundach, aby zapobiec zniszczeniu akumulatora.

Ładowarka Oura jest zgodna z międzynarodową normą bezpieczeństwa EN/IEC 62368-1 dla sprzętu ICT i AV.

→ **Łączność:** Bluetooth Low Energy

→ **Aktualizacje oprogramowania układowego pierścienia:** Automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego za pośrednictwem aplikacji Oura

→ **Dostępność aplikacji Oura:** App Store, Google Play.

→ **Zgodność aplikacji Oura:** Przeczytaj na stronie ouraring.com/compatibility

→ **Bezpieczeństwo:** Komunikacja Bluetooth pomiędzy pierścieniem Oura Ring a aplikacją Oura jest zaszyfrowana

→ **Utylizacja pierścienia Oura Ring (oraz akumulatora wewnętrznego)** zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. Może wymagać specjalnego traktowania. Ładowarka to urządzenie elektroniczne i należy przestrzegać przepisów prawa miejscowego dotyczących recyklingu urządzeń elektronicznych.

→ **Ινstrukcje przywracania ustawień fabrycznych** pod adresem support.ouraring.com wskazują, jak przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych przed użyciem.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji:
ouraring.com/terms-and-conditions.

Pomoc i często zadawane pytania

W przypadku pytań dotyczących korzystania z pierścienia Oura Ring, aplikacji Oura albo naszych usług online zachęcamy do kontaktu.

Często zadawane pytania (FAQ) znajdują się na stronie support.ouraring.com.

Z Działem Pomocy Technicznej można się skontaktować pod adresem support.ouraring.com albo w aplikacji Oura: Home

Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Oura Ring 5!

Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας υποστηρίξουμε στο ταξίδι σας προς μια καλύτερη υγεία με το Oura Ring. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Oura Ring 5 και τον φορητό Oura Ring 5. Αυτό το φυλλάδιο περιλαμβάνει τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις πληροφορίες ασφαλείας του Oura Ring. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το Oura Ring και να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία με την OURA.

Γενική χρήση

△ Το Oura Ring 5 έχει σχεδιαστεί για χρήση 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και μπορεί να φορεθεί όταν κάνετε ντους, σάουνα, μπάνιο, κολύμβηση και κατάδυση με αναπνευστήρα. Το Oura Ring 5 είναι **αδιάβροχο** έως 100 μέτρα / 328 πόδια.

△ Καθαρίζετε τακτικά το Oura Ring και διατηρείτε το στεγνό, για να εξασφαλίσετε καλή λειτουργικότητα και να μειώσετε την πιθανότητα ερεθισμού του δέρματος. Μπορείτε να καθαρίσετε το Oura Ring σκουπίζοντάς το με ένα υγρό πανί και στεγνωύνοντάς το πλήρως πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.

△ Φορτίστε το με τον παρεχόμενο φορητό για το συγκεκριμένο μέγεθος του Oura Ring 5 και το καλώδιο φόρτισης.

△ Ο φορητός Oura Ring δεν είναι ανθεκτικός στο νερό και προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τον φορητό σε περιβάλλοντα με υγρασία, όπως μπάνια.

△ Το Oura Ring μπορεί να γρατσοειστεί και μπορεί να γρατσοειστεί υλικά που είναι πιο μαλακά (μέταλλα, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα) αν χρησιμοποιούνται κοντά σε αυτά.

Ασφάλεια

Το Oura Ring δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν και δεν είναι κατάλληλο για να μετράσει, να αποτρέψει, να αντιμετωπίσει, να θεραπεύσει ή να διαγνώσει οποιαδήποτε ασθένεια ή πάθηση. Πάντα να συμβουλευέστε έναν γιατρό σχετικά με ιατρικές παθήσεις. **Να δίνετε πάντα σημασία στις αντιδράσεις του σώματός σας και, αν κάποτε σπουδαίοντες αλλαγές στην συμπεριφορά σας με βάση τα δεδομένα από το Oura Ring, συμφωνείτε ότι το κάνετε με δική σας ευθύνη.**

△ **Να αισθανθείτε απροδόκητο, επαναλαμβανόμενο ή μακροχρόνιο πόνο, κόπωση ή δυσφορία λόγω αλλαγών στον ύπνο ή τη δραστηριότητά σας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό προτού συνεχίσετε με αυτές τις αλλαγές.**

△ **Τα υλικά της επιφάνειας του Oura Ring είναι ασφαλή για επαφή με το δέρμα (πρότυπο ISO 10993). Αν αισθανθείτε ερεθισμό στο δέρμα σας λόγω του Oura Ring, βγάλτε το δαχτυλίδι. Αν τα συμπτώματα επιμένουν αφού σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Oura Ring, επικοινωνήστε με έναν γιατρό.**

△ Προσέξτε να μην πιαστεί το Oura Ring σε σωματικές επιφάνειες ή βαριά αντικείμενα.

△ Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή δυσφορίας ή αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το Oura Ring από το δαχτυλίδι σας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

△ **Κρατήστε το Oura Ring μακριά από παιδιά.** Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 18 ετών.

△ **Μην εκθέτετε το Oura Ring ή τον φορητό σε θερμότητα, όπως μέσα σε αυτοκίνητο ή κάτω από τον ήλιο. Μην φορτίζετε το Oura Ring υπό αυτές τις συνθήκες.**

△ **Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να κόψετε ή να τρυπήσετε το Oura Ring.**

△ **Αποφύγετε τον χειρισμό μπαταριών, την εργασία σε σκευές με μηχανικά μέρη που περιέχουν μπαταρίες ή καταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.**

Πληροφορίες προϊόντος

→ **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:** -10 – 54°C / 14 – 129°F

→ Οι διόδοι εκπομπής κόκκινου και πράσινου φωτός (LED) στο προϊόν κμωμούνται στο ορατό φάσμα χρωμάτων. Είναι ασφαλείς για τον χρήστη και άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά του.

→ **Χωρητικότητα μνήμης:** Συνιστάται να συγχρονίζετε τα δεδομένα του Oura Ring καθημέρως με την εφαρμογή Oura για να διασφαλίσετε πλήρη πρόσβαση σε λειτουργίες και πληροφορίες. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Κέντρο βοήθειας σχετικά με τη χωρητικότητα αποθήκευσης του δαχτυλιδιού.

→ **Μπαταρία:** Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

→ **Φόρτιση:** σε θερμοκρασία δωματίου. Βέλτιστη θερμοκρασία φόρτισης: 18°C / 65°F (ελάχιστη) - 32°C / 89°F (μέγιστη). Η κανονική απόσταση λειτουργίας για τον φορητό OA14 πρέπει

να είναι μεγαλύτερη από 20 εκ. (8 ίντσες) από το ανθρώπινο σώμα.

Τύπος καλωδίου τροφοδοσίας: USB-C σε USB-C. Χρησιμοποιείτε εξωτερική τροφοδοσία 5 Vdc η οποία συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 62368-1. Η διαθέσιμη ισχύς για τον εξοπλισμό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 W μετά από τρία δευτερόλεπτα, για να αποφευχθεί η υποθάλμηση της μπαταρίας.

Ο φορτιστής Oura συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ασφαλείας EN/IEC 62368-1 για τον εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

→ **Συνδεσιμότητα:** Bluetooth χαμηλής κατακόωσης ενέργειας

→ **Δυνατότητα ενήμερωσης υολογοισμικού του Oura Ring:** Αυτόματες ενημερώσεις υολογοισμικού μέσω της Εφαρμογής Oura

→ **Διαθεσιμότητα της Εφαρμογής Oura:** App Store, Google Play

→ **Συμβατότητα της Εφαρμογής Oura:** Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ouraring.com/compatibility (σύνδεσμος στα αγγλικά)

→ **Ασφάλεια:** Κρυπτογραφημένη επικοινωνία Bluetooth που χρησιμοποιείται μεταξύ του Oura Ring και της Εφαρμογής Oura

→ **Απορρίπτει το Oura Ring:** (και της εσωτερική μπαταρία) σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Ενδέχεται να απαιτείται ειδική μεταχείριση. Ο φορτιστής είναι ηλεκτρονική συσκευή και υπόκειται στις τοπικές νομοθετικές διατάξεις για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

→ **Οδηγίες επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων:** Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα support.ouraring.com (σύνδεσμος στα αγγλικά) για να πραγματοποιήσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων πριν από την απόρριψη του δοχτυλκιδιού.

Αποποίηση εγγύησης: ouraring.com/terms-and-conditions (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Υποστήριξη και Συχνές ερωτήσεις

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την χρήση του Oura Ring, της εφαρμογής Oura ή των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Θα βρείτε τις Συχνές ερωτήσεις στην ιστοσελίδα support.ouraring.com.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας support.ouraring.com (σύνδεσμος στα αγγλικά) ή μέσω της εφαρμογής

Oura: Home > Help (Αρχική σελίδα > Βοήθεια).

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πολιτικές απορρήτου της OURA στην ιστοσελίδα ouraring.com/privacy-policy (σύνδεσμος στα αγγλικά).

日本語

この度は、Oura Ring 5をお買い上げいただき、ありがとうございます。Oura Ringとともに歩む健康の旅を、全力でサポートいたします。こちらでは、Oura Ring 5およびOura Ring 5充電器に関する情報をご確認いただけます。本冊子には、Oura Ringの技術の詳細と、安全に関する情報が記載されています。Oura Ringを安全に使用するために内容をよくお読みになり、OURAでの素晴らしい体験をお楽しみください。

一般的な使用方法

△ Oura Ring 5は、毎日24時間の使用、またシャワー、サウナ、入浴、スイミング、シュノーケリングの他にも着ようとして設計されています。Oura Ring 5は100m/328ftの防水性を備えています。

△ Oura Ringの良好な機能を確保し、皮膚への刺激による可能性を抑えるため、Oura Ringは定期的に洗浄し、乾いた状態を保つようにしてください。Oura Ringは濡らせた布で拭き、完全に乾かしてから着用してください。

△ 充電をする際には、付属の各サイズ専用のOura Ring 5充電器とケーブルをお使いください。

△ Oura Ringの充電器は防水仕様ではありません。屋内のみでの使用を目的としています。充電器を、湿度の高い環境 (浴室など) では使用、保管しないでください。

△ Oura Ringは傷が付いたり、使用中にOura Ringより柔らかいもの (金属、ジュエリー、その他の物品) を密着させると傷をつける可能性があります。

安全情報

Oura Ringは医療機器ではありません。また病状や健康状態を緩和、予防、治療、診断することを目的としていません。病状に関しては、必ず医師の診察を受けてください。健康状態に関しては、必ず医師にご相談ください。また、Oura Ringのデータに基づいて行動様式を変える場合には、ご自身の責任において行うことに同意するものとします。

△ 睡眠やアクティビティを変更したことに、予期しない、繰り返しの、または長期的な痛みや疲労感、不快感がある場合には、そのような変更を続ける前に、医師にご相談ください。

△ Oura Ringの表面は、皮膚と接触しても安全な材質です (ISO 10993 規格)。Oura Ringを原因として皮膚が炎症を起こす場合には、Oura Ringを外してください。Oura Ringの使用を中止しても症状が続く場合には、医師にご相談ください。

△ Oura Ringが固定された物や重い物に引っかかることがないようにご注意ください。

△ 緊急時や、不快感がある場合、またはご自身でOura Ringを外せない場合には、直ちに医師にご相談ください。

△ Oura Ringは子供の手の届かない所に保管してください。本品は18歳未満の方を対象としていません。

△ Oura Ringや充電器を、車内や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。また、その穴を開けたりしないでください。

△ Oura Ringを開けたり、切断したり、また穴を開けたりしないでください。

△バッテリーを操作したり、電池を搭載した機械のデバイスの上や感電の危険がある場所で作業することは避けてください。

製品情報

→動作温度範囲：-10 ~ 54°C / 14 ~ 129°F

→本製品に使用されている赤と緑の発光ダイオード (LED) は、可視光の範囲です。着用者にも、周囲にいる人にも安全です。

→メモリ容量：機能やインサイトを確実にご利用いただくために、毎日Oura RingのデータをOuraアプリと同期することが推奨されます。リングのストレージ容量について詳しくはヘルプセンターをご覧ください。

→バッテリー：充電式リチウムイオンバッテリー

→充電：室温で行ってください。充電に最適な温度：最低18°C / 65°F ~ 最高32°C / 89°F。型番OA14の充電器の通常動作距離は、人体から20cm (8インチ) 以上です。

電源コードのタイプ：USB-C to USB-C。IEC 62368-1規格に準拠した外部DC5V電源を使用。バッテリーの劣化を防ぐため、本装置に利用可能な電力力は、3秒後の測定で15Wを超えないものとします。

Ouraの充電器：ICTおよびAV機器向けのEN/IEC 62368-1国際安全規格に準拠しています。

→通信モード：Bluetooth Low Energy

Oura Ringのファームウェアの更新方法：Ouraアプリを介したファームウェアの自動アップデート

→Ouraアプリのダウンロード：App Store、Google Play

→Ouraアプリの互換性：ouraring.com/compatibility をご確認ください

→セキュリティ：Oura RingとOuraアプリ間のBluetooth通信の暗号化

→Oura Ringの廃棄：(内蔵バッテリーを含む)：地域の法令に従ってください。特別な取り扱いが必要な場合があります。充電器は電子機器です。電子機器のリサイクルに関する地域の法令に従ってください。

→出荷設定にリセットする方法：Oura Ringを廃棄する前に、support.ouraring.com/hc/jaの手順に従って工場出荷時状態にリセットしてください。

保証に関する免責事項：ouraring.com/terms-and-conditions

サポートとよくある質問

Oura RingおよびOuraアプリの使用、またはOuraのオンラインサービスに関するご質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。

「よくある質問」はこちらのリンクからご覧ください。

support.ouraring.com

サポートへのお問い合わせ：support.ouraring.com/hc/ja、またはOuraアプリのホームからヘルプにアクセス。(ホーム) > [ヘルプ] の順に進みます。ouraring.com/privacy-policyでOURAのプライバシーポリシーをご覧ください。

한국어

Oura Ring 5를 선택해 주셔서 감사합니다!

Oura Ring과 함께하는 건강 여정에서 고객님을 지원하기 위해 최선을 다하겠습니다. 여기에서 Oura Ring 5 및 Oura Ring 5 충전기에 관한 정보를 확인할 수 있습니다. 이 소책자에는 Oura Ring의 기술적 상세 정보와 안전 정보를 나열했습니다. 본 책자를 주의 깊게 읽어 Oura Ring의 안전한 사용법을 익히고 OURA로 최대의 만족을 얻으시기 바랍니다.

일반 사용법

△Oura Ring 5는 주 7일 하루 24시간 상시 착용이 가능하도록 설계된 제품으로, 샤워, 사우나, 목욕, 수영, 스노클링 중에 사용할 수 있습니다.

Oura Ring 5의 방수 기능은 최대 100미터(328피트)까지 지원됩니다.

△Oura Ring을 정기적으로 세척하고 건조한 상태로 유지하여 원활한 기능을 보장하고 피부 자극의 가능성을 줄이세요. 젖은 천으로 Oura Ring을 닦은 후 완전히 건조한 다음에 다시 사용하세요.

△손전환 때는 사이드볼로 동봉된 Oura Ring 5 충전기와 케이블을 사용하세요.

△Oura Ring 충전기는 방수가 되지 않으며 실내에서만 사용해야 합니다. 욕실과 같이 습한 환경에서 충전기를 사용하지도 보관하지 마세요.

△Oura Ring을 착용하고 다른 물체와 밀접하게 접촉할 경우 Oura Ring에 스크래치가 발생할 수 있으며, 더 부러뜨린 소재(금속, 보석 또는 기타 물체)에 스크래치를 낼 수도 있습니다.

안전성

Oura Ring은 의료 기기가 아니며, 각종 질병이나 증상을 완화, 예방, 관리, 치료 또는 진단할 목적으로 제작된 제품이 아닙니다. 의학적 상태에 관해서는 항상 전문의와 상담하세요. 항상 신체 반응을 민감하게 확인하시기 바랍니다. 또한 Oura Ring 데이터에 근거하여 행동에 변화를 주는 경우, 그로 인한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.

△수면 또는 활동에 변화 중 이후 예기치 않거나 반복적이거나 장기간 지속되는 통증, 피로, 또는 불면증을 느낀다면, 그러한 변화를 계속 유지할지 전문의와 상담하세요.

△Oura Ring의 표면 소재는 피부 접촉에 안전합니다(ISO 10993 표준 준수). Oura Ring 때문에 피부에 자극이 발생하면 땀을 제거하세요. Oura Ring을 사용하지 않은 후에도 증상이 지속되면 전문의와 상담하세요.

△Oura Ring이 고정된 구조물이나 무거운 물체에 걸리지 않도록 주의하세요.

△긴급 상황이 불편함을 발생했거나 Oura Ring을 스스로 제거할 수 없는 경우에는 즉시 의료진의 도움을 받으세요.

△Oura Ring은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 이 제품은 만 18세 미만의 미성년자를 대상으로 하지 않습니다.

△Oura Ring이나 충전기를 차량 내부나 직사광선 아래와 같이 고온 환경에 노출하지 마세요. 그러한 환경에서 Oura Ring을 충전하지 마세요.

△Oura Ring을 열거나 자르거나 풀으려고 시도하지 마세요.

△배터리를 직접 취급하거나, 배터리가 포함된 장치를 기계로 작업하거나, 감전 위험이 있는 상황은 피하세요.

제품 정보

→ 작동 온도 범위: -10 ~ 54°C / 14 ~ 129°F

→ 제품에 내장된 빨간색과 녹색 LED는 가시광선 범위에 속합니다. 이는 착용자와 주변 사람을 모두에게 안전합니다.

→ **메모리 용량**: 모든 기능과 인사이트를 온전히 이용하려면 Oura Ring 데이터를 매일 Oura 앱과 동기화하는 것을 권장합니다. 링 저장 용량에 대한 자세한 내용은 지원 센터를 확인하세요.

→ **배터리**: 충전식 리튬 이온 배터리.

→ 충전 실온에서 충전하세요. 최적 충전 온도는 최소 18°C(65°F) ~ 최대 32°C(89°F). 충전기 모델 OA14의 정상 작동 거리는 인체로부터 20cm(8인치) 이상입니다.

전원 케이블 유형: USB-C to USB-C. IEC 62368-1 표준을 준수하는 외부 5VDC 전원 공급 장치를 사용하세요. 배터리 성능 저하를 방지하기 위해, 장비에 공급되는 전력은 3초 이후 15W를 초과해서는 안 됩니다.

Oura 충전기는 ICT 및 AV 장치에 대한 국제 안전 표준인 EN/IEC 62368-1을 준수합니다.

→ **연결**: 저전력 블루투스

→ **Oura Ring 펌웨어 업데이트 가능 여부**: Oura 앱을 통한 자동 펌웨어 업데이트

→ **Oura 앱 다운로드**: App Store, Google Play

→ **Oura 앱 호환성**: ouraring.com/compatibility 참조

→ **보안**: Oura Ring과 Oura 앱 사이에는 암호화된 블루투스 통신 사용

→ **Oura Ring 폐기**: (내장 배터리 포함) 지역별 관련 법률과 규정을 따르세요. 특수 취급해야 할 수 있습니다. 충전기는 전자 장치이며 전자제품 재활용에 대한 지역별 법률을 따라야 합니다.

→ **공장 초기화 안내**: 링을 폐기하기 전에 공장 초기화를 수행하려면 support.ouraring.com의 안내를 확인하세요.

보통 링크 고지: ouraring.com/terms-and-conditions

지원 및 자주 묻는 질문(FAQ)

Oura Ring, Oura App 또는 온라인 서비스 이용과 관련해 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.

자주 묻는 질문(FAQ)은 support.ouraring.com에서 확인할 수 있습니다. 지원팀에 문의하려면 support.ouraring.com이나 Oura App에서 홈 > 도움말을 참조하세요.

OURA 개인정보 보호정책은 ouraring.com/privacy-policy에서 확인할 수 있습니다.

中文

感谢选择 Oura Ring!

你的健康之路, Oura Ring 始终竭力伴你同行。在这里你可查看 Oura Ring 5 和 Oura Ring 5 充电器的相关信息。本手册介绍了 Oura Ring 的技术细节和安全性信息。请务必仔细阅读, 确保安全使用 Oura Ring, 获得 OURA 的最佳使用体验。

基本使用须知

△ Oura Ring 5 设计用于 24/7 全天候佩戴, 可在淋浴、桑拿、沐浴、游泳和浮潜时佩戴。Oura Ring 5 防水深度可达 100 m / 328 ft.

△ 请定期清洁 Oura Ring 并保持干燥, 以确保正常使用, 减少潜在皮肤刺激。请用湿布擦拭 Oura Ring, 待完全干燥后方可再次佩戴。

△ 使用随 Oura Ring 5 提供的专属尺寸充电器和充电线进行充电。

△ Oura Ring 充电器不防水, 仅供室内使用。请勿在浴室等潮湿环境中使用或存放充电器。

△ 佩戴 Oura Ring 时, 戒指可能会出现划痕, 而在与金属、首饰或其他较软物品紧密接触时, 也可能刮花这些物品。

安全须知

Oura Ring 并非医疗设备, 不可用于缓解、预防、治疗、治愈或诊断任何疾病或病症。涉及健康状况或疾病时, 请务必咨询医生。请始终关注自身身体状况。如根据 Oura Ring 的数据调整行为, 即表示您同意自行承担行为调整后的风险。

△ 如因调整睡眠或活动导致意外、持续或长期的疼痛、疲劳或不适, 请在继续调整前咨询医生。

△ Oura Ring 表面材料符合 ISO 10993 标准, 可安全接触皮肤。若佩戴 Oura Ring 时出现皮肤刺激, 应立即取下戒指。如停止佩戴 Oura Ring 后症状仍未持续, 请联系医生。

△ 请注意避免 Oura Ring 被固定物或重物勾住。

△ 如果出现紧急情况或不适, 或无法自行取下 Oura Ring, 请立即就医。

△ 请将 Oura Ring 置于儿童接触不到的位置。本产品不适用于 18 岁以下人群。

△ 请勿将 Oura Ring 或充电器置于高温环境中, 例如车内或阳光直射处。请勿在此类环境中为 Oura Ring 充电。

△ 请勿尝试拆解、切割或刺穿 Oura Ring。

△ 请避免接触电池。操作含有电池的机械设备, 或处于存在触电风险的环境中。

产品信息

→ 使用温度范围: -10°C ~ 54°C (14°F ~ 129°F)

→ 产品上的红色和绿色发光二极管 (LED) 处于可见光范围内, 对佩戴者及周围人群安全无害。

→ 内存容量: 为确保完整使用 Oura 的各项功能与洞察, 建议每天将 Oura Ring 与 Oura App 同步数据。有关戒指存储容量详情, 请参阅帮助中心。

→ 电池: 可充电锂离子电池

→ 充电: 请在室温下充电。最佳充电温度: 18°C - 32°C (65°F - 89°F)。在正常使用情况下, OA14 型充电器应至少与人体保持 20 cm (8 in) 的安全距离。

→ 充电线类型: USB-C 转 USB-C。请使用符合 IEC 62368-1 标准的外部 5V 直流电源。设备可用的功率在三秒后不应超过 15W, 以防电池性能下降。

Oura 充电器符合 EN/IEC 62368-1 国际安全标准 (信息与通信技术设备及音视频设备)。

- 连接方式：低功耗蓝牙连接
- **Oura Ring**：固件更新：通过 Oura App 自动更新固件
- **Oura App** 获取途径：App Store、Google Play
- **Oura App** 兼容性：请访问 ouraring.com/compatibility
- 安全机制：Oura Ring 和 Oura App 之间使用加密蓝牙通信
- 使用 **Oura Ring**：(及内部电池) 时，应遵守当地适用的法律法规。可能需要特殊处理。本充电器属于电子设备，请按照当地电子产品回收法规进行处理。
- 恢复出厂设置说明：在重置戒指之前，请先恢复出厂设置。操作说明请参见 support.ouraring.com。
- 保修免责声明：请访问 ouraring.com/terms-and-conditions

支持和常见问题解答

如果你对使用 Oura Ring、Oura App 或我们的在线服务有疑问，请随时与我们联系。

你可以在以下位置查看常见问题解答：support.ouraring.com。

你可以通过 support.ouraring.com 或 Oura App 联系支持团队：首页 > 帮助。

你可以访问 ouraring.com/privacy-policy 查看 OURA 隐私政策。

繁體中文 (台灣)

感謝你選擇 Oura Ring 5!

我們將盡最大努力，支持你與 Oura Ring 一起踏上健康旅程。你可以在此找到關於 Oura Ring 5 和 Oura Ring 5 充電器的資訊。本手冊列出 Oura Ring 的技術規格與安全資訊。請仔細閱讀，確保安全使用 Oura Ring 並獲得最佳的 OURA 體驗。

一般使用

- △ Oura Ring 5 專為 24/7 全天候使用而設計，可在淋浴、三溫暖、泡湯、游泳和浮潛時佩戴。**Oura Ring 5 的防水深度可達 100 公尺 (328 英尺)。**
- △ 請定期清潔 Oura Ring，並保持乾燥，以確保正常運作並降低皮膚刺激的風險。可用微濕布擦拭 Oura Ring，並在再次佩戴前確認 Oura Ring 完全乾燥。
- △ 充電時，請使用隨附、對應尺寸的 Oura Ring 5 充電器和充電線。
- △ **Oura Ring 充電器不具防水性**，僅供室內使用。請勿在浴室等潮濕環境中使用或存放充電器。
- △ 佩戴 Oura Ring 時若與物品緊密接觸，Oura Ring 可能會被刮傷，其本身也可能刮傷較軟的物品 (例如金屬、珠寶或其他物件)。

安全

Oura Ring 並非醫療器材，亦非用於減輕、預防、治療、治癒或診斷任何疾病或病況。請務必就醫療狀況向醫師尋求意見。請務必對你的身體反應保持敏感。如果你根據 Oura 戒指的資料對自身行為做出任何改變，你同意自行承擔風險。

△ 若你因調整睡眠或活動而出現突發、反覆或長期的疼痛、疲勞或不適，請在繼續進行此類調整前先諮詢醫師。

△ **Oura Ring 的表面材質適合與皮膚接觸 (符合 ISO 10993 標準)。**若佩戴 Oura Ring 後出現皮膚刺激，請取下戒指，若仍停止使用 Oura Ring 後症狀仍持續，請聯絡醫師。

△ 請注意避免 Oura Ring 勾住固定結構或重物。

△ 如有緊急狀況或感到不適，或無法自行取下 Oura Ring，請立即就醫。

△ **請將 Oura Ring 置於兒童無法取得處。**本產品不適用於未滿 18 歲者。

△ **請勿將 Oura Ring 或充電器置於高溫環境中 (例如車內或陽光直射處)。**請勿在上述環境中為 Oura Ring 充電。

△ **請勿嘗試打開、切割或刺穿 Oura Ring。**

△ **請避免處理電池、操作或維修含電池的機器設備，或在可能發生觸電風險的情況下作業。**

產品資訊

→ **操作溫度範圍**：-10 至 54 °C / 14 至 129 °F

→ 本產品的紅色與綠色發光二極體 (LED) 屬於可見光範圍。對佩戴者及周圍人士皆為安全。

→ **記憶體容量**：建議每日透過 Oura App 同步 Oura Ring 資料，以確保可完整使用功能並查看洞察。如需更多資訊，請參閱「說明中心」中關於戒指儲存容量的說明。

→ **電池**：可充電式鋰離子電池

→ **充電**：請於室溫下充電。最佳充電溫度：最低為 18 °C / 65 °F，最高為 32 °C / 89 °F。充電器 (型號：OAT14) 正常操作時，請與人體保持 20 公分 (8 英寸) 以上距離。

→ **電源線類型**：USB-C 轉 USB-C。請使用符合 IEC 62368-1 標準的外接 5Vdc 電源供應器。為避免電池劣化，供設備使用的功率在 3 秒後不得超過 15W。

→ Oura 充電器符合適用於 ICT 與 AV 設備的 EN/IEC 62368-1 國際安全標準。

→ **連線功能**：低功耗藍牙

→ **Oura Ring 軟體更新**：可透過 Oura App 自動更新軟體

→ **Oura App 下載平台**：App Store、Google Play

→ **Oura App 相容性**：請參閱 ouraring.com/compatibility

→ **安全性**：Oura Ring 與 Oura App 之間使用加密藍牙通訊

→ **處置 Oura Ring**：(及其內建電池) 時，應依當地適用之法律與法規辦理。可能需要特殊處理。充電器為電子設備，應循當地電子產品回收的相關法規。

→ **恢復出廠設定的說明**：可於 support.ouraring.com 找到，請在處置戒指之前執行恢復出廠設定。

→ **保固免責聲明**：ouraring.com/terms-and-conditions

支援與常見問題

若你對使用 Oura Ring、Oura App 或我們的線上服務有任何疑問，歡迎隨時與我們聯絡。

你可以在以下網頁找到常見問題 (FAQ) : support.ouraring.com
你可以在 support.ouraring.com 或 Oura App 聯絡支援團隊：首
頁 > 說明。
你可以到 ouraring.com/privacy-policy 查看 OURA 隱私權政策。

△ **لا تحاول فتح Oura Ring أو قطعه أو ثقبه.**
△ **تجنب التعامل مع البطاريات أو التعامل مع أجزاء بها أجزاء تحتوي على بطاريات، أو الموافقات التي تنطوي على خطر التعرض للمصنع للكهربائي.**

معلومات المنتج

- 4 نطاق درجات الحرارة المناسبة: للاستخدام من 10- إلى 54 °م / من 14 إلى 129 °ف
- 4 المنتج والتصاميم التفاعلية الباعثة للضوء (LED) باللونين الأحمر والأخضر الموجودة على الخنجر على أطرافه ضمن نطاق الأول المرئية للعين. وهذه التصاميم آمنة لمزودي الخدمات والأشخاص القريبين منه.
- 4 **لصحة الذكورة:** توفى بمزامنة بيانات Oura Ring يوميًا مع تطبيق Oura App لضمان الوصول الكامل إلى الميزات والتحليلات التفصيلية. أطلع على مزيد من التفاصيل في مركز المساعدة حول سعة ذاكرة الخاتم.
- 4 **البطارية:** بطارية أيونات الليثيوم قابلة لإعادة الشحن.
- 4 **الشحن:** في درجة حرارة الغرفة. درجة حرارة الشحن المثالية: 18 °م / 65 °ف كحد أدنى، و 32 °م / 89 °ف كحد أقصى. مسافة التشغيل الطبيعية لنسخان الموديل OAI14 هي أكثر من 20 ساعة (التبر) بعيدًا عن سطح الإسفل.
- 4 **كهرباء من النوع:** USB-C إلى USB-A. استخدم مصدر كهرباء خارجي جهد 5 فولت تيار مستمر مطابق للمعيار IEEE 16236B-1. يجب ألا تتجاوز القدرة الكهربائية الواصلة للجهاز 15 واط بعد أول ثلاث نواي من التوصيل، وذلك لمنع تدهور أداء البطارية.

يتوافق شاحن Oura مع معيار السلامة الدولي EN/IEC 16236B-1 الخاص بمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدات السمعية البصرية.

- 4 **تقنية الاتصال:** بلوتوث منخفض الطاقة
- 4 **إمكانية تحديث البرمجيات المتاحة لـ Oura Ring:** تحديثات تلقائية للبرمجيات الثابتة عبر تطبيق Oura

4 **توفر تطبيق:** Oura: يتوفر التطبيق على محجتي التطبيقات

Google Play و App Store

4 **توافق تطبيق:** Oura: ارجع إلى صفحتنا support.ouraring.com/compatibility

4 **الأمان:** الاتصال المستخدم بين Oura Ring وخطيق Oura هو اتصال

بلوتوث مشفر

4 **تخلص من Oura Ring:** (البطارية الداخلية) وفقًا للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها. قد تكون هناك حاجة لمعالجتها بطريقة خاصة. هذا الشاحن هو جهاز إلكتروني، وينبغي البيع للشرعيات المحلية الخاصة بإعادة تدوير الإلكترونيات.

4 **تعليمات إعادة ضبط المنتج:** تحتاج في موعدا

support.ouraring.com. اضغط بعمليّة إعادة ضبط المصنع قبل التخلص من الخاتم.

4 **إخلاء المسؤولية عن الضمان راجع موعدا:**

ouraring.com/terms-and-conditions

الدعم الفني والأسئلة الشائعة

إذا كان لديك أسئلة عن استخدام Oura Ring أو تطبيق Oura App أو خدماتنا

عبر الإنترنت، فلا تتردد في الاتصال بنا.

الأسئلة المتكررة (FAQs) تجدها على موعدا: support.ouraring.com

يمكنك الاتصال بالدعم الفني عبر موعدا: support.ouraring.com أو من خلال

تطبيق Oura على هاتفك الرئيسية > المساعدة.

يمكنك الاطلاع على سياسات الخصوصية التي نطبقها شركة OURA على موعدا:

ouraring.com/privacy-policy

اللغة العربية

شكرًا لاختبارك 15 Oura Ring

نسعى لتقديم أفضل دعم ممكن في شركتك مع Oura Ring. يسعد هذا الكتيب التفاصيل هنا معلومات عن Oura Ring و 5 Oura Ring. يسرد هذا الكتيب التفاصيل التقنية ومعلومات السلامة لجانب Oura Ring. تُرجى القراءة بعناية لاستخدام Oura Ring بأمان والحصول على أفضل تجربة مع OURA

الاستخدام العام

△ تم تصميم Oura Ring 5 للاستخدام على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويمكن ارتداؤه أثناء الاستحمام والسباحة وقبوض السطح. **5 Oura Ring مقاوم للماء حتى عمق 100 متر/ 328 قدمًا.**

△ **تلفك Oura Ring** بانتظام وحافظ على خفافة لضمان أن يعمل جيدًا ويتقبل احتمال تعرض البشرة للتجريح. يمكنك تنظيف Oura Ring بمسحة قطعة قماش مبللة بيفض الماء وتجفيفه تمامًا قبل إعادة استخدامه.

△ استخدم شاحن Oura Ring 5 المخصص لمقاس خاتمك والكلاب المرفق معه لشحن الخاتم.

△ **شاحن Oura Ring غير مقاوم للماء** ومخصص للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط. لا تستخدم الشاحن أو تحزنه في أماكن بها رطوبة مثل الحمامات.

△ قد يتعرض Oura Ring للتخشيب، ويمكنك أيضًا أن يخدش المواد الأكثر ليونة منه (المعادن والمجوهرات أو الأغراض الأخرى) عند ملاصقة الخاتم لها.

السلامة

Oura Ring ليس جهازًا طبيًا، وليس الهدف منه تخفيف أي مرض أو حالة طبية أو الوفاية منها أو علاجها أو تشخيصها. استشر الطبيب دائمًا بخصوص حالات الطبية. كن دائمًا منفتحًا لاستشارات جسدك، وإذا أجريت أي تغييرات في سلوكك بناءً على البيانات التي تحصل عليها من Oura Ring، فأنت توافق على أنك تقوم بذلك على مسؤوليتك الخاصة.

△ **إذا شعرت بألم غير متوقع أو متكرر أو مستمر لفترة طويلة، أو تعب أو عدم راحة** بسبب أجزاء تقنيات في نمط نومك أو نشاطك، فاستشر الطبيب قبل

الاستمرار في تطبيق تلك التقنيات.

△ **الخامات المصنوع منها سطح Oura Ring آمنة عند ملاصقة البشرة وفقًا للمواصفات القياسية ISO 10993** (10993). إذا شعرت تهيج في بشرتك بسبب **Oura Ring**، فاطلع الخاتم. إذا استمرت الأعراض بعد التوقف عن استخدام Oura Ring، يُرجى استشارة الطبيب.

△ **يرجى توخي الحذر حتى لا يعلق Oura Ring في أي أجسام ثابتة أو في أي** أعراض تقيية.

△ في حالة حدوث أي أمر طارئ أو شعورك بعدم الراحة أو إذا لم تتمكن من حلج Oura Ring بنفسك، فاطلب المساعدة الطبية فورًا.

△ **تأكد من إبقاء Oura Ring بعيدًا عن الأطفال.** هذا المنتج غير مخصص للأشخاص تحت سن 18 عامًا.

△ **لا تعرض Oura Ring أو الشحان لمصادر الحرارة، مثل تركه في السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.** لا تسخن Oura Ring في مثل هذه الظروف.

△ יש להימנע מטיפול בסוללות, מעבודה עם מכשירים או מכותל המכילים סוללות, או ממצבים שעלולים לגרום להלם חשמלי.

מידע על המוצר

← **טווח טמפרטורת התפעול:** מ-10°C עד 54°C (14°F עד 129°F)
 ← **גירוי ליד:** (LED) האדומות והירוקות של המוצר הן בטווח הצבעים הנראה לעין. הגירוי בטווחות הן למשמש והן לאנשים שבסביבתו.
 ← **קיבולת זיכרון:** מומלץ לסמכן בין נתוני Oura Ring מדי יום עם אפליקציית Oura כדי להבטיח גישה מלאה לתכונות ולתובנות. הפרטים נוספים, נא לעיין ב"מרכז העזרה" בנושא קיבולת אחסון הטבעת.

← **סוללה:** סוללת יוני ליתיום נטענת

← **עיני:** במסמטורות החדר, טווח טמפרטורת טעינה אופטימלית: מ-10°C עד 18°C (50°F עד 65°F). מרחק פטורה נומרלי למסמטן מדגם OA14 הוא מעל 20 ס"מ (8 אינץ') מגוף האדם.

← **כבל חשמל מסוג:** USB-C ל-USB-C. יש להשתמש בורם חשמל חיצוני 5Vdc תואם למתקן IEC 62368-1. כדי למנוע התדרדרות הסוללה, ההספק המזיין לצידו לא יעלה על 15 ואט לאחר שלוש שניות.

מטען Oura עומד בתקן הבטיחות הבינלאומי IEC 62368-1 לצידו AV-1 ICT.

← **קישוריות:** בלוטוט עם צריכת אנרגיה נמוכה (BLE)

← **יכולת העדכון של קושחת המטען:** עדכויני קושחה אוטומטיים באמצעות Oura App

← **זמינות Oura App:** Google Play-I App Store

← **זמינות של Oura App:** ouraring.com/compatibility

← **אבטחה:** תקשורת בלוטוט מוצפנת המקשרת בין Oura Ring לבין Oura App

← **יש לסלק את Oura Ring:** (לרבות הסוללה הפנימית) בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים הרלוונטיים. ייתכן שיהיה צורך בטיפול מיוחד. המטען הינו מכשיר אלקטרוני ויש להישמש לחוקים באזור מנווירם הרעים במחזור המכשירים האלקטרוניים.

← **הוראות האיפוס לגדרות היצרן:** לפני סילוק הטבעת, נא לעיין בכתובת support.ouraring.com כיצד לבצע איפוס להגדרות היצרן.

← **כתב ויתור אחריות:** ouraring.com/terms-and-conditions

תמיכה ושאלות נפוצו

אם יש לכם שאלות לגבי השימוש ב-Oura Ring-3, Oura App-3 או בירותים המקוונים שלנו, אתם מוזמנים ליצור אתנו קשר.

תמצאו שאלות נפוצות (FAQ) בכתובת support.ouraring.com.

ייתן ליצור קשר עם המומחים בכתובת support.ouraring.com או באמצעות Oura: "צ'ט" < עזרה

מדיניות הפרטיות של OURA זמינה לעיין בכתובת

ouraring.com/privacy-policy.

תודה שבחרתם ב-Oura Ring-3

אנחנו מועינים לעשות כמיטת יכולתנו כדי לתמוך במסע הבריאותי שלכם עם Oura Ring. כאן תמצאו מידע על Oura Ring 5 ועל Oura Ring 3 המטען של Oura Ring 5. חוברת זו מפרטת את הפרטים הטכניים ואת המידע הבטיחותי של Oura Ring. אנא קראו בעיון את ההנחיות כיצד להשתמש ב-Oura Ring בצורה בטוחה ולהפיק את המרב מהחוזה עם OURA.

שימוש חללי

△ Oura Ring 5 מיועדת לשימוש כמיטת יכולתנו כדי לעמוד אותה במקלחת, במואנה, באמבטיה, וכן במהלך שחייה וצילילה עם שנוקל. **טבעת Oura Ring 5 עומדת במים עד לטמקן של 100 מטר/328 רגל.**

△ נא לנקות את Oura Ring באופן קבוע ולשמוך עליה ויבשה על מנת להבטיח פונקציונליות טובה ולהפחית את הסבירות לגירוי העור. ניתן לנקות את Oura Ring על ידי גינון במסלילת לחה. יש לייבש את הטבעת לחלוטין לפני שחוזרים להשתמש בה.

△ לצורך הטיעה, יש להשתמש בטבעת ובכבל של Oura Ring 5, אשר מועידים לגודל המספיק של הטבעת.

△ **המטען של Oura Ring אינו עמיד במים** ומיועד לשימוש בתוך הבית בלבד. נא לא להשתמש במטען ולא לאחסן אותו בסביבות לחות, כגון חדר האמבטיה.

△ Oura Ring עשויה להישרט וגם עוללה לשרוט תומרים רכים יותר (מתכות, תכשיטים או חפצים אחרים) אם היא תבוא איתם במגע.

בטיחות

Oura Ring אינה מכשיר רפואי ולא נועדה להקל על מחלה או מצב רפואי כלשהו, ולא למנוע אותם, לספק בהם, לרפא או לאבחן אותם. תמיד יש להתייעץ עם רופא לגבי מצבים רפואיים. עליכם להיות קשובים לתגובות הגוף שלכם. אם תחליטו להניח שינויים בהתנהגות שלכם בהתבסס על נתונים מ-Oura Ring, החליטו על התייה על אחריותכם בלבד.

△ **אם אתם חשים כאב, עייפות או אי נוחות באופן בלתי צפוי, חזרו או מומשוך בעקבות השינויים בשינה או בפעילות, יש להתייעץ עם רופא לפני שתמשיכו עם השינויים הללו.**

△ **החומרים שמהם עשויה פני המסע של Oura Ring לוחצים למגע עם העור (תקן ISO 10993).** אם יש לכם גירוי בעור בגלל Oura Ring, יש להסיר את הטבעת. אם החומרים נמשכים לאחר שלא השתמשתם ב-Oura Ring-3, יש לפנות לרופא.

△ **אנא הקדישו Oura Ring-3 לחיתופם בצמצים מקובעים או בחפצים כבדים.**

△ במקרים של חירום או אי נוחות, או אם אינכם מצליחים להסיר את הטבעת, יש לפנות מיידי לטיפול רפואי.

△ **יש לשמור את Oura Ring הרחק מהשיג ידם של ילדים.** מוצר זה אינו מיועד לאנשים מתחת לגיל 18.

△ **אין להשוות את Oura Ring או את המטען לחום, למשל, אין להשאיר אותם ברכב או חשופים לאור שמש ישיר.** נא לא להטעין את Oura Ring בסביבה כזו.

△ **אסור לנסות לפתוח, לחתוך או לנקב את Oura Ring.**

Legal

English

Warranty Disclaimer

THE SERVICES ARE PROVIDED TO YOU "AS IS WITH ALL FAULTS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND OURA AND ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE SERVICES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED AND EXPRESSLY DISCLAIM ANY IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, AND NON-INFRINGEMENT. OURA DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SERVICES, THE AVAILABILITY OF CONTENT, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE SERVICES WILL BE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, THAT THE OPERATION OF THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS IN THE SERVICES WILL BE CORRECTED, OR THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SERVICES WILL FUNCTION WITH OTHER MOBILE APPS OR HARDWARE, OR WITHIN A SYSTEM. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY OURA OR AN OURA AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY.

NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, OURA WARRANTS TO THE ORIGINAL END USER PURCHASER THAT THE PRODUCT IS FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP FOR ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE AND REFURBISHED PRODUCTS ARE FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP FOR NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE. If your local law in effect at the time of purchase requires a warranty period longer than one (1) year, this warranty shall be extended to the extent required by such law. Within the warranty period, Oura shall repair or replace at no charge to you any components of the Product that fail the limited warranty provided. You shall be responsible for any related transportation charges. Replacement products may be new or refurbished at our discretion. This limited warranty does not apply to (i) normal wear and tear, including scratches and dents; (ii) consumable parts included in the Product, such as batteries, unless product damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (iii) damage resulting from your failure to use the Product in accordance with the instructions accompanying the Oura Product or available at the website; (iv) damage resulting from an accident, flood, fire, misuse, or abuse; (v) damage resulting from service performed, or damage resulting from tampering or alterations to the Product, by anyone not authorized by Oura; or (vi) use of the Product with any other application or software than the Mobile App.

Oura retains the exclusive right to repair or replace the Product, or offer a full refund, and may require the original end user to provide their original purchase information at its sole discretion. Such remedy shall be your sole and exclusive remedy for any breach of this limited warranty. Warranty repairs and replacements for new Products have a new warranty which is the longer of ninety (90) days or the balance of the original one (1) year warranty. Warranty repairs and replacements for refurbished Products have a new warranty which is the longer of forty-five (45) days or the balance of the original ninety (90) day warranty.

Limitation of Liability

IN NO EVENT WILL OURA, ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, AGENTS, PARTNERS

AND LICENSORS, BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND, UNDER ANY LEGAL THEORY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH YOUR USE, OR INABILITY TO USE, THE SERVICES OR ANY CONTENT ASSOCIATED WITH THE SERVICES, OR SUCH OTHER SITES OR ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE SERVICES, INCLUDING ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OR ANTICIPATED SAVINGS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, LOSS OF DATA, AND WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT OR OTHERWISE, EVEN IF FORESEEABLE. THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS WILL APPLY REGARDLESS OF WHETHER OR NOT OURA HAS BEEN WARNED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

THE FOREGOING DOES NOT AFFECT ANY LIABILITY WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER APPLICABLE LAW. TO THE EXTENT LIABILITY CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED AS SET FORTH ABOVE, IN NO EVENT SHALL OURA BE LIABLE FOR ANY CLAIM, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR UNDER ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, IN EXCESS OF \$100.

Terms of Use

Your use of the Oura Products and Services is subject to our Terms of Use, available at ouraring.com/terms-of-use/, and Privacy Policy, available at ouraring.com/privacy-policy/. The Warranty Disclaimer and the Limitation of Liability set forth above are part of our Terms of Use and are subject to change if we change our Terms of Use.

Intellectual property rights

OURA, OURA, and O are trademarks of Oura Health Oy, Oura Content, Oura Products, Oura Features and Services, and underlying technology are protected by copyright, trademark, patent, and other laws of the United States and foreign countries. All rights reserved. Manufactured for Oura Health Oy (Oura), Elektronikkatie 10, FI-90590 Oulu, Finland. Visit ouraring.com/intellectual-property-notice for a detailed listing of Oura's intellectual property rights.

Français

Exclusion de garantie

LES SERVICES VOUS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT, DÉFAUTS COMPRIS » ET « TELS QUE DISPONIBLES » SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, ET OURA ET SES FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS, AGENTS, PARTENAIRES ET CÉDANTS DE LICENCE DÉCLINENT PAR LES PRÉSENTS TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES, ET REJETTENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ SATISFAISANTE ET DE NON-VIOLATION. OURA NE GARANTIT NULLEMENT L'ABSENCE DE PROBLÈMES LORS DE VOTRE UTILISATION DES SERVICES, LA DISPONIBILITÉ DU CONTENU, QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LES SERVICES RÉPONDENT À VOS EXIGENCES, QUE LES SERVICES SERONT EXEMPTS DE VIRUS OU D'AUTRES COMPOSANTS MALVIEUXSANTS, QUE LA FONCTIONNEMENT DES SERVICES SERA ININTERROMPU, QU'IL S'AGISSE D'UN SERVICE, QUE LES DÉFAUTS DES SERVICES SERONT CORRIGÉS, OU QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LES SERVICES FONCTIONNERONT AVEC D'AUTRES APPLICATIONS MOBILES OU MATÉRIELS, OU AU SEIN D'UN SYSTÈME. AUCUNE INFORMATION ORALE OU ÉCRITE OU AUCUN CONSEIL DONNÉ PAR OURA OU UN REPRÉ-

SENTANT AUTORISÉ D'OURA NE CRÉERA DE GARANTIE. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU DES LIMITATIONS DES DROITS LÉGAUX APPLICABLES D'UN CONSOMMATEUR, PAR CONSÉQUENT L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER.

NONOBTANT CE QUI PRÉCÈDE, OURA GARANTIT À L'ACHETEUR UTILISATEUR FINAL INITIAL QUE LE PRODUIT NE PRÉSENTE AUCUN DÉFAUT DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION PENDANT UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ET QUE LES PRODUITS REMIS À NEUF NE PRÉSENTENT AUCUN DÉFAUT DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION PENDANT QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. Si votre législation locale en vigueur au moment de l'achat exige une période de garantie supérieure à un (1) an, cette garantie sera prolongée dans la mesure requise par cette législation. Pendant la période de garantie, Oura réparera ou remplacera gratuitement les composants du Produit qui ne respectent pas la garantie limitée fournie. Les éventuels frais relatifs au transport seront à votre charge. Les produits de remplacement peuvent être neufs ou réparés selon votre appréciation. Cette garantie limitée ne s'applique pas: (i) à la fusure normale, y compris les rayures et les bosses; (ii) aux pièces consommables incluses dans le Produit, comme les batteries, à moins que le produit n'ait été endommagé en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication; (iii) aux dommages résultant d'une utilisation du Produit qui n'est pas conforme aux instructions accompagnant le Produit Oura ou disponibles sur le site Web; (iv) aux dommages résultant d'un accident, d'une inondation, d'un incendie, d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation à mauvais escient; (v) aux dommages résultant d'une révision, d'une manipulation ou d'une altération du Produit effectuée par toute personne non autorisée par Oura; ou (vi) à l'utilisation du Produit avec toute autre application ou logiciel que l'application mobile.

Oura se réserve le droit exclusif de réparer ou de remplacer le Produit, ou d'offrir un remboursement intégral, et peut exiger de l'utilisateur final initial qu'il fournisse ses informations d'achat originales, à sa seule discrétion. Ce recours sera votre seul et unique recours possible en cas de violation de cette garantie limitée. Les réparations et les remplacements effectués sous garantie pour les nouveaux produits bénéficient d'une nouvelle garantie de quatre-vingt-dix (90) jours ou de la durée restante de la garantie initiale d'un (1) an. Les réparations et les remplacements sous garantie pour les produits remis à neuf bénéficient d'une nouvelle garantie d'une durée de quatre-vingt-dix (90) jours ou du reste de la durée d'origine de quatre-vingt-dix (90) jours, la durée plus longue étant retenue.

Limitation des responsabilités

EN AUCUN CAS OURA, SES FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS, AGENTS, PARTENAIRES ET CÉDANTS DE LICENCE NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE, EN VERTU DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, DÉCOULANT DE OU EN LIEN AVEC VOTRE UTILISATION, OU INCAPACITÉ À UTILISER LES SERVICES OU TOUT CONTENU ASSOCIÉ AUX SERVICES, OU LES AUTRES SITES OU TOUT SERVICE OU ARTICLE OBTENU PAR L'INTERMÉDIAIRE DES SERVICES, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU PUNITIF, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES BLESSURES CORPORELLES, LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE, LA DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D'ACTIVITÉS OU D'ÉCONOMIES PRÉVUES, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, LA PERTE D'UTILISATION, LA PERTE DE CLIENTÈLE, LA PERTE DE DONNÉES, QU'ELLES SOIENT CAUSÉES PAR UN DÉLIT (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE), UNE VIOLATION DE CONTRAT OU AUTRE, MÊME PRÉVISIBLE. CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS S'APPLIQUERONT QUE OURA AIT ÉTÉ AVERTIE OU NON DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

CE QUI PRÉCÈDE N'AFECTE AUCUNE RESPONSABILITÉ QUI NE PEUT ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE. DANS

LA MESURE OÙ LA RESPONSABILITÉ NE PEUT PAS ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE COMME INDIQUÉ CI-DESSUS, EN AUCUN CAS OURA NE SERA RESPONSABLE EN CAS DE RÉCLAMATION, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT OU D'UNE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, AU-DELÀ DE 100 \$.

Conditions d'utilisation

Votre utilisation des Produits et des Services OURA est soumise à nos Conditions d'utilisation, disponibles sur ouraring.com/terms-of-use/, et à la Politique de confidentialité, disponible sur ouraring.com/privacy-policy/. L'Exclusion de garantie et la Limitation des responsabilités énoncées ci-dessus sont tirées de nos Conditions d'utilisation et peuvent être modifiées en cas de modifications de nos Conditions d'utilisation.

Droits de propriété intellectuelle

OURA, OURA et O sont des marques déposées de Oura Health Oy. Le contenu Oura, les produits Oura, les fonctionnalités et services d'Oura, ainsi que la technologie sous-jacente sont protégés par Copyright, droit d'auteur, marque déposée, brevet et autres lois des États-Unis et des pays étrangers. Tous droits réservés. Fabriqué pour Oura Health Oy (Oura), Elekttronikallantie 10, FI-90590 Oulu, Finlande. Consultez ouraring.com/intellectual-property-notice pour obtenir une liste détaillée des droits de propriété intellectuelle d'Oura.

Deutsch

Haftungsausschluss

DIE DIENSTLEISTUNGEN WERDEN IHNEN OHNE „MÄNGELGEWÄHR“ UND „WIE VERFÜGBAR“ OHNE JEGLICHE GARANTIE BEREITGESTELLT, UND OURA UND SEINE TOCHTERGESellschaften, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRÉTER, VERMITTLER, PARTNER UND LIZENZGEBER GEBEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN UND BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIE DIENSTLEISTUNGEN, UND SCHLIESSEN AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN IN BEZUG AUF TITEL, MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUFRIEDENSTELLUNG DER QUALITÄT UND NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN AUS. OURA GARANTIEREN NICHT, DASS DIE NUTZUNG DER DIENSTE NICHT BEINTRACHTIGT WIRD, ODER DASS BESTIMMTE INHALTE VERFÜGBAR SIND, DASS DIE IN DEN DIENSTEN ENTHALTENEN FUNKTIONEN IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN, DASS DIE DIENSTE FREI VON VIER ODER ANDEREN SCHÄDLICHEN KOMPONENTEN SIND, DASS DER BETRIEB DER DIENSTE NICHT UNTERBROCHEN WIRD ODER FRIEHLERFRI IST, DASS MANGEL IN DEN DIENSTEN BEHOBBEN WERDEN ODER DASS DIE IN DEN DIENSTEN ENTHALTENEN FUNKTIONEN MIT ANDEREN MOBILEN ANWENDUNGEN ODER HARDWARE ODER INNERHALB EINES SYSTEMS FUNKTIONIEREN WEDER MÜNDLICHE NOCH SCHRIFTLICHE INFORMATIONEN ODER HINWEISE, DIE VON OURA ODER EINEM AUTORISIERTEN VERTRÉTER VON OURA erteilt werden, SCHAFFEN EINE GARANTIE. IN EINIGEN GERICHTSBARKEITEN IST DER AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN ODER DIE EINSCHRÄNKUNG GELTENDER GESETZLICHER RECHTE EINES VERBRAUCHERS NICHT GETAT, SODASS DER OBIGE AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT GILT.

UNGEACHTET DES VORSTEHENDEN GARANTIERE OURA DEM URSPRÜNGLICHEN ENDBENUTZER, DASS DAS PRODUKT FÜR EIN (1) JAHR AB KAUFDATUM FREI VON MATERIELLEN UND VERARBEITUNGSFEHLERN IST, UND DASS GENERALÜBERHOBTÉ PRODUKTE FÜR NEUNZIG (90) TAGE AB KAUFDATUM FREI VON MATERIAL- UND VERARBEITUNGSFEHLERN SIND. Wenn die bei Ihnen vor Ort zum Zeitpunkt des Kaufs geltenden Gesetze eine längere Gewährleistungsfrist als ein (1) Jahr

vorschreiben, verlängert sich diese Gewährleistungspflicht entsprechend. Innerhalb des Gewährleistungszeitraums repariert oder ersetzt OURA kostenlos alle Komponenten des Rings, die innerhalb dieses Zeitraums ausfallen. Sie tragen alle damit verbundenen Transportkosten. Die Ersatzprodukte können je nach unserem Ermessen entweder neu oder generalüberholt sein. Die beschränkte Haftung gilt nicht für (i) normale Abnutzung, einschließlich Kratzer und Dellen; (ii) im Ring enthaltene Verschleißteile, wie z. B. der Akku, es sei denn, der Produktschaden ist aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers aufgetreten; (iii) Schäden, die daraus resultieren, dass Sie den Ring nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden, die das Oura-Produkt beiliegen und auf unserer Website verfügbar sind; (iv) Schäden infolge eines Unfalls, einer Überschwemmung, eines Brandes oder einer falschen oder missbräuchlichen Verwendung; (v) Schäden infolge von Wartung, Manipulationen oder Änderungen am Ring, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von OURA hierzu autorisiert waren; oder (vi) die Verwendung des Produkts mit einer anderen App oder Software als der mobilen App.

Oura behält sich das ausschließliche Recht vor, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen oder eine vollständige Rückerstattung anzubieten und kann nach eigenem Ermessen vom ursprünglichen Endverbraucher die Angabe seiner ursprünglichen Kaufinformationen verlangen. Dieser Anspruch ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch bei einer Verletzung dieser beschränkten Garantie. Für Reparaturen unter Garantie und Ersatzgeräte bei neuen Produkten gilt eine neue Gewährleistungsfrist von neunzig (90) Tagen oder dem restlichen Zeitraum der ursprünglichen einjährigen (1) Gewährleistungsfrist, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Reparaturen unter Garantie und Ersatzgeräte bei generalüberholten Produkten gilt eine neue Garantie, die entweder fünfundfünfzig (55) Tage oder die Restlaufzeit der ursprünglichen neunzig (90) Tage beträgt, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

Haftungsbeschränkung

IN KEINEM FALL HAFTEN OURA, SEINE TOCHTERGESSELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRÉTER, VERMITTLER, PARTNER UND LIZENZGEBER FÜR SCHÄDEN JEGLICHER ART, UNABHÄNGIG VOM RECHTSGRUNDSATZ, DIE SICH AUS OURA IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT ZUR NUTZUNG DER DIENSTE ODER JEGLICHER INHALTE, DIE MIT DEN DIENSTEN VERBUNDEN SIND, ODER ANDERER WEISEN ODER DIENSTE ODER ARTIKEL, DIE OBER DIE DIENSTE BEZOGEN WERDEN, ERGEBEN SICH. SCHLIESSLICH DIREKT, INDIREKT, BESONDERER, ZUFÄLLIGER, FOLGE- ODER STRAFSCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, PERSONENSCHÄDEN, SCHMERZEN UND LEIDEN, EMOTIONALE BELASTUNGEN, EINKOMMENSVERLUST, GEWINNVERLUST, VERLUST VON GESCHÄFTEN ODER ERWARTETEN EINSPARUNGEN, VERLUST VON GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, NUTZUNGSAUSFALL, VERLUST DES GESCHÄFTSWERTS, DATENVERLUST UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHR- LÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN, SELBST WENN SIE VORHERSEHBAR WÄREN. DIESE AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN GELTEN UNABHÄNGIG DAVON, OB OURA AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER NICHT.

DAS VORANSTEHENDE HAT KEINE AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAFTUNG, DIE NACH GELTENDEM RECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN ODER BESCHRÄNKT WERDEN KANN, IN DEM UMFANG, IN DEM DIE HAFTUNG NICHT WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSGESCHLOSSEN ODER BESCHRÄNKT WERDEN KANN, HÄFTET OURA UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR ANSPRÜCHE, OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER EINER ANDEREN HAFTUNGSGRUNDLAGE, IN HÖHE VON MEHR ALS 100 €.

Nutzungsbedingungen

Ihre Nutzung der Oura-Produkte und -Dienstleistungen unterliegt unseren Nutzungsbedingungen, die unter ouraring.com/terms-of-use/ verfügbar sind, sowie unseren Datenschutzrichtlinien, die unter ouraring.com/privacy-policy/ verfügbar sind. Der oben angeführte Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkung sind Teil unserer Nutzungsbedingungen und können sich ändern, wenn wir neue Nutzungsbedingungen ändern.

Geistige Eigentumsrechte

OURA, OURÅ und O sind Marken von Oura Health Oy. Oura-Inhalte, Oura-Produkte, Oura-Funktionen und -Dienstleistungen sowie die zugrunde liegende Technologie sind durch Urheberrechte, Marken, Patente und andere Gesetze der Vereinigten Staaten und anderer Länder geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt für Oura Health Oy (Oura), Elektroniknotifizie 10, FI-90590 Oulu, Finnland. Unter ouraring.com/intellectual-property-noticiefinden Sie genauere Angaben zu den geistigen Eigentumsrechten von Oura.

Suomi

Takuun vastuuvapausilmoitus

PALVELUUT TARJOTAAN SINULLE "SELLAISENAAN KAIKINE VIKOINEEN" JA "SELLAISENA KUIN NE OVAT SAATAVILLA" ILMAAN MIINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JA OURA, JA OURA, JA SIN YÄRÄHYTTÄ, OSAKKUISYHTEISTÖ, VIRKAILLAIJT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAajat, ASIAMIEHEET, KUMPPANIT JA LISENSINANTAJAT TÄTEN SANOUTUVAJT IRTI KAIKISTA PALVELUJIHIN LIITYYVISTÄ TAKUUSTA, JA EHDOISTA RIPPUMATTA SIITÄ, OVAATKO NE NIMENOMAISET VAI EPÄSUORILLA, JA NIMENOMAISESTI KIRJITÄVÄT KAIKKI VÄLILIESET TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA, MYNTTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUJUUDESTA TIETYYN TARKOITUKSEEN, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, JA LOUKKAAMATTOMOJUESTA. OURA EI TAKAA, ETTÄ VOIT NAUTTIA PALVELUUSTA HÄIRIÖTTÄ, SISÄLLÖN SAATAVUUHTA, ETTÄ PALVELUJIHIN SÄLITYVÄT TOIMINNOT YÄT TÄVÄT VÄÄNLUUKSESI, ETTÄ PALVELUJISSA OLE VIRKUSIA TAI MUHTA HÄNTÄLLISIA KOMPONENTTEJA, ETTÄ TÄ PALVELUJIDEN TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖN TAI VIRHEE- TÖNTÄ, ETTÄ PALVELUJISSA OLEVÄT VÄÄT KAIKKI VÄÄNLUJIHIN SÄLITYVÄT TOIMINNOT TOIMIVAT MUJDEN MOBILISUJELUUSTEN TAI -LAITTEIDEN KANSSA TAI JÄRJESTELMÄN SÄLLÄ. OURAN TAI OURAN VÄLUUTUETUN EDUSTA, JAN ANTAMAT SUJELISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA, JOILLKAIN LAINKÄYR- TÖALUEILLA EI SALLITA KULUTTAJAN SOVELLETTAVIA LAKISÄÄTEISIA OIKEUKSIA KOSKEVINE EPÄSUORINE TAKUIDEN TAI RAJOITTUNE POISSULKEMISTÄ, JOTEN EDELLÄ MAINITTUA POISSULKEMISTÄ EI VÄLTÄMÄTTÄ SOVELLETA.

EDELLÄ ESITETYSTÄ HUOIMATTUNA OURA ANTAA ALKUPERÄISELLE LÖPPUKÄYTTÄJÄLLE TAKUUN SIITÄ, ETTÄ TUJUESSA EI OLE MATERIAALI- TAI VALMISTUSVIRHEITÄ YHDEN (1) VUODEN AJAKSI OSTOPÄIVÄSTÄ. KUNNOSTETTUIJEN TUJUEIDEN OSALTA MATERIAALI- JA VALMISTUSVIRHEITÄKUKI ON YHDEKSÄNKYMMENTÄ (90) PÄIVÄ OSTOPÄIVÄSTÄ. Jos osthotehellä voimassa oleva paikallinen laki edellyttää pidempää takuuaikaa kuin yksi (1) vuosi, tästä takuusta pidennetään kyseiseen lain edellyttämässä laajuudessa. Takuuaikana Oura korjaa tai vaihtaa veltoukselta kaikki tuotteen osat, jotka eivät täyrtä rajoitetun tuotteen ehtoja. Sinä vastaat kaikista asunon liittyvistä kuluksmaksuista. Korvaavat tuotteen voiivat olla uusia tai kunnostettuja harkintamuk mukaan. Tämä rajoitettu takuuta ei koske (i) normaalia kulumista muksum lukien naamut; ja lommott; (ii) tuotteenne säilyttävyyksilutulosista, kuten akkuja, ellei tuote ole vauri- otittuun materiaali- tai valmistusvirheen vuoksi; (iii) vahinkoa, joka johtuu siitÄ, ettei ole käyttänyt tuotetta Oura-tuotteen mukana toimitettujen tai verkkosivustolla saatavilla olevien ohjeiden mukaisesti; (iv) vahinkoa, joka johtuu onnettomuudesta, tulvasta, palosta, virheellisesti käytöstä tai väärinkäytöstä; (v) vahinkoa, joka johtuu muun kuin Oura-vaihtuutaan tahon tekemästä huollosta tai tuotteen peukalonniista tai tuotteenne tekemistä

muutoksista; tai (vi) tuotteen käyttöä muulla sovelluksella tai ohjelmistolla kuin mobiiliversionuksella.

Oura pidättää yksinöikeuden tuotteen korjaamiseen tai korvaamiseen tai täyden hyvityksen tarjoamiseen arvon harkintansa mukaan ja voi vaatia alkuperäistä loppukäyttäjää toimittamaan alkuperäiset ostotiedot. Tällainen korvaus on ainoaa ja yksinomainen korvaus rajoitettua tuotteen rikkomuksesta. Uusien tuotteiden takauksensaajilla ja korvauksilla tuotteilla on uusi takuu, jonka voimassaoloaika on yhdeksänkymmentä (90) päivää tai alkuperäisestä yhden (1) vuoden takuusta jäljellä oleva aika sen mukaan, kumpi on pidempi. Kun nostettujen tuotteiden takauksensaajilla ja korvauksilla tuotteilla on uusi takuu, jonka voimassaoloaika on neljäkymmentäviisi (45) päivää tai alkuperäisestä 90 päivän takuusta jäljellä oleva aika sen mukaan, kumpi on pidempi.

Vastuun rajoitukset

OURA, SEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKIUUSYHTIÖT, VIRKAILIJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, ASIAMIEHET, KUMPPANIT JA LISENSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSISSA OLE KIMPPAAN OIKEUDELLISEN TEORIAN NOJALLA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SIITÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, ETTÄ KÄYTTÄ PALVELUITA TAI PALVELUJUHIN LIITTYVÄÄ SIALTALOJA TAI MUITA SIVUSTOJA TAI MUITA PALVELUJUHIN KAUTTA SAATUJAA PALVELUITA TAI TUOTTEITA, TAI JOTKA JOHTUVAT SIITÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, ETTÄVÄT NÄMÄ OIKEÄ KÄYTTÄVÄISSÄ, MIUKAAN LUKIEN SUORAT, EPÄSUORAT, ERITYISET, SATUNNAISET, VÄLLISET TAI RANKAISUEET VAHINGONKORVAUKSET, MIUKAAN LUKIEN, MUTTA NIEMIEN RAJOITUMATTA, HENKILÖVAHINGOT, KIPU JA KÄRSIMYS, EMOTIONAALINEN KÄRSIMYS, TULOJEN MENETYS, VOITTOJEN MENETYS, LIKETOIMINNAN TAI ODOTETTAVISSA OLEVIEN SÄÄSTÖJEN MENETYS, LIKETOIMINTAMÄÄHÖLLISYKSIEN MENETYS, LIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, KÄYTÖN MENETYS, LIKKEARVON MENETYS JA TIETOJEN MENETYS, RIIPUMATTA SIITÄ, JOHTUUKO VAHIKON RIKKOMUKSISTA (MIUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), SOPIMUSRIKKOMUKSISTA SE TAI MUUSTA SYYSTÄ, VAIKKA SE OLISI ENNAKOITAMISAA. NÄITÄ RAJAUKSIA TAI RAJOITUKSIA SOVELLETTAAN RIIPUMATTA SIITÄ, ONKO OURA VAIROTETTU TÄLLAISTEN VAHIKONJEN MAHOLLISUUDESTA.

EDELLÄ ESITETTY EIVÄ VAIKUTA VASTUUSEN, JOKA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTEA. SILTÄ OSIN KUIN VASTUUTA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTEA EDELLÄ ESITETTYLLÄ TAVALLA. OURAN KORVAUSVELVOLLISUUDEN MÄÄRÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSISSA OLE YLI 100 € MISTÄÄN KORVAUSVÄÄNTIMUKSISTA, OLIPA KYSE SOPIMUKSISTA, RIKKOMUKSISTA TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA MIINKÄ TAHANSA KORVAUSVELVOLLISUUSTEORIAN ALAISUUTEEN KUULUVASTA.

Käyttöehdot

Oura-tuotteiden ja -palveluiden käytössä on noudatettava käyttöehtojamme, jotka ovat luettavissa verkko-osoitteessa ouraring.com/ri/terms-and-conditions, ja tietosuojalause, jotka ovat luettavissa verkko-osoitteessa ouraring.com/ri/privacy-policy. Edellä oleva takuu vastuuvapauslause ja vastuunrajoitus sisällyvät käyttötoihomme ja voivat muuttua, jos muutamme käyttöehtojamme.

Immateriaalioikeudet

OURA, OURA ja O ovat Oura Health Oy:n tavaramerkkejä. Ouran aineisto, tuotteet, ominaisuudet ja palvelut sekä teknologia, jota niissä sovelletaan, on suojattu tekijänoikeuksilla ja patentilla sekä muilla Yhdysvaltojen ja muiden maiden laeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Valmistuttaja Oura Health Oy (Oura), Elektroniikkiteki Oulu, 90590 Oulu, Suomi. Kattava luettelo Ouran immateriaalioikeuksista on luettavissa osoitteessa ouraring.com/intellectual-property-note.

Español

Exención de responsabilidad de la garantía

SALVO EN EL CASO DE LA GARANTÍA LIMITADA DEL ANILLO, LA CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, OURA Y SUS FILIALES SUMINISTRAN EL ANILLO Y PRESTAN SUS SERVICIOS (TAL COMO NI OURA NI SUS COLABORADORES, PROVEEDORES O FILIALES OFRECEN GARANTÍAS DE NINGUN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CON RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE SUS SERVICIOS Y DEL ANILLO, SU CONTENIDO O CUALQUIER INFORMACIÓN PUBLICADA POR O A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE OURA. ADEMÁS, OURA Y SUS COLABORADORES, PROVEEDORES Y FILIALES RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DE OURA Y EL ANILLO, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, TITULARIDAD, DERECHO PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN. ADEMÁS, OURA NO GARANTIZA QUE EL USO DE SUS SERVICIOS NO SE VEA INTERRUMPIDO, O QUE ESTÉ DISPONIBLE EN CUALQUIER MOMENTO O DESDE CUALQUIER LUGAR, QUE SEA SEGURO O NO PRESENTE ERRORES, QUE LOS DEFECTOS SEAN CORREGIDOS, O QUE SUS SERVICIOS Y EL ANILLO SE ENCUENTREN LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES POTENCIALMENTE DAÑINOS, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS SERVICIOS FUNCIONEN EN SUS APLICACIONES MÓVILES O HARDWARE O DENTRO DE UN SISTEMA. NO CONSTITUYE GARANTÍA LA INFORMACIÓN O ASesoramiento ORAL O POR ESCRITO FACILITADO POR OURA O POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE OURA. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES SOBRE LOS DERECHOS LEGALES APLICABLES DE UN CONSUMIDOR, ASÍ QUE PUEDE QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SEA APLICABLE.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, OURA GARANTIZA AL COMPRADOR Y USUARIO FINAL QUE EL ANILLO NO PRESENTARÁ DEFECTOS EN SUS MATERIALES NI EN SU FABRICACIÓN DURANTE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA Y QUE LOS PRODUCTOS REACONDICIONADOS NO PRESENTARÁN DEFECTOS EN SUS MATERIALES NI EN SU FABRICACIÓN DURANTE NOVENTA (90) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. Si la legislación local en vigor en el momento de la compra exige un periodo de garantía superior a un (1) año, esta garantía se ampliará en la medida en que así lo exija tal legislación. Dentro del periodo de garantía, Oura reparará o sustituirá sin coste alguno para el usuario cualquier componente del Producto que no cumpla con la garantía limitada que se proporciona. El usuario deberá correr con los gastos de transporte. Los productos de sustitución pueden ser nuevos o reacondicionados, según nuestro propio criterio. Esta garantía limitada no se aplica a (i) el desgaste normal, incluidos arañazos y abolladuras; (ii) los consumibles incluidos en el Producto, como pueden ser las baterías, salvo que el daño del producto se haya producido como consecuencia de un defecto en los materiales o la fabricación; (iii) los daños provocados por no utilizar el Producto de acuerdo con las instrucciones que acompañan el producto Oura o disponibles en nuestra página web; (iv) los daños resultantes de un accidente, inundación, incendio, mal uso o abuso; (v) los daños resultantes de las labores de mantenimiento o de la manipulación o modificación del Producto llevadas a cabo por cualquier persona no autorizada por Oura; o (vi) el uso del anillo con cualquier otra aplicación o software diferentes de la aplicación móvil Oura.

Oura Se reserva el derecho exclusivo de reparar o sustituir el Producto o de ofrecer un reembolso por el importe inferior, y según su propio criterio, puede solicitar al usuario final original que facilite la información de compra original. Dicha solicitud será la única y exclusiva solución para el usuario en caso de incumplimiento de esta garantía limitada. Las reparaciones y sustituciones en garantía de nuevos productos tienen una nueva garantía que será la de mayor duración entre estas dos opciones: noventa (90) días o el tiempo que quedaba de la garantía original de un (1) año. Las reparaciones y sustituciones en garantía de productos reacondicionados

tien una nueva garantía que será la de mayor duración entre estas dos opciones: cuarenta y cinco (45) días o el tiempo que quedaba de la garantía original de noventa (90) días.

Limitación de responsabilidad

EN NINGÚN CASO OURA NI NINGUNA DE SUS FILIALES, AFILIADOS, DIRECTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, REPRESENTANTES, AGENTES, SOCIOS Y CESIONARIOS SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, PUNITIVOS O MATERIALES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DERIVADOS DEL LUCRO CESANTE, LA PERDIDA DE DATOS O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL), DERIVADOS DEL USO, DE LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR O COMO RESULTADO DE UTILIZAR EL ANILLO Y LOS SERVICIOS DE OURA, CON INDEPENDENCIA DE QUE TALES DAÑOS SE BASEN EN LA GARANTÍA, EL CONTRATO, UN LÍCITO CIVIL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, TANTO SI SE HA ADVERTIDO O NO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS COMO SI NO. ESTAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES SE APLICARÁN INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAYA ADVERTIDO O NO A OURA SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHS DAÑOS.

TODO LO ANTERIOR NO AFECTARÁ A NINGUNA RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDA EXCLUIRSE O LIMITARSE CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EN LA MEDIDA EN QUE LA RESPONSABILIDAD NO SE PODRÁ EXCLUIR O LIMITAR SEGUN LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO OURA SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA RECLAMACIÓN. VA SEA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL O EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, POR VALOR DE MÁS DE 100 €.

Condiciones de uso

El uso de los productos y servicios de Oura está sujeto a nuestras Condiciones de uso, disponibles en ouraring.com/terms-and-conditions y nuestra política de privacidad, disponible en ouraring.com/privacy-policy. La extensión de responsabilidad de la garantía y la limitación de responsabilidad expuestas más arriba proceden de nuestras condiciones de uso, y están sujetas a cambios si decidimos modificar tales Condiciones de uso.

Derechos de propiedad intelectual

OURA, QURA, Y O son marcas comerciales de Oura Health Oy. Los contenidos de Oura, productos Oura y las funciones y servicios de Oura, junto con su tecnología subyacente, están protegidos por derechos de autor, marcas registradas, patentes y otras leyes de Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Fabricado para Oura Health Oy (Oura), Elektronikkaitte 10, FI-90590 Oulu, Finlandia. Visita ouraring.com/intellectual-property-notice para ver una lista detallada de los derechos de propiedad intelectual de Oura.

Portugués

Inserções de Garantia

OS SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS AO UTILIZADOR TAL COMO ESTÃO, COM TODAS AS FALHAS E "CONFORME DISPONÍVELS" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, E A OURA E AS SUAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES, AGENTES, PARCEIROS E LICENCIANTES RENUNCIAM, POR ESTE MEIO, A TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES RELATIVAMENTE AOS SERVIÇOS, QUER SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, E RENUNCIAM EXPRESSAMENTE A QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO, COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, QUALIDADE SATISFATORIA E NÃO INFRAÇÃO. A OURA NÃO OFERECE GARANTIA CONTRA INTERFERÊNCIAS NO USUFRUO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO UTILIZADOR E NA DISPONIBILIDADE DE CONTEÚDOS. ALÉM DISSO, TAMBÉM NÃO OFERECE GARANTIAS DE QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NOS SERVIÇOS SATISFARÃO OS REQUIS-

ITOS DO UTILIZADOR, DE QUE OS SERVIÇOS ESTARÃO ISENTOS DE VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES PREJUDICIAIS, DE QUE O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS SERÁ ININTERRUPTO OU ISENTO DE ERROS, DE QUE OS DEFEITOS NOS SERVIÇOS SERÃO CORRIGIDOS OU DE QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NOS SERVIÇOS FUNCIONARÃO COM OUTRAS APLICAÇÕES MÓVEIS OU HARDWARE, OU DENTRO DE UM SISTEMA, NENHUMA INFORMAÇÃO OU CONSELHO ORAL OU ESCRITO FORNECIDO PELA OURA OU POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA OURA RESULTARÁ NUMA GARANTIA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS OU LIMITAÇÕES NOS DIREITOS ESTADUÁRIOS APLICÁVEIS DE UM CONSUMIDOR, PELO QUE A EXCLUSÃO ACIMA PODERÁ NÃO SE APLICAR.

NÃO OBTANTE O ACIMA, A OURA GARANTE AO COMPRADOR UTILIZADOR FINAL ORIGINAL QUE O PRODUTO ESTÁ LIVRE DE DEFEITOS MATERIAIS E DE FABRICO POR UM (1) ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA E QUE OS PRODUTOS RECONDICIONADOS ESTÃO LIVRES DE DEFEITOS MATERIAIS E DE FABRICO POR NOVENTA (90) DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA. Se a legislação local em vigor no momento da compra exigir um período de garantia superior a um (1) ano, esta garantia deverá ser alargada na medida exigida pela referida legislação. Dentro do período de garantia, a Oura reparará ou substituirá gratuitamente quaisquer componentes do Produto que não cumpram a garantia limitada fornecida. O utilizador é responsável por quaisquer despesas de transporte relacionadas. Os produtos de substituição poderão ser novos ou recondicionados, mediante o nosso critério. Esta garantia limitada não se aplica a (i) desgaste normal, incluindo arranhões e amolgadelas; (ii) peças consumíveis incluídas no Produto – como baterias – exceto se tiverem ocorrido danos no produto devido a defeitos materiais ou de fabrico; (iii) danos resultantes da utilização do Produto não conforme com as instruções que acompanham o Produto Oura ou que se encontram disponíveis no site; (iv) danos resultantes de acidente, inundação, incêndio, utilização indevida ou abusiva; (v) danos resultantes de serviço realizado, ou danos resultantes de adulterações ou alterações no Produto, por qualquer pessoa não autorizada pela Oura; ou (vi) utilização do Produto com qualquer outra aplicação ou software que não seja a aplicação móvel.

A Oura mantém o direito exclusivo de reparar ou substituir o Produto, ou oferecer um reembolso total, podendo, a seu exclusivo critério, exigir que o utilizador original forneça as informações da compra original. Esta solução será a sua (utilizador) única e exclusiva solução para qualquer violação desta garantia limitada. As substituições e reparações de Produtos novos ao abrigo da garantia dispõem de uma nova garantia – conforme a que for mais extensa –, de noventa (90) dias ou do período da garantia original de um (1) ano. As substituições e reparações de Produtos recondicionados ao abrigo da garantia dispõem de uma nova garantia – conforme a que for mais extensa –, de quarenta e cinco (45) dias ou do período da garantia original de noventa (90) dias.

Limitação de Responsabilidade

EM NENHUM CASO A OURA, AS SUAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES, AGENTES, PARCEIROS E LICENCIANTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DE QUALQUER TIPO, SOB QUALQUER TEORIA LEGAL, DECORRENTES DE OU EM RELAÇÃO À SUA UTILIZAÇÃO, OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS SERVIÇOS OU QUALQUER CONTEÚDO ASSOCIADO AOS SERVIÇOS, OU OUTROS SITES OU QUAISQUER SERVIÇOS OU ITENS OBTIDOS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS, INCLUINDO QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRECTOS, DESPESAS, INCIDENTAIS, CONSEQUÊNCIAS OU PUNITIVOS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, LESÕES PESSOAIS, DOR E SOFRIMENTO, ANGSTIA EMOCIONAL, PERDA DE RECEITAS, PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIOS, ECONÓMICA ANTECIPADA, PERDA DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE UTILIZAÇÃO, PERDA DE GOODWILL, PERDA DE DADOS E SE CAUSADOS POR PRÉ-JUIZOS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), VIOLAÇÃO DE CONTRATO OU DE OUTRA FORMA, MESMO

QUE PREVISIVEL. ESTAS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES APLICAR-SE-ÃO INDEPENDENTEMENTE DO FACTO DE A OURA TER SIDO OU NÃO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

O ACIMA EXPOSTO NÃO AFETA QUALQUER RESPONSABILIDADE QUE NÃO POSSA SER EXCLUIDA OU LIMITADA AO ABRIGO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NA MEDIDA EM QUE A RESPONSABILIDADE NÃO PODE SER EXCLUIDA OU LIMITADA CONFORME ESTABELECIDO ACIMA, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A OURA SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER RECLAMAÇÃO, SEJA EM CONTRATO, PRÉ-JUIZO OU AO ABRIGO DE QUALQUER OUTRA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, QUE EXCEDA 100 EUR.

Termos de Utilização

A utilização dos Produtos e Serviços Oura está sujeita aos nossos Termos de Utilização, disponíveis em ouraring.com/terms-of-use/ e a Política de Privacidade, disponível em ouraring.com/privacy-policy/. As Isenções de Garantia e a Limitação de Responsabilidade acima definidas fazem parte dos nossos Termos de Utilização e estão sujeitas a alterações em caso de alterações dos nossos Termos de Utilização.

Direitos de propriedade intelectual

OURA, OURÁ e O são marcas registadas da Oura Health Oy. O Conteúdo Oura, os Produtos Oura, as Funcionalidades e Serviços Oura, e a tecnologia subjacente, estão protegidos por direitos de autor, marcas registadas, patentes e outras leis dos Estados Unidos e de países estrangeiros. Todos os direitos reservados. Fabricado por Oura Health Oy (Oura), Elektronikkatie 10, FI-00500 Oulu, Finlândia. Visite ouraring.com/intellectual-property-notice para consultar uma lista nomeada dos direitos de propriedade intelectual da Oura.

Italiano

Esclusione della garanzia

I SERVIZI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO CON TUTTI I DIFETTI" E "SECONDO DISPONIBILITÀ" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, OURA E LE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE, AFFILIATE, I SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, RAPPRESENTANTI, AGENTI, PARTNER E CONCESSORI DI LICENZA DECLINANO TUTTE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI RELATIVE AI SERVIZI, ESPLICITE O IMPLICITE CHE SIANO, E ESCLUDONO ESPlicitAMENTE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI TITOLARITÀ, COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, QUALITÀ SODDISFACENTE E NON VIOLAZIONE. OURA NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA IN CASO DI INTERFERENZE CON L'UTILIZZO DEI SERVIZI O DI DISPONIBILITÀ DEI CONTENUTI. INOLTRE NON GARANTISCE CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NEI SERVIZI SODDISFINO I REQUISITI DELL'UTENTE, CHE I SERVIZI SARANNO ESENTI DA VIRUS O ALTRI COMPONENTI DANNOSI, CHE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SARÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI, CHE I DIFETTI DEI SERVIZI SARANNO CORRETTI O CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NEI SERVIZI FUNZIONERANNO CON ALTRE APP MOBILI O ALTRO HARDWARE O ALL'INTERNO DI UN SISTEMA. NESSUNA INFORMAZIONE O CONSIGLIO IN FORMA ORALE O SCRITTA FORNITI DA OURA O DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI OURA COSTITUIRANNO UNA GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE O LIMITAZIONI SUI DIRITTI LEGALI VIGENTI DI UN CONSUMATORE, PERTANTO L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE VALIDA.

FATTO SALVO QUANTO SOPRA, OURA GARANTISCE ALL'ACQUIRENTE FINALE ORIGINALE CHE IL PRODOTTO È PRIVO DI DIFETTI DI MATERIALI E DI FABBRICAZIONE PER UN PERIODO DI UN (1) ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO E CHE I PRODOTTI RICONDIZIONATI SONO PRIVI DI DIFETTI DI MATERIALI E DI FABBRICAZIONE PER UN PERIODO DI NOVANTA (90)

GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO. Se la legge locale in vigore al momento dell'acquisto richiede un periodo di garanzia superiore a un (1) anno, tale garanzia sarà estesa nella misura richiesta da tale legge. Durante il periodo di garanzia, Oura riparerà o sostituirà a titolo gratuito eventuali componenti del Prodotto che non rientrano nella garanzia limitata in dotazione. L'utente sarà responsabile delle relative spese di trasporto. I prodotti sostituiti possono essere nuovi o ricondizionati a discrezione di Oura. La presente garanzia limitata non si applica a: (i) normale usura, inclusi graffi e ammaccature; (ii) parti di consumo incluse nel Prodotto, come batterie, a meno che il danno al prodotto non si sia verificato a causa di un difetto nei materiali o nella lavorazione; (iii) danni derivanti dal mancato utilizzo del Prodotto in conformità con le istruzioni allegate al Prodotto Oura o disponibili sul sito web; (iv) danni derivanti da incidenti, inondazioni, incendi, uso improprio o abuso; (v) danni derivanti dall'assistenza eseguita, o (vii) danni derivanti da manomissioni o alterazioni del Prodotto, da parte di soggetti non autorizzati da Oura; o (vi) utilizzo del Prodotto con qualsiasi altra applicazione o software diverso dall'ago mobile.

Oura si riserva il diritto esclusivo di riparare o sostituire il Prodotto, oppure di offrire un rimborso completo, o può richiedere all'utente finale di fornire le informazioni relative all'acquisto originale, a propria esclusiva discrezione. Tale rimedio sarà l'unico ed esclusivo rimedio per qualsiasi violazione della presente garanzia limitata. Le riparazioni e le sostituzioni in garanzia per i nuovi Prodotti sono coperte da una nuova garanzia, la cui durata è da considerarsi il periodo più lungo tra novanta (90) giorni o la parte residua della garanzia originale di un (1) anno. Le riparazioni e le sostituzioni in garanzia dei Prodotti ricondizionati sono coperte da una nuova garanzia pari al periodo più lungo tra quarantacinque (45) giorni e la parte residua della garanzia originale di novanta (90) giorni.

Limitazione di responsabilità

IN NESSUN CASO OURA, LE SUE CONTROLLATE E AFFILIATE, I SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, RAPPRESENTANTI, AGENTI, PARTNER E CONCESSORI DI LICENZA, SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DI QUALSIASI TIPO, SULLA BASE DI QUALSIASI TEORIA LEGALE, DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON L'UTILIZZO O L'INCAPACITÀ DELL'UTENTE DI UTILIZZARE I SERVIZI O QUALSIASI CONTENUTO ASSOCIATO AI SERVIZI, O ALTRI SITI O QUALSIASI SERVIZIO O ARTICOLO OTTENUTO TRAMITE I SERVIZI, COMPRESI QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE E, CONSEGUENZIALE O PUNITIVO, INCLUSI A TITOLO ESemplificATIVO, LESIONI PERSONALI, DOLORE E SOFFERENZA, STRESS EMOTIVO, PERDITA DI RICAVI, PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI AFFARI O RISPARMI ANTICIPATI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI, INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ, PERDITA DI UTILIZZO, PERDITA DI AVVIAMENTO, PERDITA DI DATI E SE CAUSATI DA ATTO ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA), VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRO, ANCHE SE PREVEDIBILI. QUESTE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI SARANNO APPLICATE INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE OURA SIA STATA AVVERTITA O MENO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

QUANTO SOPRA NON PREGIUDICA ALCUNA RESPONSABILITÀ CHE NON PUÒ ESSERE ESCLUSA O LIMITATA AI SENSI DELLA LEGGE VIGENTE. NELLA MISURA IN CUI LA RESPONSABILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA O LIMITATA COME DESCRITTO SOPRA, IN NESSUN CASO OURA SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI RECLAMO, SIA IN CONTRATTO, ILLECITO O IN BASE A QUALSIASI ALTRA TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SUPERIORE A 100 USD.

Condizioni d'uso

L'utilizzo dei prodotti e servizi di Oura è soggetto alle nostre Condizioni d'uso, consultabili all'indirizzo ouraring.com/terms-of-use/, e all'Informativa sulla privacy, consultabile all'indirizzo ouraring.com/privacy-policy/. L'esclusione della garanzia e la limitazione di responsabilità sopra stabilite provengono dalle nostre Condizioni d'uso e sono soggette a modifiche, in caso vengano modificate le Condizioni d'uso.

Diritti di proprietà intellettuale

OURA, OURA e O sono marchi registrati di Oura Health Oy. I Contenuti Oura, i Prodotti Oura, le Funzionalità e i Servizi Oura e la tecnologia sottostante sono protetti da copyright, marchi commerciali, brevetti e altre leggi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Tutti i diritti riservati. Prodotto da Oura Health Oy (Oura), Elektronikkaitte 10, FI-90590 Uula, Finlandia. Visita ouraring.com/intellectual-property-notice per un elenco dettagliato dei diritti di proprietà intellettuale di Oura.

Svenska

Garantifriskrivning

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS TILL DIG I BEFINTLIGT SKICK MED ALLA FEL OCH BRISTER* OCH ELLER TILL GÄBLIGT UTAN NÅGON FORM AV GARANTI. OURA OCH DESS DOTTERBOLAG, ANKNUTNA FÖRETAG, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER, PARTNER OCH LICENSIVÄRDE TILL NÅGON JURIDISK TEORI, SOM UPPTÄR UR ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT INNEHÅLL SOM ÄR KOPPLAT TILL TJÄNSTERNA, ELLER SÄDNA ANDRA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL, SOM ERHÅLLITS VIA TJÄNSTERNA, INKLUSIVE DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER TILLFÄLLIGA SKADESTÄND, FOLJ-D- ELLER STRAFFSKADESTÄND, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PERSONSKADA, SMÄRTA OCH LJUDANDE, KÄNSLOMÄSSIG NÖD, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV AFFÄRER ELLER FÖRVAJTANDE-BESPARINGAR, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, AFFÄRSFÖRBROT, FÖRLUST AV ANVÄNING, FÖRLUST AV GODVILL, FÖRLUST AV DATA OCH OAVSETT OM DET ORSAKAS AV OAKTSAMHET (INKLUSIVE FÖRSÄMLIGHET), KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAN, ÄVEN OM DET ÄR FÖRUTSÄGDBART. DESSA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT OM OURA HAR VARNATS FÖR MÖJLIGHETEN AV SÄDNA SKADOR.

DET FÖREGÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN UTE-SLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. I DEN UTSTRÄCKNING SOM ANSVAR INTE ÄR UTE-SLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT VAD SOM ANGES OVAN SKA OURA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGOT ANSPRÅK, VARE SIG I KONTRAKT, GENOM OAKTSAMHET ELLER ENLIGT NÅGON ANNAN TEORI OM ANSVAR, SOM ÖVERSTIGT 100 EURO.

KAKTAD DET FÖREGÅENDE SÅ GARANTERAR OURA DEN URSPRUNGLIGA SLUTANVÄNDAREN ATT PRODUKTEN ÄR FRI FRÅN DEFEKTER I MATERIAL OCH UTFÖRANDE UNDER ET (1) ÅR FRÅN INKÖPSDATUM OCH ATT RENOVERADE PRODUKTER ÄR FRIA FRÅN DEFEKTER I MATERIAL OCH HANTVERK I NITTIO (90) DAGAR FRÅN INKÖPSDATUM. Om din lokala lagstiftning som gäller vid tidpunkten för köpet kräver en garantiperiod som är längre än ett (1) år, förlängs denna garanti i den utsträckning som krävs enligt sådan lagstiftning. Under garantiperioden ska Oura utan kostnad för dig reparera eller byta ut alla produktkomponenter som går sönder inom ramen för den begränsade garantin. Du ansvarar för alla eventuella transportkostnader. Ersättningsprodukter kan vara nya eller renoverade enligt vad gottfinnande. Denna begränsade garanti gäller inte (i) normalt slitage, inklusive repor och buckor; (ii) förbrukningsdelar som ingår i produkten, såsom batterier, såvida inte produktskador har uppstått på grund av material- eller tillverkningsfel; (iii) skada till följd av att du inte använder produkten i enlighet med instruktionerna som följer med Oura-produkten eller återfinns på vår webbplats; (iv) skada till följd av olycka, översvämning, brand, felaktigt eller oriktigt användning; (v) skada till följd av utförd service eller skada till följd av manipulering eller ändringar av ringen av en person som inte är auktoriserad av Oura; eller (vi) användning av ringen med någon annan applikation eller programvara än Ouras mobilapp.

Oura förbehåller sig ensamrätten att, efter eget gottfinnande, reparera eller byta ut produkten, eller erbjuda full återbetaltning, och kan i detta syfte

kräva att den ursprungliga slutanvändaren tillhandahåller köphandling i original. En sådan åtgärd utgör din enda och exklusiva gottgörelse för eventuella överträdelser av denna begränsade garanti. Garantireparationer och ersättningar av nya produkter ger en ny garanti på nittio (90) dagar eller återstoden av den ursprungliga garantin på ett (1) år, beroende på vilket som är längst. Garantireparationer och ersättningar för renoverade produkter ger en ny garanti på fyrtiofem (45) dagar eller återstoden av den ursprungliga garantin på nittio (90) dagar, beroende på vilket som är längst.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER OURA, DESS DOTTERBOLAG, ANKNUTNA FÖRETAG, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER, AGENTER, PARTNERS OCH LICENSIVÄRDE ATT VARA ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, FÖGT NÅGON JURIDISK TEORI, SOM UPPTÄR UR ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT INNEHÅLL SOM ÄR KOPPLAT TILL TJÄNSTERNA, ELLER SÄDNA ANDRA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL, SOM ERHÅLLITS VIA TJÄNSTERNA, INKLUSIVE DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER TILLFÄLLIGA SKADESTÄND, FOLJ-D- ELLER STRAFFSKADESTÄND, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PERSONSKADA, SMÄRTA OCH LJUDANDE, KÄNSLOMÄSSIG NÖD, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV AFFÄRER ELLER FÖRVAJTANDE-BESPARINGAR, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, AFFÄRSFÖRBROT, FÖRLUST AV ANVÄNING, FÖRLUST AV GODVILL, FÖRLUST AV DATA OCH OAVSETT OM DET ORSAKAS AV OAKTSAMHET (INKLUSIVE FÖRSÄMLIGHET), KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAN, ÄVEN OM DET ÄR FÖRUTSÄGDBART. DESSA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT OM OURA HAR VARNATS FÖR MÖJLIGHETEN AV SÄDNA SKADOR.

DET FÖREGÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN UTE-SLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. I DEN UTSTRÄCKNING SOM ANSVAR INTE ÄR UTE-SLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT VAD SOM ANGES OVAN SKA OURA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGOT ANSPRÅK, VARE SIG I KONTRAKT, GENOM OAKTSAMHET ELLER ENLIGT NÅGON ANNAN TEORI OM ANSVAR, SOM ÖVERSTIGT 100 EURO.

Användarvillkor

Din användning av Ouras produkter och tjänster omfattas av våra användarvillkor som finns på ouraring.com/terms-of-use och vår integritetspolicy som finns på ouraring.com/privacy-policy. Garantifriskrivningen och ansvarsbegränsningen som anges ovan kommer från våra användarvillkor och kan komma att ändras om vi ändrar våra användarvillkor.

Immateriella rättigheter

OURA, OURA O O är varumärken som tillhör Oura Health Oy. Oura-innehåll, Oura-produkter, Oura-funktioner och -tjänster samt den underliggande tekniken skyddas av lagar om upphovsrätt, varumärken, patent och andra lagar i USA och andra länder. Med ensamrätt. Tillverkat av Oura Health Oy (Oura), Elektronikkaitte 10, FI-90590 Uleåborg, Finland. På ouraring.com/intellectual-property-notice finns en detaljerad lista över Ouras immateriella rättigheter.

Nederlands

Vrijwillig garantie

DE DIENSTEN WORDEN JE AANGEBODEN 'ZOAALS ZE ZIJN, MET ALLE FOUTEN' EN 'ZOAALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN' ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. EN OURA EN HAAR DOCHTER-ONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOOR-

DIGERS, TUSSENPERSONEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN AF, HETZUJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOP-BAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEVREIDENDE KWALITEIT EN NIET-INBREUK AF. OURA GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN HIERIN. DE JE GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE BESCHIKBAARHEID VAN INHOUD, DAT DE FUNCTIES IN DE DIENSTEN AAN JE EISEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE DIENSTEN VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN, DAT DE WERKING VAN DE DIENSTEN ONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT GEBREKEN IN DE DIENSTEN GECORRIGEREERD ZULLEN WORDEN, OF DAT DE FUNCTIES IN DE DIENSTEN ZULLEN FUNCTIONEREN MET ANDERE MOEBILE APPS OF HARDWARE, OF BINNEN EEN SYSTEEM. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR OURA OF EEN DOOR OURA GEMAKELIJKE VERTEGENWOORDIGER AAN EEN GARANTIE VOORMEN, IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN OP VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS.

NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE GARANDEERT OURA DE OORSPRONKELIJKE EINDGEBOUWEN DAT HET PRODUCT VRIJ IS VAN MATERIAAL- EN FABRICAGEFOUTEN GEDURENDE EEN (1) JAAR VANAF DE AANKOOPDATUM EN DAT GEREVISIEERDE PRODUCTEN VRIJ ZIJN VAN MATERIAAL- EN FABRICAGEFOUTEN GEDURENDE NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE AANKOOPDATUM. Als je lokale wetgeving die van kracht is op het moment van aankoop sen garantieperiode vereist die langer is dan één (1) jaar, wordt deze garantie verlengd voor zover vereist door deze wetgeving. Binnen de garantieperiode zal Oura alle onderdelen van het product die niet voldoen aan de beperkte garantie kosteloos voor je repareren of vervangen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele vervormingen. Vervangende producten kunnen naar ons eigen inzicht nieuw of gereviseerd zijn. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op (i) normale slijtage, met inbegrip van krassen en deuken; (ii) verbruiksartikelen in het product, zoals batterijen, tenzij de schade aan het product het gevolg is van een materiaal- of fabricagefout; (iii) schade die het gevolg is van het feit dat je het product niet gebruikt in overeenstemming met de instructies die bij het Oura-product zijn gevoegd of die beschikbaar zijn op de website; (iv) schade als gevolg van een ongeluk, overstroming, brand, verkeerd gebruik of misbruik; (v) schade als gevolg van onderhand of schade als gevolg van knoeien met of wijzigen van het product door iemand die niet door Oura is gemachtigd; of (vi) gebruik van het product met een andere toepassing of software dan de mobiele app.

Oura behoudt zich het exclusieve recht voor om het product naar eigen goeddunken te repareren of te vervangen of een volledige terugbetaling aan te bieden, en kan de oorspronkelijke eindgebruikers van de aankoopgegevens te overleggen. Een dergelijk rechtsmiddel is je enige en exclusieve rechtsmiddel voor een schending van deze beperkte garantie. Reparaties en vervangingen van nieuwe producten binnen de garantie hebben een nieuwe garantie van negentig (90) dagen of het restant van de oorspronkelijke garantie van één (1) jaar, afhankelijk van welke periode het langst is. Reparaties en vervangingen van gereviseerde producten binnen de garantie hebben een nieuwe garantie van vijfenveertig (45) dagen of het restant van de oorspronkelijke garantie van negentig (90) dagen, afhankelijk van welke periode het langst is.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL OURA, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, TUSSENPERSONEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN OORDEEL AARD DAN OOK, ONDER WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK, VOORTLOEIEND UIT

OF IN VERBAND MET JE GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE DIENSTEN OF ENIGE INHOUD IN VERBAND MET DE DIENSTEN, OF DERGELIJKE ANDERE SITES OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE DIENSTEN, MET INBEGRIIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BISTRAFFENDE SCHADEVERGOEDING, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PLUJN EN LUIJDEN, EMOTIONEEL LEED, INKOMSTEVERMINDERING, WINSTVERLIES, VERLIES VAN OMZET OF VERVAKTE BESPARINGEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WELWILLENDHEID, VERLIES VAN GEGEVENS, EN ONGEACHT OF DIT WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DIT TE VOORZIEN WAS. DEZE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF OURA GEWAARSCHUWD IS VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

HET VOORGAANDE HEFFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE ONDER HET TOEPASSING RECHT NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, VOOR ZOVER AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ZALS HERBOVEN UITEENGEZET, ZAL OURA IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, HETZUJ CONTRACTUEEL, DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ONDER ENIGE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VAN MEER DAN \$ 100.

Gebruiksvoorwaarden

Je gebruik van de producten en diensten van Oura is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op ouraring.com/terms-of-use/, en ons privacybeleid, beschikbaar op ouraring.com/privacy-policy/. De vrijwaring van garantie en de beperking van aansprakelijkheid die hierboven worden beschreven, komen uit onze gebruiksvoorwaarden en kunnen worden gewijzigd als we onze gebruiksvoorwaarden wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

OURA, OURA EN O ZIJN handelsmerken van Oura Health Oy. De inhoud van Oura, de producten van Oura, de functies en diensten van Oura en de onderliggende technologie worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Alle rechten voorbehouden. Geproduceerd voor Oura Health Oy (Oura), Elektronika-työryhmä, FI-105900 Oulu, Finland. Ga naar ouraring.com/ /intellectual-property-notitie voor een gedetailleerd overzicht van de intellectuele eigendomsrechten van Oura.

Norsk

Garantifraskrivelse

TJENESTENE LEVERES TIL DEG - SOM DE ER MED ALLE FEIL- OG -SOM TILJENGELIG - I TEN NOEN TID FOR GARANTI, OGSÅ OG DERES DAT TERSEL SKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, REPRESENTANTER, BETJENESTE, PARTNÆRE OG LISENSIVIVERE FRASKRIVER SEG MED DETTE ALLE GARANTIER OG VILSKÅR MED HENSYN TIL TJENESTENE, BÅDE EKSPLISSIT OG IMPLISIT, OG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig ALLE IMPLISIT GARANTIER OM RETTIGHETER, SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG OM AT DET IKKE HAR FOREKOMMET NOEN BRUDD PÅ TEN REGLER ELLER RETTIGHETER. OURA GARANTERER IKKE AT DET IKKE KAN FOREKOMME FORSTYRRELSER PÅ BRUKEN AV TJENESTENE, AT INNHOLDET ER TILJENGELIG, AT FUNKSJONENE I TJENESTENE OPPFYLLER KRAVENE DINE, AT TJENESTENE ER FRIE FOR VIRKEMISER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, AT DET IKKE VIL FOREKOMME FORSTYRRELSER ELLER BRUDD PÅ DRIFTEN AV TJENES-

TENE, AT FEIL I TJENESTENE VIL BLI KORRIGERT ELLER AT FUNKSJONENE I TJENESTENE VIL FUNGERE MED ANDRE MOBILAPPER ELLER PÅ ANNET UTFSTYR ELLER I ET SYSTEM. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD SOM GIVS AV OURA ELLER EN GODKJENT REPRESENTANT FOR OURA, SKAL UTFJØRE EN GARANTI. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV IMPLISITTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER PÅ GJELDENDE FORBRUKERRETTIGHETER, SÅ VENNLENE UNNTAK GJELDER KANSJE IKKE FOR DEG.

TIL TROSS FOR DET FOREGÅENDE GARANTIER OURA OVENFOR DEN OPPRINNELIGE SLUTTBRUKER, JØPEREN AT PRODUKTET ER FRITT FOR DEFEKTER I MATERIALE OG UTFØRELSE I ET (1) ÅR FRA KJØPSDATEN, OG AT FORNYEDE PRODUKTER ER FRIT FOR DEFEKTER I MATERIALE OG UTFØRELSE I NITTI (90) DAGER FRA KJØPSDATOEN. Hvis lokal lov som er gjeldende på kjøpstidspunktet, krever en garantiperiode på over ett (1) år, skal denne garantien utvides i den grad slik vil tilsi. I garantiperioden skal Oura reparere eller skifte ut alle produktkomponenter som svikter i løpet av den begrensede garantiperioden, uten kostnad for deg. Du er ansvarlig for alle relaterte kostnader for transport. Erstatningsproduktene kan være nye eller rennoverte, etter vårt skjønn. Denne begrensede garantien gjelder ikke for (i) normal slitasje, inkludert riper og bulker, (ii) forbruksdelar inkludert i produktet, som batterier, med mindre skaden på produktet har oppstått som følge av en material- eller konstruksjonsfeil, (iii) skader som oppstår fordi produktet ikke er brukt i henhold til instruksjonene som fulgte med Oura-produktet, eller som er tilgjengelige på nettstedet, (iv) skader som oppstår som følge av et uhell, oversvømmelse, brann, feil bruk eller misbruk, (v) skader som oppstår som følge av de utførte tjenestene, eller skade som oppstår som følge av ulydige endringer i bruket utført av enhver person som ikke er godkjent av Oura, eller (vi) bruk av produktet med et annet program eller en annen programvare enn mobilappen.

Oura beholder den eksklusive retten til å reparere eller erstatte produktet, eller tilby full refusjon, og kan kreve at den opprinnelige sluttbrukeren gir sin opprinnelige kjøpsinformasjon etter eget skjønn. Slik kompensasjon skal være den eneste kompensasjonen din for ethvert brudd på denne begrensede garantien. Garantiereparasjoner og erstatninger for nye produkter har en ny garanti som er den lengste av nitte (90) dager eller resten av den opprinnelige garantien på ett (1) år. Garantiereparasjoner og erstatninger for fornyede produkter har en ny garanti som er den lengste av firetten (45) dager eller resten av den opprinnelige garantien på nitte (90) dager.

Begrensning av ansvar

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL OURA ELLER DERES DATATERSELKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, REPARATØRER, FORHANDLERE, ENKELTE PARTNERER ELLER LISENSIVIVERE VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOE SLAG, UNDER NOE JURIDISK GRUNNLAG, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN DIN, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE TJENESTENE ELLER NOE INNHOLD FORBUNDET MED TJENESTENE, ELLER ANDRE SLIKE NETTSTEDER ELLER NOEN TJENESTER ELLER GJENSTANDER ANSKAFFET GJENNOM TJENESTENE, INKLUDERT NOEN FORMER FOR DIREKTE, INDIRIKTE, SPESELLE, TILFELDIGE SKADER, FØLGER, STRAFFERSTÅTNING, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, PERSONSKADER, SMERTE ELLER LIDELSE, EMOSJONELL UBEHAG, TAP AV INNTekt, TAP AV LØNNSOMHET, TAP AV FORRETNINGER ELLER FORVENTEDE BEPÅRELSER, TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT, TAP AV BRUK, TAP AV GODVILLT, TAP AV DATA OGSA UAVHENGIG AV OM DET FOREGÅENDE HAR OPPSTÅTT SOM FØLGE AV SKADEVOLDENDE HANDLINGER (OGSA UAKTOMHET), BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER PÅ ANDRE MÅTER, OGSA OM HENDSELN KUNNE FORUTSES, DISSE UNNTAKENE ELLER BEGRENSENINGENE GJELDER UAVHENGIG AV HVORUTVIKT OURA HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

DET FORTGÅENDE PÅVIRKER IKKE ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOV I DEN GRAD ANSVAR IKKE

KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES SOM FREMSATT OVENFOR, SKAL OURA IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KRAV, HVERKEN KONTRAKTSMESSIG, ERSTATNINGSMESSIG ELLER UNDER NOEN ANNET ANSVARSRUNNLAG, FOR MER ENN USD 100.

Bruksvilkår

Bruken din av Ouras produkter og tjenester er underlagt bruksvilkårene våre som du finner på [ouraring.com/terms-of-use](#), og personvernetilråingen vår som du finner på [ouraring.com/privacy-policy](#). Garantiattestskrivelse og begrensning av ansvar som fremsatt ovenfor, er hentet fra bruksvilkårene våre og kan derfor endres hvis vi foretar endringer i bruksvilkårene.

Immaterielle rettigheter

OURA, OURA OG Ø varemærker som tilhører Oura Health Oy. Oura-innhold, Oura-produkter, Oura-funksjoner og -tjenester og underliggende teknologi er beskyttet av lover om opphavsrett, varemærke- og patентовingning og andre lover i USA og andre land. Med enerett. Produsert for Oura Health Oy (Oura), Elektronikkaitia 10, FI-90590 Oulu, Finland. Du finner en komplett liste over Ouras immaterielle rettigheter på [ouraring.com/intellectual-property-note](#).

Čeština

Vyloučení odpovědnosti ze záruky

VÝJIMKOVĚ OMEZENÉ ZÁRUKY NA PRSTEN UVEDENÉ NÍŽ JSOU PRSTEN A SLUŽBY OURA POSKYTOVÁNÝ SPOLEČNOSTÍ OURA A JEJÍMI PŘÍDRŽNÍ PARTNERI, TAK, JAK JSOU: SPOLEČNOST OURA ANI JEJÍ PARTNERI, DODAVATELE NEBO PŘÍDRŽNÍ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ VÝSLOVNĚ ANI IMPLICITNÍ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY TYKAJÍCÍ SE FUNKCÍ ANI SLUŽEB OURA (VČETNĚ PRSTENŮ), JEJICH OBSAHU NEBO JAKÝCHKOLI INFORMACÍ ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PROSTŘEDNÍCTVÍM SLUŽEB OURA, KROMĚ TOHO SPOLEČNOST OURA A JEJÍ PARTNERI, DODAVATELE A PŘÍDRŽNÍ SPOLEČNOSTI VYLUCUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY TYKAJÍCÍ SE SLUŽEB SPOLEČNOSTI OURA (VČETNĚ PRSTENŮ), AT ŽE VÝSLOVNĚ, NEBO PŘEDPOKLÁDANĚ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDÁNÝCH

ZÁRUK PRODEJNOSTI, VLASTNICTVÍ, VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPOURÁDĚNÍ. POUŽITÍ NEBO POUŽITÍ SPOLEČNOSTI OURA DĚLE NEURČUJÍ ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI OURA BUDE NEPŘERŮVANĚ, DOSTUPNĚ KDYKOLI NEBO Z JAKĚKOLIV KONKRÉTNÍHO MÍSTĚ, BEZPEČNĚ NEBO BEZCHYBNĚ, ZEBUDOU ODSTRANĚNY ZÁVADY, ŽE SLUŽBY SPOLEČNOSTI OURA (VČETNĚ PRSTENŮ) NEOBSAHUJÍ VIRY ANI JINÉ POTENCIÁLNĚ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY ANI ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ VE SLUŽBÁCH BUDOU FUNKOVAT S JINÝMI MOBILNÍMI APLIKACEM NEBO HARDWAREM NEBO V RÁMCI SYSTÉMU. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNĚ INFORMACE NEBO RÁDY POSKYTNUTE SPOLEČNOSTÍ OURA NEBO JEJÍMI AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI NEZAKLÁDÁJÍ NÁROK NA ZÁRUKU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH NEMUSÍ PLATNĚ PRÁVNÍ PŘEDPISY NĚKTERÁ VÝŠE POPSANÁ OMEZENÍ UMOŽNOVAT; V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE TATO OMEZENÍ UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ TYTO PLATNĚ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽNŮJÍ.

BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ SPOLEČNOST OURA POSKYTUNE PŮVODNÍMI KUPJÍVČÍMI KONCOVĚMÍ UŽIVATELI ZÁRUKU, ŽE JE PRODUKT BEZ VAD MATERIÁLU A ZPRACOVÁNÍ PO DOBU JEDNOHO (1) ROKU OD DATA NÁKUPU A REPARASOVÁNĚ PRODUKTŮ JSOU BEZ VAD MATERIÁLU A ZPRACOVÁNÍ PO DOBU DEVADESÁTI (90) DNŮ OD DATA NÁKUPU. Pokud místní zákony platné v době nákupu vyžadují záruční dobu delší než jeden (1) rok, produkteur se tato záruka v rozsahu požadovaném těmito zákony. Během zrušení doby vání společnosti Oura bezplatně opraví nebo vymění všechny vadné komponenty produktu, na které se vztahuje omezená záruka. Veškeré související náklady za dopravu nesete vy. Nahrazení produkty mohou být podle našeho uvážení nové nebo reparaované. Tato

omezená záruka se nevztahuje na I) běžné opotřebení, včetně škrábanců a promačkaní; II) spotřební díly, které jsou součástí produktu, jako jsou baterie, pokud k poškození produktu nedošlo v důsledku vady materiálu nebo zpracování; III) poškození vzniklé v důsledku toho, že jste produkt nepoužívali v souladu s pokyny přiloženými k produktu. Oura nebo dostupnými na našich webových stránkách; IV) poškození vzniklé v důsledku nehody, povodně, požáru, nesprávného použití nebo zneužití; V) poškození vzniklé v důsledku servisu provedeného nebo poškození vzniklé v důsledku zásahu nebo úprav produktu provedených někým, kdo k tomu nebyl společností Oura oprávněn; nebo VI) použití produktu s jakoukoli jinou aplikací nebo softwarem, než je mobilní aplikace společnosti Oura.

Společnost Oura si vyhrazuje výhradní právo produkt opravit nebo vyměnit nebo vrátit peníze ve plné výši a může dle vlastního uvážení požadovat od původního konečného uživatele poskytnutí informací o jeho původním nákupu. Taková náprava je jedním a výhradním opravným prostředkem v případě porušení této omezené záruky. Na záruční opravy a výměny nových produktů se vztahuje nová záruka, která je devadesát (90) dnů nebo zbytek původní jednolété (1) záruky, podle toho, která z nich je delší. Na záruční opravy a výměny repasovaných produktů se vztahuje nová záruka, která je čtyřicet pět (45) dnů nebo zbytek původní devadesátidenní (90) záruky, podle toho, která z nich je delší.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST OURA ANI ŽÁDNÉ JEJÍ PŘÍRŮČENÉ CI DEČERNÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUČÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, AGENTI, PARTNERI A POSKYTOVATELE LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA SKODY JAKÉKOLIV DRUHU NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI PRÁVNÍ TEORIE, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY NEBO JAKÝKOLI OBSAH SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI NEBO VE SPOJENÍ S NIMI, NEBO JAKÉKOLI JINÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY CI POLOŽKY ZISKANÉ PROSTŘEDNÍM VYUŽITÍM, VČETNĚ JAKÝKOLI VÍ PRŮCHYD, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO SANKČNÍCH SKOD, UTRPENÍ, JINÉ VČETNĚ ÚJMY NA ZDRAVÍ, BOLESTI A MÍRNO, CITOVÉHO STRAŠDÁNÍ, ZTRÁTY PŘÍJMU, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ NEBO OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTY OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍTÍ, ZTRÁTY DOBRÉ PŮVĚSTI, ZTRÁTY DAT, AT UŽ BYLY ZPŮSOBENY PRÁVNÍM DELIKTEM (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍM SMLOUVY, NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLY PŘEDVÍDANÉ. TATO VYHLÁŠENÍ NEBO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST OURA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH SKOD UPOZORNĚNA.

VŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ NEMÁ VLIV NA ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, V ROZSAHU, V JAKÉM NELZE ODPOVĚDNOST VYLOUČIT NEBO OMEZIT, JAK JE UVEDENO VĚŠE, NESE SPOLEČNOST OURA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, AT UŽ SMLOUVNÍ, MIMOSMLUVNÍ, NEBO NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ PŘESÁHOU ČÁSTKU 100 USD.

Podmínky používání

Používání produktu a služeb společnosti Oura podléhá našim podmínkám používání, které jsou dostupné na adrese ouraring.com/terms-of-use, a zásadám ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na adrese ouraring.com/privacy-policy. Vyloučení odpovědnosti ze záruky a omezení odpovědnosti stanovené výše jsou převzaty z našich podmínek používání a v případě změny těchto podmínek používání se mohou změnit.

Práva duševního vlastnictví

OURA, OURA a O jsou ochranné známky společnosti Oura Health Oy. Obsh, produkty, funkce a služby společnosti Oura a související technologie

jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty a dalšími zákony Spojených států a dalších zemí. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno pro: Oura Health Oy (Oura), Elektronikatie 10, FI-90590 Oulu, Finsko. Podrobný seznam práv duševního vlastnictví společnosti Oura najdete na adrese ouraring.com/intellectual-property-notice.

Polski

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

USLUGI SA ŚWIADCZONE UŻYTKOWNIKOWI „W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ ZADANYCH GWARANCJI, A CZŁONKOWI I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ, PODMIOTY STOWARYSZCZONE, FIRMORUNKIE KADRY KIEROWNICZE, I DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELI, AGENCI, PARTNERZY LICENCJOWI JAKOBY NINIEJSZYM WYRAŻENIEM WOLNYCH GWARANCJI I WARUNKIŃ DOTYCZĄCE USŁUG, WYRAŻENIE LUB DORÓZUMIANIE, ORAZ WYRAŻNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE DORÓZUMIANIE GWARANCJE TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA OURA NIE GWARANTUJE BRAKU ZAKŁÓCEN W KORZYSTANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG, DOSTĘPNOŚCI TREŚCI, TEGO ŻE FUNKCJE ZAWARTÉ W USŁUGACH SPENIAJA WYŁĄCZAJĄCY TYTUŁOWNIK, ŻE USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW ALBO INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, ŻE DZIAŁANIE USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE ALBO WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY DOTYCZĄCE USŁUG ZOSTANĄ NAPRAWIONE ANI ŻE FUNKCJE ZAWARTÉ W USŁUGACH BĘDĄ DZIAŁAŁY Z INNYMI APLIKACJAMI MOBILNYMI ALBO SPRZĘTEM, ALBO W OBRĘBIE SYSTEMU. ŻADNA USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA ANI PORADA UDZIELONA PRZEZ FIRME OURA ALBO JEJ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI GWARANCJI. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DORÓZUMIANYCH GWARANCJI ALBO OGRANICZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU DANEGO UŻYTKOWNIKA.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, FIRMA OURA GWARANTUJE PIERWOTNEMU NABYWCY BĘDĄCEMU UŻYTKOWNIKIEM KONCYM, ŻE PRODUKT JEZT WOLNY OD WAD MATERIALOWYCH I WAD WYKONANIA PRZEZ OKRES JEDNEGO (1) ROKU OD DATY ZAKUPIU, A PRODUKTY ODNOWIONE SA WOLNE OD WAD MATERIALOWYCH I WAD WYKONANIA PRZEZ OKRES DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY ZAKUPIU. Jeżeli przepisy prawa miejscowego w momencie zakupu wymagają okresu gwarancyjnego dłuższego niż jeden (1) rok, gwarancja ta wlegała przedłużeniu w zakresie wyznaczonym przez wspomniane przepisy prawa. W okresie gwarancyjnym firma Oura będzie naprawiała albo wymieniała bezpłatnie wszelkie elementy Produktu, które nie spełniają wymogów udzielonej ograniczonej gwarancji. Użytkownik ponosi wszelkie powłazne opłaty przewozowe. Produkty zastępcze mogą być nowe albo odnowione wedle naszego uznania. Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania w przypadku (i) normalnego zużycia, w tym zadirania i wgniećce; (ii) części eksploatacyjnych zawartych w Produkcie, takich jak baterie, chyba że uszkodzenie produktu nastąpiło z powodu wady materiałowej albo produkcyjnej; (iii) uszkodzeń wynikających z niezubrania Produktu zgodnie z instrukcjami dołączonymi do produktu Oura albo dostępnymi w witrynie internetowej; (iv) uszkodzenia wynikającego z wypadku, powodzi, pożaru, niewłaściwego użycia albo nadużycia; (v) uszkodzenia wynikającego z wykonywanego serwisu albo uszkodzenia wynikającego z manipulacji bądź modyfikacji Produktu przez osobę nieupoważnioną przez Oura; albo (vi) korzystania z Produktu wraz z jakąkolwiek inną aplikacją albo innym oprogramowaniem niż Aplikacja mobilna.

Firma Oura zastrzega sobie wyłączenie prawa do naprawy lub wymiany Produktu lub zaoferowanie pełnego zwrotu pieniędzy i może według własnego uznania zażądać od pierwotnego użytkownika końcowego podania informacji o oryginalnym zakupie. Tego rodzaju środek zaradczy

będzie jednym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku wszelkich naruszeń niniejszej ograniczonej gwarancji. Naprawy i wymiany nowych Produktów w ramach gwarancji są objęte nową gwarancją, która obejmuje dziesięćdziesiąt (90) dni albo czas pozostały do końca oryginalnej rocznej (trwającej 1 rok) gwarancji, w zależności od tego, która okres jest dłuższy. Naprawy gwarancyjne i wymiany odnowionych Produktów są objęte nową gwarancją, która obejmuje czterdzieści pięć (45) dni albo czas pozostały do końca oryginalnej rocznej (trwającej 90 dni) gwarancji, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA OURA, JEJ PODMIOTY ZALÉZNE, PODMIOTY STOWARZYSZONE, CZŁONKOWIE ORGANÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDU PRACOWNICY, PRZEDSIĘBIEMIELE, PEŁNOMOCNICZY, PARTNERZY I LICENCJOWYCNIE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, NA PODSTAWIE JAKIEJ, JAKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ALBO WYPAJĄCE Z KORZYSTANIEM ALBO NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA I USŁUG BIAZĄDE JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI, INNYMI WYTRZYMANI ALBO USŁUGAMI LUB PRZEDMIOTAMI UŻYTKANYMI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, WYJEMNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE ALBO RETORWYNE, W TYM W MIEDZY INNYMI OBRAZENA CIAŁA, BÓL I CIĘŻKIERPIENIE, CIĘPIENIE EMOCJONALNE, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI ALBO PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ DANYCH, NIEZALÉZNIÉ OD TEGO, CZY SĄ SPOWODOWANE CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEBANIEM), NARUSZENIEM UMOWY CZY W INNY SPOŚÓB, NAWET JEŚLI SĄ MOŻLIWE DO PRZEWIÉZENIA, WSPOMNIANE WYŁĄCZENIA ALBO OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ NIEZALÉZNIÉ OD TEGO, CZY FIRMA OURA ZOSTAŁA OSTRZEŻONA O EWENTUALNOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. W ZAKRESIE, W JAKIM ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA, JAK OKREŚLONO POWYŻEJ, FIRMA OURA W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, UMÓWNE, DELIKTOWE ANI WYNIKAJĄCE Z JAKIEJ, JAKOLWIEK INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRZEKRACZAJĄCE WARTOŚĆ 100 USD.

Warunki użytkowania

Sposób korzystania z danej użytkownika z produktów i usług OURA podlega Warunkom użytkowania dostępnym pod adresem ouraring.com/terms-of-use oraz Polityce prywatności dostępnej pod adresem ouraring.com/privacy-policy. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz Ograniczenie odpowiedzialności określone powyżej są częścią naszych Warunków użytkowania i ulegają zmianie w przypadku zmiany naszych Warunków użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

OURA, OURA I O to znaki towarowe Oura Health Oy. Treści Oura, Produkty Oura, Funkcje i Usługi Oura oraz ich podstawowe technologie są chronione prawem autorskimi, znakami towarowymi, patentami i innymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano dla Oura Health Oy (Oura), Elektronikkatie 10, FI-90590 Oulu, Finlandia. Szczegółowa lista praw własności intelektualnej Oura znajduje się pod adresem ouraring.com/intellectual-property-notice.

Ελληνικά

Αποποίηση ευθύνης

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΞΑΣ -ΟΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΟΡΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ- ΚΑΙ ΑΝ-ΟΠΙΣ ΔΙΑΠΕΡΙΘΑΝΤΑΙ- ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗ-ΠΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ Η ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΑΜΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΕΚ-ΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΤΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΟΣ ΟΠΙΟΔΕΙΧΝΕΙ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥ-ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΝΟΝ-ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Η ΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΡΧΑΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΑΒΕΒΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΕΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΗΤΩΣ ΣΑΣ ΑΛΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΞΑΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗ-ΡΕΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΙΑ ΙΝ ΑΛΛΑΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΕΛΙΠΤΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΙΞΑΡΟ-ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΤΕΜΕΣ, ΥΛΙΚΑ Η ΨΥΧΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕΣ Η ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΣ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΑ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΤΡΟΣΟΠΟ ΤΗΣ ΟΥΡΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΕΓΓΥΗΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΠΙΞΑΡΟΝ ΕΓΓΥ-ΣΕΩΝ Η ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΧΟΥΝΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΕΠΙΜΟΝΕΣ Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ.

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΑΣΙΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΟΥΡΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΙΩΡΑΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΤΗ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΚΤΕΥΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΝΗΝΔΕΚΑ (90) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ. ΕΓΓΥ ΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΙΜΥΗ ΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΒΑ ΠΑΡΑ-ΤΟΙΟΝ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΟΥ ΜΟΡΦΟΣΙΑ. Η ΟΥΡΑ ΒΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΘΕΙ ΤΗ ΒΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΙΣΗ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΠΟΙΟΔΕΠΟΤΗ ΕΞΕΤΑΤΗ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΤΟΥΣ ΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΦΕΡΕΤΕ ΕΝΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΧΡΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΕΚΔΟΥ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΣ ΕΥΘΥ-ΡΕΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΤΑΙ ΓΙΑ (i) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΑΜΒΟΝΙΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΡΑΥΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΜΑΤΩΝ, (ii) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΝ (9) ΗΜΕΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΥΛΙΚΟΥ Η ΚΑΤΑΣΧΕΥΣΗ, (iii) ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΟΝΟΒΟΥΘΕΙ ΤΩ ΠΡΟΪΟΝ ΟΥΡΑ Η ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΕΥΣΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΛΙΒΑ, (iv) ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΧΙΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΚΑΚΟΜΕ ΤΕΥΧΕΡΙΑ, (v) ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΤΡΑΧΗΣ Η ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΕΠΟΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΑ Η (vi) ΧΡΗΣΗ ΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΕΠΟΤΗ ΑΛΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΤΕΜΕΣ.

Η ΟΥΡΑ ΔΙΑΤΡΕΠΕ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΘΕΙ Η ΒΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΒΑ ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΒΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑ ΠΑΡΟΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΤΟ ΕΝ ΟΥΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΒΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΟΚΙΒΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΒΑ ΟΠΟΙΟΔΕΠΟΤΗ ΒΑ ΟΠΟΙΟΔΕΠΟΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΒΑΘΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ

véa εγγύηση, η οποία διαρκεί είτε ενενήντα (90) ημέρες είτε για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ενός (1) έτους, ανάλογα με το ποια από τις δύο περιόδους είναι μεγαλύτερη. Οι επισκευές και οι αντικαταστάσεις βάσει εγγύησης για τα ανακατασκευασμένα Προϊόντα καλύπτονται από νέα εγγύηση, η οποία διαρκεί είτε οσάρανή πέντε (45) ημέρες είτε για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης: ενενήντα (90) ημερών, ανάλογα με το ποια από τις δύο περιόδους είναι μεγαλύτερη.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η OURA, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΣΥΜΦΕΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΙ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΝΕΛΕΡΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΕΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΤΗΝ ΔΑΔΥΜΑΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝΤΕ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΑΛΛΟΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΗΚΟΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΖΗΜΙΩΝ ΤΙΜΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΟΠΩΣ ΣΙΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΟΡΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΑΦΥΡΟΝΤΙΑ ΕΣΩΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΡΟΝ ΚΕΡΑΩΣ, ΑΠΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗΣ, ΑΠΟΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ, ΑΠΟΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΗΛΩΝ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΙΤΕ ΑΣΕΤΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΕΙΣΕΙΣ Η ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΑ ΞΕΝΟΥΝ ΑΝΕΛΕΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η OURA ΕΧΗ ΕΜΠΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΠΙΡΡΕΑΖΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΦΕΡΕΙΤΗ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΦΕΡΕΙΤΗ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΕΠΙ ΟΡΟΙΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η OURA ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΙΣΤΑΝ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 100 ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΗΓΙΑ.

Όροι χρήσης

Η χρήση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Oura υπόκειται στους Όρους χρήσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα ouraring.com/terms-of-use/, και στην Πολιτική απορρίπρω, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ouraring.com/privacy-policy/. Η Αποποίηση ευθύνης και οι Περιορισμοί ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω προέρχονται από τους Όρους χρήσης μας και υπόκεινται σε αλλαγές σε περίπτωση αλλαγής των Όρων χρήσης μας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι ονομασίες OURA, OURA και οι είναι εμπορικά σήματα της Oura Health Oy. Το περιεχόμενο, τα προϊόντα, οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες της Oura, καθώς και η υποκειμένη τεχνολογία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και άλλους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος, κατασκευάζεται για την Oura Health Oy (Oura, Elektronikkiteollisuus 10, FI-90590 Oulu, Finlandia). Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ouraring.com/intellectual-property-notice/ (ονόμαυς σε αγγλικά) για μια αναλυτική λίστα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Oura.

日本語

保証に関する免責事項

サービスは、「現状のまゝ」利用可能な状態で、いかなる種類の保証も不提供されるものであり、OURA、その子会社、関連会社、役員、従業員、代表者、代理人、パートナー、ライセンス契約者は、明示または黙示を問わず、本サービスに関するすべての保証および条件を否認し、権利、利益、特定目的への適合性、満足度の高い品質、非侵害に関するあらゆる黙示的な保証を明示的に否認します。OURAは、当社のサービスの利用が中断されないこと、コンテンツの利用可能性、サービスに含まれる機能がユーザーの要件に適合すること、サービスはウイルスやその他の有害な構成物がないこと、サービスは中断やエラーで実行されず、またサービスは欠陥で修正されず、サービスに含まれる機能が、他のモバイルアプリやハードウェア、またはコンピュータ上で機能することを保証しません。OURAまたはOURAが承認する代表者による口頭、または文書による情報や助言は、保証を作り出すものではありません。一部の法域では、新製品の除外または消費者に適用される法的権利の制限が認められていないため、上記の除外が適用されない場合があります。

上述の内訳にかかわらず、OURAは、新しい製品を購入した日のユーザーに対して購入日から1年間、ならびに再生品については購入日から90日間、製品の素材および製造上の欠陥がないことを保証します。購入時に有効な地域で法律で年を超える保証期間が要求される場合、本保証はその法律で要求される範囲内で取除されるものとします。保証期間中に、OURAは提供された特定の製品に欠陥した製品の部品をお客様に無料で修理または交換する場合があります。関連する送料や手数料が負担されるものとして、交換品は、当社の判断により新品または再生品となる場合があります。この限定保証は、(i)傷やへこみを含む通常の損傷、(ii)素材や製造上の欠陥により製品に損傷が生じた場合を除き、バッテリーなど製品に含まれる消耗部品、(iii)お客様がOURA製品に添付された説明書または当社のウェブサイトで入手可能な説明書に従って製品を使用しなかったことに起因する損傷、(iv)事故、洪水、火災、誤用、乱用、起因する損傷、(v)OURAの承認を受けていない人が行ったサービス、または製品が改ざんや変更で起因する損傷、(vi)OURAのモバイルアプリ以外のアプリやソフトウェアやハードウェアで製品を使用した場合に起因する損傷には適用されません。

OURAは、製品の修理または交換、もしくは金銭返還の提供に関する独自の権利を留保し、独自の裁量により、元のユーザーに対して購入情報の提供を求める場合があります。このような救済措置は、本限定保証の不履行に対するお客様の唯一かつ排他的な救済措置とします。新しい製品の到着に、保証修理および交換品には、90日または当初の1年間の保証期間の残りの期間よりも長い交換品の新しい保証が適用されます。再品について、保証修理後および交換品には、45日または当初の90日の保証期間の残りの期間のいずれか長い方の新しい保証が適用されます。

責任の制限

いかなる場合においても、OURA、その子会社、その関連会社、役員、取締役、従業員、代表者、代理人、ライセンス契約者は、本サービス、本サービスに関連するコンテンツ、その他のサイト、または本サービスを通じて取得したサービスもしくはアプリの損傷、または使用できないことに起因し、または関連して生じた、人身傷害、苦痛、精神的な苦痛、収益の損失、事業または事業または事業の損失、事業法権の喪失、データ侵害、不法行為(過失を含む)、契約的過失、これらによるものであるかどうかを問わず、たとえ予見可能であったとしても、これらに限定されないものを言明し、あらゆる種類のあらゆる法理に基づき、直接的、間接的、特別、付随的、派生的、懲罰的の損害を含みます。これらに限定されない損害に対する責任を負いません。これらの除外あるいは制限は、OURAがこのような損害の可能性について知られていなかったにもかかわらず適用されます。

上記の内訳は、適用される法律に基づいて除外または制限できない責任に影響を及ぼすものではありません。また、これは除外または制限に及ぼす影響において、契約、不法行為、またはその他の責任制限に基づき、これを問わず、いかなる場合も\$100を超える請求に対してOURAは責任を負わないものとします。

이용약관

お客様によるOura製品およびサービスのご利用には、ouraring.com/terms-of-use(以下「規約」として掲載されています)、「利用規約」および ouraring.com/privacy-policy(以下「プライバシーポリシー」)が適用されます。上記の「保証に関する免責事項」および「責任の制限」は、当社の利用規約に基づくものであり、当社が利用規約を変更した場合には、これらが変更されたことがあります。

知的財産権

OURA, OURA, OIはOura Health Oyの商標です。Ouraのコンテンツ、Oura製品群、OURAの機能およびサービス、その複雑な技術は特許米国およびその他の国の著作権、商標、特許、およびその他の法律により保護されています。All rights reserved. (すべての権利を留保します) 製造: Oura Health Oy (Oura, Elektronikkatie 10, FI-00500 Oulu, Finland.OURAの知的財産権に関する明細は、ouraring.com/intellectual-property-noticeにて確認いただけます。

한국어

보증 면책 고지

당사에서 고객에게 제공하는 서비스는 “모든 면책을 포함해 있는 그대로.” “가용 여부”에 따라) 어떤 형태의 보증도 없이 제공되며 OURA와 그 지사, 대리사, 임차인, 직원, 대표, 대행인, 협력사 및 라이선스 하위자는 명시적이든 묵시적이든 서비스와 관련한 모든 보증과 책임을 부인하며 오로지, 본질적 정확성, 특정 용도에 대한 적합성, 안전성 또는 품질 및 최종 사용자에 대한 법적 보증만을 부담합니다. OURA는 고가의 자질 없이도 서비스 범용성, 비전문가 사용, 서비스에 포함될 가능성이 고액으로 사물에 부응할 것이라는 사실, 서비스가 비싸다는 이유 이외에 다른 구성 요소가 없다는 점, 서비스 용량이 중단되거나 오작할 않을 것이라 믿지, 서비스에 대한 결함은 수정할 것이라는 점, 서비스가 포함될 가능성이 여타 모바일 앱이나 하드웨어에서도 모든 시점 내에서 작동할 것이라는 점 등을 보증하지 않습니다. OURA 또는 OURA 공인 대리인이 제공하는 구두 또는 서면 정보 또는 조언은 어떠한 보증도 구성하지 않습니다. 일부 관찰 지점에서 묵시적 보증은 제조 또는 소비자의 법적 권리 제한이 허용되지 않으므로 위의 제외 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

앞서 언급한 내용에도 불구하고, OURA는 최초 최종 사용자 구매자에게 제품 구매로부터 1년 동안 소재 및 공정의 결함이 보증 없이 발생하면, 리퍼비시 제품 또는 구매로부터 90일 동안 소재 및 공정의 결함이 보증 없이 발생합니다. 구매 당시 고가의 가치지 받음에 따라 (iv) 이 이상의 보증이 필요할 경우 모든 보증은 해당되는 범위에서 유예되는 만큼 제공됩니다. 보증 기간 동안 OURA는 제품된 제 품에 대해 어떠한 보증이 있는 제품의 각종 구성품들 모두를 수리 또는 교체해 주겠습니다. 관련 문헌에는 고체 부위입니다. 고체 제품은 당사의 판매로 따라 세 제품 또는 리퍼비시 제품일 수 있습니다. 본 제 품은 보증 (단위 포함) 및 일부 일반적인 사용에 따른 마모 (v) 배터리와 같이 제품이 포함된 소모성 부품 (단, 소비자 안전상의 결함에 의해 제품 수리 및 교환되는 경우는 예외), (vi) 고가 OURA 제품이 동봉된 지갑이나 케이스와도 관련된 자질품들이 없이 발생 한 (vii), (viii) 고, 중, 수, 화재, 감염 등으로 인한 제품 피해, (ix) OURA에 상인하인 및 (x) 사람이 의한 한, 또는 제품의 조치가 개조로 인해 발생한 피해, (vi) 모바일 앱이 있거나, 또는 애플리케이션이나 소프트웨어에서 제품을 사용 करने에는 적절하지 않습니다.

Oura는 제품을 수리 또는 교체하기 전에 결함을 제공할 수 있는 물질적 결함을 보증하며, 자체적으로 판단한 최초 최종 사용자에게 제공 구매 지점의 제품을 고액으로 구할 수 있습니다. 이러한 조치는 본 제 품을 위반에 대한 고가의 유입과 고 배터리를 구입 수리합니다. 신규 제품에 대한 보증 수리 및 교체 시에는 90일 또는 기존 1년 보증의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 기준으로 보증이 적용됩니다. 리퍼비시 제품에 대한 보증 수리 및 교체는 45일 또는 원래 90일 보증 기간 중 더 긴 기간인 새로운 보증이 적용됩니다.

책임 제한

이유 여하를 묻지 않고, OURA와 그 지사, 대리사, 임차인, 직원, 대표, 대행인, 협력사 및 라이선스 하위자는 어떤 방식이든 라이선스 하위자는 명시적이든 묵시적이든 서비스와 관련한 콘텐츠, 본 서비스를 통해 획득되거나 이 서비스 또는 기타 서비스나 물품의 사용 또는 사용 불가능로 인해, 또는 그와 관련해 발생하는 각종 피해에 대

해 아무런 책임을 지지 않습니다. 여기에는 각종 직간접적, 특수, 우발적, 결과적, 징벌적 피해를 포함하며 상해, 고액, 징징징, 수익 상실, 시용 손실, 비즈니스 또는 예상 점진적 손실, 비즈니스 기회 상실, 시용 손실, 시용 손실, 영업권 상실, 데이터 손실 등을 포함하고 이에 국한하지 않습니다. 이는 그러한 피해를 범 범 영위(타당 불응), 계약 위반 또는 여타 유사한 관건에 기인한 피해가 아니라 고가이며, 그러한 피해를 예측할 수 없었다고 미관가지 않습니다. 이와 같은 문제와 시용 또는 제 3자인 OURA가 이러한 피해가 발생할 가능성이 높고 관련된 지사나 여타 관계에 적용됩니다.

앞서 언급한 내용은 관련 법률에 따라 제외하거나 제한할 수 있는 각종 책임에 대한 정보를 미치지 않습니다. 위와 유사한 고가 책임은 제외하거나 제한할 수 없으며, OURA는 계약상 의무의 분별 행위에 기인한 것이지, 여타 모든 책임 이외에 다른 것인 어떠한 청구에 대해서도 \$100를 초과하여 책임을 지지 않습니다.

이용약관

고개의 OURA 제품 사용과 서비스 이용은 당사 이용약관(ouraring.com/terms-of-use) 및 개인정보처리방침(ouraring.com/privacy-policy)을 따릅니다. 위와 명시한 보증 면책 고지와 책임 제한은 당사 이용약관에 포함되어 있습니다. 이용약관이 변경될 경우 해당 내용이 변경될 수 있습니다.

지식재산권

OURA, OURA 및 OI는 OURA의 등록상표입니다. OURA 콘텐츠, OURA 제품, OURA 기능 및 서비스와 기타 기술은 미국 및 다른 국가의 저작권, 등록상표, 특허 및 기타 형태의 보호를 받습니다. All rights reserved(모든 권리 보유). OURA Health Oy(OURA)는 Elektronikkatie 10, FI-00500 Oulu, Finland를 위해 제조되었습니다. OURA 지식재산권에 대한 자세한 목록은 ouraring.com/intellectual-property-notice를 방문하여 확인하세요.

中文

保修免责声明

我们按“原样(包括所有瑕疵)”和“可用状态”向您提供服务, 不附带任何形式的保证。OURA及其子公司、美联公司、管理人员、董事、雇员、代表、合作伙伴及许可方对此声明, 不承担与相关的任何明示或暗示的保证或条件, 并明确否认所有权利、适销性、特定用途适用性、令人满意的品质及无侵权行为等方面履行任何暗示保证。OURA不保证: 服务体验不如以往; 内容数据方面; 服务中包含的功能无法正常启动; 服务内容与内容不存在病毒或其他有害成分; 服务运行不会中断且无错误; 服务中的缺陷会遭到修复; 服务中包含的功能与其他移动应用、硬件或系统兼容。OURA或其授权代表提供的任何口头或书面信息或建议, 均不产生保证效力。某些司法管辖区不允许完全否认暗示保证, 亦不允许限制消除消费者使用的法定权利, 因此上述免责声明不适用于这些地区可能不适用。

尽管有前述规定, OURA将向原始终端用户购买者保证, 产品自购买之日起(1)年, 或 OURA 工艺缺陷, 翻新产品或材料的使用寿命为(90)天, 或 天内材料和工艺缺陷。如果购买时有有效的当地法律法规规定保修期超过一年, 那么本保修承诺将按法律要求有效。保修期内, OURA 将按保修承诺或在有限保修期间出现故障的任何产品自行、相关运输费用由用户自行承担。更换产品可为全新或翻新产品, 由 OURA 自行决定。本保修不适用于以下各项: (i) 正常磨损(包括刮痕和凹痕); (ii) 产品中易耗部件(如电池), 仅在原材料或工艺缺陷造成产品损坏时适用有限保证; (iii) 因未依照 OURA 产品随附说明或网站说明使用产品而造成损坏; (iv) 因事故、火灾、水灾、误用或滥用等导致的损坏; (v) 因未经 OURA 授权人许可维修、擅自更改或改装产品造成的损坏; 或 (vi) 与官方移动应用之外的任何其他应用或软件一起使用造成的损坏。

OURA 保留对产品进行维修或更换, 或提供全额退款的可撤销权利, 并可自行决定要求原始终端用户提供其原始购买信息。针对任何违反此有限保修条款的情形, 该等补救措施均构成用户唯一且排他的补救措施。新产品在保修期内的维修和更换将享有新的保修期, 通常为九(9)天或原始一年(1)年保修期剩余期限(以较长者为准)。翻新产品的保修承诺或更换

Regulatory

EU



Product information

Ring

→ Product type: Wellness ring

→ Model name: OA13

→ Brand: OURA

Charger

→ Product type: Charger for Wellness ring

→ Model Name: OA14

→ Brand: OURA

RF Interface

→ Frequency range 2402-2482MHz

→ Max output power 2.0mW

English

Hereby, Oura Health Oy declares that the radio equipment type OA13 and OA14 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Čeština

Tímto Oura Health Oy prohlašuje, že typ rádiového zařízení OA13 a OA14 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Dansk

Herved erklærer Oura Health Oy, at radioudstyrstypen OA13 og OA14 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Deutsch

Hiermit erklärt Oura Health Oy, dass die Funkanlagentypen OA13 und OA14 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Eesti keel

Käesolevaga kinnitab Oura Health Oy, et OA13- ja OA14-tüüpi raadioseadmed vastavad direktiivis 2014/53/EL sätestatud nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Ελληνικά

Με το παρόν, η Oura Health Oy δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου OA13 και OA14 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
ouraring.com/declaration-of-conformity (σύνδεσμος στα αγγλικά).

Suomi

Oura Health Oy vakuuttaa, että radiolaitetyypit OA13 ja OA14 ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla osoitteessa
ouraring.com/declaration-of-conformity

Français

Le soussigné, Oura Health Oy déclare que l'équipement radioélectrique du type OA13 et OA14 est conforme à la directive 2014/53/ UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Hrvatski

Oura Health Oy ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa OA13 i OA14 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst izjave EU-a o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Magyar

Az Oura Health Oy nyilatkozik, hogy az OA13 és az OA14 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Italiano

Il fabbricante, Oura Health Oy dichiara che il tipo di apparecchiatura radio OA13 e OA14 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Lietuvių kalba

Šiuo dokumentu „Oura Health Oy“ pareiškia, kad OA13 ir OA14 tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo interneto adresu:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Latviski

Uzņēmums Oura Health Oy paziņo, ka OA13 un OA14 tipa radioiekārtas atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta vietnē:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Nederlands

Hierbij verklaart Oura Health Oy dat de radioapparatuur van het type OA13 en OA14 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Norsk

Oura Health Oy erklærer med dette at radioutstyret av type OA13 og OA14 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettdress: ouraring.com/declaration-of-conformity

Polski

Firma Oura Health Oy niniejszym oświadczam, że sprzęt radiowy typu OA13 i OA14 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Português

A Oura Health Oy declara que o presente tipo de equipamento de rádio OA13 e OA14 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
ouraring.com/declarations-of-conformity

Slovenčina

Oura Health Oy týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu OA13 a OA14 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Uplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Svenska

Härmed försäkrar Oura Health Oy att radioutrustningstyperna OA13 och OA14 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Română

Prin prezenta, Oura Health Oy declară că tipurile de echipamente radio OA13 și OA14 sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Español

Por la presente, Oura Health Oy declara que los tipos OA13 y OA14 de equipo radioeléctrico son conformes con la Directiva 2014/53/

UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
ouraring.com/declaration-of-conformity

Български

С настоящото Oura Health Oy декларира, че този тип радиосъоръжения OA13 и OA14 са в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
ouraring.com/declaration-of-conformity

2014/53/EU

In order to satisfy the essential requirements of 2014/53/ EU Directive, the product is compliant with the following standards:

RF spectrum use	EN 300 328 v2.2.2 and EN 303 417 V1.1.1
EMC	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 55011:2016/A:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021
Health and Safety (RED art. 3.1a)	EN IEC 62311:2020 EN 62479:2010 EN 62368-1:2020
Network Protection	EN18031-1:2024, EN18031-2:2024

The conformity assessment procedure of Directive 2014/53/EU has been followed with the involvement of the following Notified Body: DEKRA Testing and Certification, S.A.U. Parque Tecnológico de Andalucía C/ Severo Ochoa nº 2 & 6 29590 Campanillas – Málaga SPAIN

This product is compliant with Directive 2012/19/EU. Please dispose of used electrical and electronic equipment (WEEE) according to national laws and regulations with electrical waste. It should not be mixed with general household waste.



Regulatory notices

USA

Qura Health Oy has not approved any changes or modifications to these devices by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

FCC regulatory information

FCC statements are available at the following internet address: ouraring.com/fcc-compliance-statements.

Devices (FCC ID: 2AD7V-OURA2601, FCC ID:2AD7V-OURA2602) comply with Part 15 and Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) devices may not cause harmful interference, and (2) devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 and Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause regulatory harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF exposure safety

This product is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Normal operation distance for Charger model OA14 is more than 20 cm from the human body. Normal operation distance for Ring model OA13 is less than 20 cm from the human body.

Canada

English

Qura Health Oy has not approved any changes or modifications to these devices by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) regulatory information.

Devices (CAN ICES-1 (B)/NMB-1(B), CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B); IC: 20635-OURA2601, IC:20635-OURA2602) comply with the Interference-Causing Equipment Standards and Innovation, Science and Economic Development Canada's license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. Devices may not cause interference; and
2. Devices must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF exposure safety

This product is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the ISED.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAN ICES-1 (B)/NMB-1(B), CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-001 and ICES-003.

Normal operation distance for Charger model OA14 is more than 20 cm from the human body. Normal operation distance for Ring model OA13 is less than 20 cm from the human body.

Français

Qura Health Oy n'approuve aucune modification apportée à l'appareil par l'utilisateur, quelle qu'en soit la nature. Tout changement ou modification peuvent annuler le droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Renseignements réglementaires d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

Les appareils (CAN ICES-1 (B)/NMB-1(B), CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B); IC:20635-OURA2601, IC:20635-OURA2602) sont conformes aux normes sur les équipements causant des interférences et à la/ aux norme(s) RSS exemptée(s) de licence par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Les appareils ne doivent pas causer d'interférences ; et
2. Les appareils doivent accepter toute interférence, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Sécurité de l'exposition aux RF

Ce produit est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie radiofréquence (RF) établies par l'ISDE.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner conjointement à une autre antenne ou émetteur.

CAN ICES-1 (B)/NMB-1(B), CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme aux ICES-001 et ICES-003 canadiens.

La distance de fonctionnement normale du chargeur modèle OA14 est supérieure à 20 cm du corps humain. La distance de fonctionnement normale de l'anneau modèle OA13 est inférieure à 20 cm du corps humain.



JZ50-59278.00